

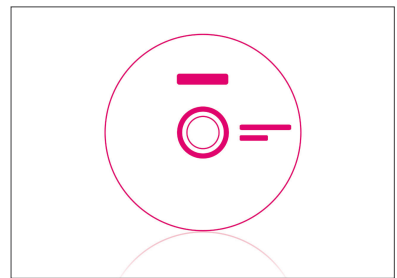
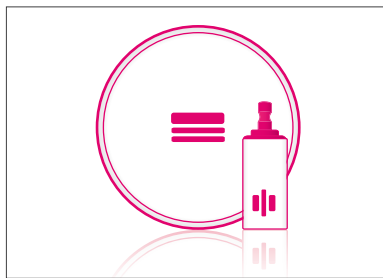
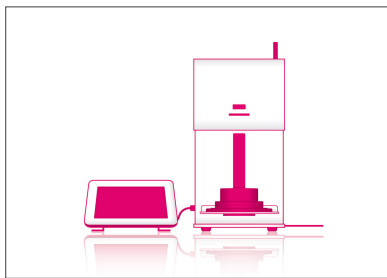
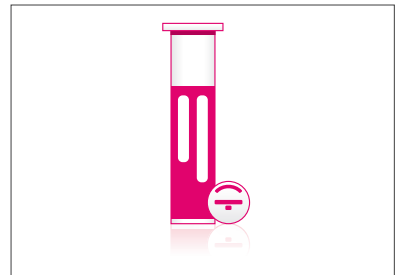


Compendium VITA Août 2016

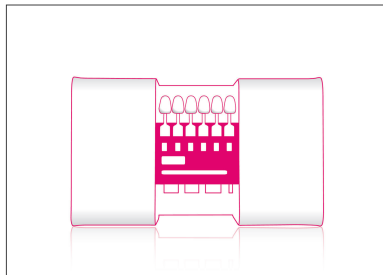

VITA shade, VITA made.

VITA

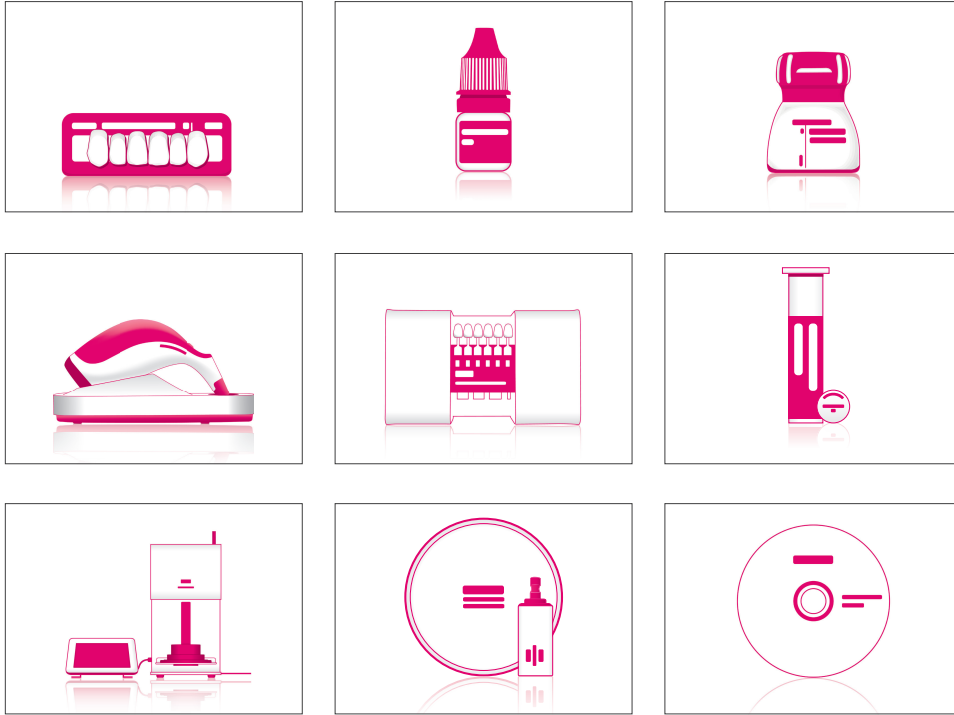

VITA shade, VITA made.

VITA

VITAPAN PLUS®

"L'esthétique n'a jamais été aussi réussie - Le naturel jamais aussi facilement reproduit"



Description du produit

La remarquable synergie entre une conception morphologique innovante et un concept de stratification moderne font de ces dents antérieures naturelles un événement unique. La portion plus importante d'émail crée une translucidité naturelle et procure aux dents VITALité et esthétique. L'exemple vivant a été brillamment "prothésisé" sur la base de critères esthétiques et fonctionnels très exigeants.

Matériau

Le matériau composite VITA MRP (microfiller reinforced polyacrylic) célèbre depuis des années qui est utilisé pour les dents VITAPAN PLUS continue de figurer au premier rang pour son comportement à l'abrasion, comme le démontrent les tests effectués.

Triage

18 x formes de dents antérieures maxillaires

6 x formes de dents antérieures mandibulaires

Liberté d'association

La dent antérieure VITAPAN PLUS se combine idéalement avec les dents postérieures VITA LINGOFORM.

Couleurs

15 couleurs VITA classical A1–D4® (sauf B1)

28 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® 1M1-5M3, y compris 0M1 et 0M3

Particularité

- Forte proportion d'émail pour une belle vivacité
- Morphologie de surface authentique pour un rayonnement naturel
- Bord incisif solide - idéal pour la prothèse complète & implanto-portée
- Se combine parfaitement avec les dents postérieures VITA LINGOFORM

VITAPAN PLUS® coffrets

VITAPAN Zahnlager vario

Concept de stock qui vous permet de bien gérer votre consommation de dents. Les stocks de dents sont conçus de façon modulaire : - Différents modules « petit, moyen et grand » – les stocks de dents antérieures sont à commander indépendamment des dents postérieures. Toutes les combinaisons sont possibles. Vous allez pouvoir gérer vos stocks d'une manière rentable et sans craindre les ruptures. La composition des modules est exactement calquée sur les besoins de votre laboratoire. Pour disposer d'un stock de dents personnalisé, contactez l'équipe commerciale VITA.

VITAPAN PLUS Antérieures

Formes	Couleurs	Désignation
18	0M1, 0M3; 1M1-5M3	Antérieures maxillaire
6	0M1, 0M3; 1M1-5M3	Antérieures mandibule

VITAPAN PLUS Antérieures

Formes	Couleurs	Désignation
18	A1-D4*	Antérieures maxillaire
6	A1-D4*	Antérieures mandibule

* sauf B1

VITAPAN PLUS® coffrets VITA classical A1-D4®

Carte de formes vivante VITAPAN PLUS® quadrichromie (dans un coffret en alu) VITA classical A1-D4® 144 antérieures
AVLFAV1

Couleur	Forme
A1	O41
A2	O43
A3	O45
A3.5	O47
A4	O47L
B2	O49
B3	O51
B4	T42
C1	T44
C2	T46
C3	T47
C4	T48
D2	T50
D3	T54

Couleur	Forme
D4	R45
A2	R47
A3	R49
B3	S46
A1	L33
A3	L35
A3.5	L37
A4	L37L
A2	L39
B3	L41

VITAPAN PLUS® coffrets VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Carte de formes vivantes VITAPAN PLUS® quadrichromie (dans un coffret en alu) VITA SYSTEM 3D-MASTER® 144 antérieures AVLFA3DV1*

Couleur	Forme
1M2	O41
2M2 (~ A2)	O43
3M2 (~ A3/D3)	O45
2R2.5	O47
4M2 (~ A4)	O47L
3R2.5 (~ A3,5)	O49
3L1.5 (~ C2/D4)	O51
0M1	T42
2L1.5 (~ B2)	T44
3M3 (~ B4)	T46
4L2.5	T47
3R1.5	T48
2M3	T50
3M1 (~ C1/D2)	T54
0M3	R45
1M1 (~ B4)	R47
2M1 (~ A1)	R49
2R1.5	S46
1M2	L33
2M2 (~ A2)	L35
3M2 (~ A3/D3)	L37
2R2.5	L37L

Couleur	Forme
4M2 (~ A4)	L39
3R2.5 (~ A3.5)	L41

* Les couleurs VITA classical A1-D4 indiquées ne sont pas identiques aux couleurs VITA SYSTEM 3D MASTER. Elles constituent la meilleure équivalence possible.

VITAPAN®

La gamme classique des dents en résine



Description du produit

Polyvalence et modernité - deux caractéristiques des dents en résine VITAPAN, la gamme de dents classique du programme de dents VITA.

Matériau

Le matériau composite VITA MRP (microfiller reinforced polyacrylic) célèbre depuis des années qui est utilisé pour les dents VITAPAN continue de figurer au premier rang pour son comportement à l'abrasion, comme le démontrent les tests effectués.

Triage

31 x formes de dents antérieures maxillaires (classées en quatre groupes)

13 x formes de dents antérieures mandibulaires

6 x formes de dents postérieures Cuspiform maxillaires

6 x formes de dents postérieures Cuspiform mandibulaires

5 x formes de dents postérieures Synoform maxillaires

5 x formes de dents postérieures Synoform mandibulaires

Couleurs

15 couleurs VITA classical A1–D4® (sauf B1)

28 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® 1M1-5M3, y compris 0M1 et 0M3 (sauf SYNOFORM)

Liberté d'association

La dent antérieure VITAPAN peut être combinée aux dents postérieures suivantes : VITA PHYSIODENS, VITA LINGOFORM, VITAPAN CUSPIFORM, VITAPAN SYNOFORM.

Particularité

- la plus grande offre de formes
- éprouvé durant des décennies, utilisé des millions de fois

VITAPAN® coffrets

VITAPAN Zahnlager vario

Concept de stock qui vous permet de bien gérer votre consommation de dents. Les stocks de dents sont conçus de façon modulaire : - Différents modules « petit, moyen et grand » – les stocks de dents antérieures sont à commander indépendamment des dents postérieures. Toutes les combinaisons sont possibles. Vous allez pouvoir gérer vos stocks d'une manière rentable et sans craindre les ruptures. La composition des modules est exactement calquée sur les besoins de votre laboratoire. Pour disposer d'un stock de dents personnalisé, contactez l'équipe commerciale VITA.

VITAPAN Antérieures

Formes	Couleurs	Désignation
31	1M1-5M3	Antérieures maxillaire
13	1M1-5M3	Antérieures mandibule

VITAPAN Antérieures

Formes	Couleurs	Désignation
31	A1-D4*	Antérieures maxillaire
13	A1-D4*	Antérieures mandibule

* sauf B1

VITAPAN Postérieures

Formes	Couleurs	Désignation
6	1M1-5M3	Postérieures Cuspiform maxillaire
6	1M1-5M3	Postérieures Cuspiform mandibule

VITAPAN Postérieures

Formes	Couleurs	Désignation
6	A1-D4*	Postérieures Cuspiform maxillaire
6	A1-D4*	Postérieures Cuspiform mandibule
5	A1-D4*	Postérieures Synoform maxillaire
5	A1-D4*	Postérieures Synoform mandibule

* sauf B1

VITAPAN® coffrets VITA classical A1-D4®

Carte de formes vivante VITAPAN® VITA SYSTEM 3D-MASTER® + VITA classical A1-D4® 96 postérieures Cuspiform / 80 postérieures Synoform A6LFCS*

Couleur	Forme
2M2 (~ A2)	40C OK
2M2 (~ A2)	40C UK
1M2 (~ B1)	41C OK
1M2 (~ B1)	41C UK
0M3	42C OK
0M3	42C UK
4L1,5 (~ C3)	43C OK
4L1,5 (~ C3)	43C UK
3M1 (~ C1/D2)	44C OK
3M1 (~ C1/D2)	44C UK
3M3 (~ B4)	45C OK
3M3 (~ B4)	45C UK
A2	10S OK
A2	10S UK
B2	11S OK
B2	11S UK
A3	12S OK
A3	12S UK
B3	13S OK
B3	13S UK
B4	14S OK
B4	14S UK

* Les couleurs VITA classical A1-D4 indiquées ne sont pas identiques aux couleurs VITA SYSTEM 3D MASTER elles constituent la meilleure équivalence possible.

**Carte de formes vivante VITAPAN® VITA classical A1-D4® 264
antérieures
A6LFFR***

Formes	Couleurs	Désignation
31	A1-D4*	Antérieures maxillaire
13	A1-D4*	Antérieures mandibule

* sauf B1

VITAPAN® coffrets VITA SYSTEM 3D-MASTER®

**Carte de formes vivante VITAPAN® VITA SYSTEM 3D-MASTER® 264
antérieures
A6LFF3DV2***

Couleur	Forme
---------	-------

Couleur	Forme
2M1 (~ A1)	O13
4M2 (~ A4)	O25
2R1.5	O34
3L2.5 (~ B3)	O35
1M2	O43
3L2.5 (~ B3)	O86
2M3	O97
0M3	O98
3M3 (~ B4)	O99
3L1.5 (~ C2/D4)	T36
1M1 (~ B1)	T53
2L1.5 (~ B2)	T56
2M2 (~ A2)	T66
3M1 (~ C1/D2)	T67
2L2.5	T76
0M3	T77
0M1	T88
3M2 (~ A3/D3)	T98
1M1 (~ B1)	T99
2R2.5	X13
2M3	X66
2R1.5	X77
2R2.5	X87
3R1.5	X96
3M3 (~ B4)	X99
3M2 (~ A3/D3)	Z51
2L2.5	Z61
2M1 (~ A1)	Z74
2L1.5 (~ B2)	Z84
4L1.5 (~ C3)	Z85
3M2 (~ A3/D3)	Z97
1M2	L3
2L1.5 (~ B2)	L5
2R2.5	L5L
0M1	L7
3L2.5 (~ B3)	L9
2L2.5	L11
2M2 (~ A2)	L13
3R2.5 (~ A3,5)	L15

Couleur	Forme
4M2 (~ A4)	L4
3M2 (~ A3/D3)	L8
2R2.5	L10
3L1.5 (~ C2/D4)	L12
3L2.5 (~ B3)	L14

* Les couleurs VITA classical A1-D4 indiquées ne sont pas identiques aux couleurs VITA SYSTEM 3D MASTER. Elles constituent la meilleure équivalence possible.

VITA PHYSIODENS®

Le charme de la beauté naturelle



Description du produit

VITA PHYSIODENS séduit tous les professionnels exigeants en matière d'esthétique et de fonction. Un choix précis de la couleur, un montage biologique et un matériau de très haute qualité garantissent des résultats irréprochables.

Matériau

Le matériau composite VITA MRP (microfiller reinforced polyacrylic) célèbre depuis des années qui est utilisé pour les dents VITA PHYSIODENS continue de figurer au premier rang pour son comportement à l'abrasion, comme le démontrent les tests effectués.

Triage

21 x formes de dents antérieures maxillaires (classées en quatre groupes)

8 x formes de dents antérieures mandibulaires

6 x formes de dents postérieures maxillaires

6 x formes de dents postérieures mandibulaires

Couleurs

15 couleurs VITA classical A1–D4® (sauf B1)

28 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® 1M1-5M3, y compris 0M1 et 0M3

Liberté d'association

Les dents antérieures VITA PHYSIODENS peuvent aussi se combiner avec les dents postérieures VITA PHYSIODENS, VITAPAN CUSPIFORM ou VITA LINGOFORM.

Particularité

Propriétés :

surfaces occlusales 100% anatomiques calquées sur l'exemple vivant.

Conclusion :

spécialement conçue pour la prothèse BIO-Logique du Dr. End selon les lois du guidage mandibulaire neuromusculaire.

Avantages :

une prothèse de très grande qualité inspirée de la nature.

VITA PHYSIODENS® coffrets

VITA PHYSIODENS Zahnlager vario

Concept de stock qui vous permet de bien gérer votre consommation de dents. Les stocks de dents sont conçus de façon modulaire : - Différents modules « petit, moyen et grand » – les stocks de dents antérieures sont à commander indépendamment des dents postérieures. Toutes les combinaisons sont possibles. Vous allez pouvoir gérer vos stocks d'une manière rentable et sans craindre les ruptures. La composition des modules est exactement calquée sur les besoins de votre laboratoire. Pour disposer d'un stock de dents personnalisé, contactez l'équipe commerciale VITA.

VITA PHYSIODENS Antérieures

Formes	Couleurs	Désignation
21*	1M1-5M3	Antérieures maxillaire
8*	1M1-5M3	Antérieures mandibulaire

* Les formes O1S, T2S, T4M, T8L, X1M, L1S, L2M, L3M, L4M, L5M sont disponibles dans les couleurs VITA SYSTEM 3DMASTER BLEACHED Colors 0M1 et 0M3

VITA PHYSIODENS Antérieures

Formes	Couleurs	Désignation
20	A1-D4*	Antérieures maxillaire
8	A1-D4*	Antérieures mandibule

* sauf B1

VITA PHYSIODENS Postérieures

Formes	Couleurs	Désignation
6*	1M1-5M3	Postérieures maxillaire
6*	1M1-5M3	Postérieures mandibule

* Les formes 21E, 22E, 23E, 24E sont disponibles dans la couleur blanche VITA SYSTEM 3D-MASTER BLEACHED 0M3

VITA PHYSIODENS Postérieures

Formes	Couleurs	Désignation
6*	A1-D4*	Postérieures maxillaire
6*	A1-D4*	Postérieures mandibule

* sauf B1

VITA PHYSIODENS® coffrets VITA classical A1-D4®

**Carte de formes vivante VITA PHYSIODENS® VITA classical A1-D4® 168
antérieures / 96 postérieures**

A6LFP*

Formes	Couleurs	Désignation
20	A1-D4*	Antérieures maxillaire
8	A1-D4*	Antérieures mandibule
6	A1-D4*	Postérieures maxillaire
6	A1-D4*	Postérieures mandibule

* sauf B1

VITA PHYSIODENS® coffrets VITA SYSTEM 3D-MASTER®
**Carte de formes vivantes VITA PHYSIODENS® VITA SYSTEM
3D-MASTER® 174 antérieures / 96 postérieures
A6LFP3D***

Couleur	Forme
0M1	O1S
1M1 (~ B1)	O2L
1M1 (~ B1)	O3M
1M2	O4L
2L1.5 (~ B2)	O5L
2L1.5 (~ B2)	O6L
2L2.5	T6S
0M3	T2S
2M1 (~ A1)	T1S
2M3	T3M
2R1.5	T4M
2R2.5	T5M
3L1.5 (~ C2/D4)	T6L
3L2.5 (~ B3)	T7M
3M1 (~ C1/D2)	T8L
3M2 (~ A3/D3)	T9L
3M3 (~ B4)	X1M
3R1.5	X2L
3R2.5 (~ A3,5)	X3L
4L1.5 (~ C3)	Z1S
2M2 (~ A2)	Z2S
4M2 (~ A4)	L1S
4M2 (~ A4)	L2M
2R1.5	L3M
2R2.5	L4M
1M2	L5M

Couleur	Forme
3M1 (~ C1/D2)	L6L
1M1 (~B1)	L7L
2M3	L8L
1M2	20EO
1M2	20EU
2L1.5 (~ B2)	21EO
2L1.5 (~ B2)	21EU
2M2 (~ A2)	22EO
2M2 (~ A2)	22EU
2R2.5	23EO
2R2.5	23EU
3R1.5	24EO
3R1.5	24EU
3R2.5 (~ A3,5)	25EO
3R2.5 (~ A3,5)	25EU

* Les couleurs VITA classical A1-D4 indiquées ne sont pas identiques aux couleurs VITA SYSTEM 3D MASTER. Elles constituent la meilleure équivalence possible.

VITA LINGOFORM®

Une dent pour tous les cas cliniques qui s'associe avec les dents antérieures VITA PHYSIODENS, VITAPAN et VITAPAN PLUS



Description du produit

VITA LINGOFORM – la dent plurifonctionnelle pour tous les cas : **UNE POUR TOUT.**

Les surfaces occlusales fonctionnelles contribuent efficacement à une orientation statique idéale de la prothèse in situ, favorisent une préservation de la substance et offrent un remarquable confort en bouche.

Matériau

Le matériau composite VITA MRP (microfiller reinforced polyacrylic) célèbre depuis des années qui est utilisé pour les dents VITA LINGOFORM continue de figurer au premier rang pour son comportement à l'abrasion, comme le démontrent les tests effectués.

Triage

4 x formes de dents postérieures maxillaires

4 x formes de dents postérieures mandibulaires

Couleurs

15 couleurs VITA classical A1–D4® (sauf B1)

27 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® 1M1-5M3, y compris 0M3

Liberté d'association

Les dents postérieures VITA LINGOFORM seront combinées en priorité avec les dents antérieures VITAPAN PLUS.

Particularité

Propriétés :

surfaces occlusales anatomiques et pré-abrasées caractérisées par une conception conforme à l'âge.

Conclusion :

à utiliser pour tous les concepts de montage en particulier le montage lingualé selon les lois du guidage mécanique dentaire et condylien et du guidage mandibulaire neuromusculaire.

Avantages :

une dent pour toutes les situations, simple, sûre, rapide et précise.

VITA LINGOFORM® coffrets

VITA LINGOFORM Zahnlager vario

Concept de stock qui vous permet de bien gérer votre consommation de dents. Les stocks de dents sont conçus de façon modulaire : - Différents modules « petit, moyen et grand » – les stocks de dents antérieures sont à commander indépendamment des dents postérieures. Toutes les combinaisons sont possibles. Vous allez pouvoir gérer vos stocks d'une manière rentable et sans craindre les ruptures. La composition des modules est exactement calquée sur les besoins de votre laboratoire. Pour disposer d'un stock de dents personnalisé, contactez l'équipe commerciale VITA.

VITA LINGOFORM Posteriores

Formes	Couleurs	Désignation
4	0M3; 1M1-5M3	Posteriores maxillaire
4	0M3; 1M1-5M3	Posteriores mandibulaire

VITA LINGOFORM Posteriores

Formes	Couleurs	Désignation
4	A1-D4*	Posteriores maxillaire
4	A1-D4*	Posteriores mandibulaire

* sauf B1

VITA LINGOFORM® coffrets VITA classical A1-D4®
**Carte de formes vivantes VITA LINGOFORM VITA classical A1-D4® 240
postérieures
A5LFLV1**

Couleur	Forme
A1	21LO
A1	21LU
A2	21LO
A2	21LU
A3	21LO
A3	21LU
A3.5	21LO
A3.5	21LU
A4	22LO
A4	22LU
B2	22LO
B2	22LU
B3	22LO
B3	22LU

Couleur	Forme
B4	22LO
B4	22LU
C1	23LO
C1	23LU
C2	23LO
C2	23LU
C3	23LO
C3	23LU
C4	23LO
C4	23LU
D2	24LO
D2	24LU
D3	24LO
D3	24LU
D4	24LO
D4	24LU

VITA LINGOFORM® coffrets VITA SYSTEM 3D-MASTER®

**Carte de formes vivantes VITA LINGOFORM VITA SYSTEM 3D-MASTER®
288 postérieures
A5LFL3DV1***

Couleur	Forme
0M3	21LO
0M3	21LU
1M1 (~ B1)	21LO
1M1 (~ B1)	21LU
1M2	21LO
1M2	21LU
2L1.5 (~ B2)	21LO
2L1.5 (~ B2)	21LU
2L2.5	21LO
2L2.5	21LU
2M1 (~ A1)	22LO
2M1 (~ A1)	22LU
2M2 (~ A2)	22LO
2M2 (~ A2)	22LU
2M3	22LO
2M3	22LU

Couleur	Forme
2R1.5	22LO
2R1.5	22LU
2R2.5	22LO
2R2.5	22LU
3L1.5 (~ C2/D4)	23LO
3L1.5 (~ C2/D4)	23LU
3L2.5 (~ B3)	23LO
3L2.5 (~ B3)	23LU
3M1 (~ C1/D2)	23LO
3M1 (~ C1/D2)	23LU
3M2 (~ A3/D3)	23LO
3M2 (~ A3/D3)	23LU
3M3 (~ B4)	23LO
3M3 (~ B4)	23LU
3R1.5	24LO
3R1.5	24LU
3R2.5 (~ A3.5)	24LO
3R2.5 (~ A3.5)	24LU
4L1.5 (~ C3)	24LO
4L1.5 (~ C3)	24LU

* Les couleurs VITA classical A1-D4 indiquées ne sont pas identiques aux couleurs VITA SYSTEM 3D MASTER. Elles constituent la meilleure équivalence possible.

VITA LUMIN® VACUUM

Des dents en porcelaine de très grande qualité



Description du produit

Les dents en céramique conviennent à toutes les indications de la prothèse amovible de prestige, complète et partielle. Elles sont très brillantes grâce à leur effet Lumin. En termes de conductibilité lumineuse, d'opalescence et de fluorescence, elles n'ont rien à envier à l'exemple vivant. Ces dents uniques fabriquées à la main en Allemagne sont en plus dotées d'éléments d'ancrage mécanique dans la base prothétique afin de garantir la pérennité des prothèses :

- dents antérieures avec tenons plaqués or dans le noyau dur de la céramique,
- dents postérieures avec contre dépouilles.

Couleurs

10 couleurs VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3)

Pour toutes les couleurs supplémentaires s'applique un délai de livraison.

Liberté d'association

Les dents antérieures VITA LUMIN VACUUM sont parfaitement adaptées aux deux gammes de dents postérieures VITA LUMIN VACUUM.

VITA LUMIN® VACUUM coffrets

VITA LUMIN VACUUM Anterieores *

Formes	Dents par plaquette	Désignation
20	6	Anterieores maxillaire
6	6	Anterieores mandibule

* en couleurs VITA classical A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3

VITA LUMIN VACUUM Posteriores

Formes	Dents par plaquette	Désignation
3	8	Posteriores Synoform maxillaire
3	8	Posteriores Synoform mandibule
3	8	Posteriores Cuspiform maxillaire
3	8	Posteriores Cuspiform mandibule

VITA LUMIN® VACUUM coffrets

**Carte de formes vivante VITA LUMIN® VACUUM 156 antérieures / 96
postérieures
A1LF**

Quantité	Contenu	Désignation
20 x 6	4	Anterieores maxillaire
6 x 6	36	Anterieores mandibule

Meuble à dents vario

Meubles en plastique



Description du produit

Le meuble à dents VITA vario avec ses vastes possibilités de stockage et son faible encombrement est parfait pour le rangement de tous les stocks de dents VITA.

Ce mobilier inédit est modulable grâce au rajout possible de tiroirs supplémentaires. Il est conçu dans un plastique de haute qualité, résistant et d'une couleur gris clair neutre.

Les tiroirs sont très maniables et entièrement extractibles grâce à une glissière télescopique des deux côtés.

Le meuble à dents VITA vario fait partie du système VITA Modulbox et donc compatible avec tous les modules de ce système.

Triage

Contenance par tiroir:

72 x 6 = 432 antérieures en plaquettes de 6 dents

48 x 8 = 384 postérieures en plaquettes de 8 dents

Meuble à dents vario articles**Meuble à dents vario**

Désignation	N° art.
Meuble S10 avec 10 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 350 mm	ZMBS10
Meuble S12 avec 12 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 420 mm	ZMBS12
Meuble S2 avec 2 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 70 mm	ZMBS2
Meuble S4 avec 4 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 140 mm	ZMBS4
Meuble S6 avec 6 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 210 mm	ZMBS6
Meuble S8 avec 8 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 280 mm	ZMBS8

Adhésif VITACOLL®

Adhésif pour dents en résine



Description du produit

VITACOLL colle efficacement les dents en résine à la résine prothétique. L'emploi de différentes résines prothétiques complique la tâche du prothésiste car il est souvent difficile de savoir si les dents en résine utilisées colleront à la résine prothétique. Grâce à VITACOLL, tous les doutes sont dissipés.

Flacon de 100 ml

Avantages

L'adhésif VITACOLL crée une liaison chimique sûre entre les dents en résine et les résines thermo ou autopolymérisables, les résines polyméthacrylate ou injectées. Il prévient tout décollement des dents.

Adhésif VITACOLL® articles**Adhésif VITACOLL®**

Désignation	N° art.
VITACOLL, 100 ml	A9C100

Film isolant silicone VITAFOL[®] H

Vernis isolant pour les dents artificielles lors de la fabrication de la prothèse



Description du produit

VITAFOL H est un vernis silicone isolant pour la protection des dents en résine et en céramique lors de la fabrication de la prothèse.

Avantages

- VITAFOL H protège les dents en résine et en céramique. Les plus infimes détails du liseré gingival sont préservés. Avec VITAFOL H, les zones vernies demeurent propres et ne nécessitent plus de dégrossissage.
- Plus besoin d'isoler du plâtre les zones vernies avec VITAFOL H. Aucun isolant ne peut donc plus infiltrer la base des dents. Avec des dents en résine, on évite ainsi la formation d'une couche barrière entre les dents et la résine de base.
- VITAFOL H grâce à son effet tampon évite la détérioration des dents lors de la pressée et du démoulage.

Film isolant silicone VITAFOL® H coffrets**Film isolant silicone VITAFOL® H****Coffret Eco VITAFOL H
A9FG***

Quantité	Contenu	Matériau
3	70 ml	Pâte VITAFOL H
3	15 ml	Liquide de mélange VITAFOL H
3	80 g	Cristaux VITAFOL H
1	pièce	Bloc de mélange
1	pièce	Pinceau
		Mode d'emploi

* Quantité suffisante pour env. 300 prothèses de 14 dents

**Coffret labo VITAFOL H
A9FL***

Quantité	Contenu	Matériau
1	70 ml	Pâte VITAFOL H
1	15 ml	Liquide durcisseur VITAFOL H
1	80 g	Cristaux VITAFOL H
1	pièce	Bloc de mélange
1	pièce	Pinceau
		Mode d'emploi

* Quantité suffisante pour env. 100 prothèses de 14 dents

Film isolant silicone VITAFOL® H articles**Film isolant silicone VITAFOL® H**

Désignation	N° art.
VITAFOL H Liquide durcisseur, 15 ml	A9F15
VITAFOL H Cristaux, 80 g	A9F50
VITAFOL H PASTE, 70 ml	A9F90
VITAFOL H Bloc de mélange imprimé, 50 feuilles	A9FA
VITAFOL H Pinceau n° 11	A9FP



VITA shade, VITA made.

VITA

VITAVM®7

Céramique à fine structure pour les matériaux d'infrastructure en céramo-céramique dans une plage CDT de 7,2-7,8



Description du produit

VITA VM 7 est une céramique cosmétique à structure fine, spécialement conçue pour les matériaux d'infrastructure en céramo-céramique dont le CDT se situe entre 7,2–7,8 (en Al_2O_3).

Comme tous les masses VITA VM, VITA VM 7 se caractérise par des propriétés de réfraction et de réflexion de la lumière similaires à celles de l'émail naturel. L'utilisation de masses complémentaires fluorescentes et opalescentes permet d'obtenir des résultats extrêmement personnalisés et de grande qualité esthétique.

Avantages

- Parfaites propriétés de mise en oeuvre comme par ex. tenue et comportement à la sculpture.
- Excellente aptitude au meulage et au polissage.
- État de surface homogène et dense notamment en bouche.
- La similitude de ses propriétés avec celles de l'émail a été prouvée.
- Stabilité à la cuisson irréprochable même après plusieurs cuissons.
- Une palette de masses complémentaires bien étudiée pour la personnalisation.
- Compatible avec les masses VITA AKZENT Plus et VITA INTERNO.

Avis

Une étude de Giordano à la Goldman School of Dental Medicine, université de Boston, a comparé le comportement à l'abrasion de différentes céramiques par rapport à celui de l'émail naturel. VITA VM 7 a été jugée la meilleure dans ce domaine car cette céramique à fine structure se comporte quasiment comme l'émail naturel.

Couleurs

Disponible exclusivement en couleurs du VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITAVM®7 coffrets

VITAVM®7 VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITAVM®7 BASIC KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Coffret de base pour la stratification BASIC

BV7BK12N

Quantité	Contenu	Matériau
26	12 g	VITA VM 7 BASE DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
2	12 g	VITA VM 7 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 7 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 7 WINDOW WIN
3	12 g	VITA VM 7 EFFECT LINER EL2 - EL4
3	12 g	VITA VM 7 CORRECTIVE COR1 - COR3
3	12 g	VITA VM 7 CHROMA PLUS CP2 - CP4
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1		VITA MODISOL
1		Ouate support de cuisson, 2 pièces
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Indicateur de couleurs VITA VM 7 3D-MASTER
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide



VITAVM®7 BASIC KIT SMALL VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Petit coffret de base pour la stratification BASIC

BV7BKS12N

Quantité	Contenu	Matériau
15	12 g	VITA VM 7 BASE DENTINE 1M2 - 1M1
2	12 g	VITA VM 7 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 7 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 7 WINDOW WIN
1	12 g	VITA VM 7 CORRECTIVE COR1
3	12 g	VITA VM 7 EFFECT LINER EL2 - EL4
3	12 g	VITA VM 7 CHROMA PLUS CP2 - CP4
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1		VITA MODISOL
1		Ouate support de cuisson, 2 pièces
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Indicateur de couleurs VITA VM 7 3D-MASTER
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide



VITAVM®7 BLEACHED COLOR KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Couleurs ultra claires pour la reproduction des dents blanchies
BV7BLK

Quantité	Contenu	Matériau
3	12 g	VITA VM 7 BASE DENTINE 0M1 - 0M3
3	12 g	VITA VM 7 TRANSPA DENTINE 0M1 - 0M3
1	12 g	VITA VM 7 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 7 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 7 WINDOW WIN
1	12 g	VITA VM 7 EFFECT LINER EL1
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1		VITA BLEACHED SHADE GUIDE, Shade Group 0



VITAVM®7 BUILD UP KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Coffret pour la stratification BUILD UP
BV7BUK12

Quantité	Contenu	Matériau
26	12 g	VITA VM 7 TRANSPA DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID

VITAVM®7 BUILD UP KIT SMALL VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Petit coffret pour la stratification BUILD UP
BV7BUKS12

Quantité	Contenu	Matériau
15	12 g	VITA VM 7 TRANSPA DENTINE 1M1 - 4M3
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID



VITAVM®7 ONE COLOR KIT 2M2
Coffret d'essai pour premiers tests
BV7OCK2M2V2

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VM 7 BASE DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VM 7 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 7 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA barrette de couleur 2M2

VITAVM®7 ONE COLOR KIT 3M2
Coffret d'essai pour premiers tests
BV7OCK3M2V2

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VM 7 BASE DENTINE 3M2
1	12 g	VITA VM 7 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 7 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA barrette de couleur 3M2

VITAVM®7 masse supplémentaires

VITAVM®7 GINGIVA KIT
Masses gingivales naturelles
BV7GKV1

Quantité	Contenu	Matériau
5	12 g	VITA VM 7 GINGIVA G1 - G5
1		Plaquette de couleurs VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®7 MARGIN KIT
Uniquement pour petites corrections dans la zone marginale
BV7MKV1

Quantité	Contenu	Matériau
6	12 g	VITA VM 7 MARGIN M1, M4 - M5, M7 - M9
1		Plaquette de couleurs VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®7 PROFESSIONAL KIT SMALL
Pour création d'effets et de caractérisations
BV7PKS

Quantité	Contenu	Matériau
5	12 g	VITA VM 7 EFFECT CHROMA EC1, EC4, EC6, EC8 - EC9
1	12 g	VITA VM 7 MAMELON MM2
1	12 g	VITA VM 7 EFFECT PEARL EP1
1	12 g	VITA VM 7 EFFECT OPAL EO2
7	12 g	VITA VM 7 EFFECT ENAMEL EE1, EE3, EE7 - EE11
1		Plaquette de couleurs VITA VM PROFESSIONAL KIT SMALL



VITAVM®7 PROFESSIONAL KIT
Pour création d'effets et de caractérisations
BV7PKV2

Quantité	Contenu	Matériau
11	12 g	VITA VM 7 EFFECT CHROMA EC1 - EC11
3	12 g	VITA VM 7 MAMELON MM1 - MM3
3	12 g	VITA VM 7 EFFECT PEARL EP1 - EP3
5	12 g	VITA VM 7 EFFECT OPAL EO1 - EO5
11	12 g	VITA VM 7 EFFECT ENAMEL EE1 - EE11
6	12 g	VITA VM 7 EFFECT LINER EL1 - EL6
1		Plaquette de couleurs VITA VM EFFECT LINER / EFFECT OPAL / MAMELON
1		Plaquette de couleurs VITA VM EFFECT CHROMA
1		Plaquette de couleurs VITA VM EFFECT ENAMEL / EFFECT PEARL

VITAVM®7 articles**VITAVM®7 VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITA VM 7 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g
0M1	ENL	B4103112	-
0M2	ENL	B4103212	-
0M3	ENL	B4103312	-
1M1	ENL	B4103412	B4103450
1M2	ENL	B4103512	B4103550
2L1.5	ENL	B4103612	-
2L2.5	ENL	B4103712	-
2M1	ENL	B4103812	B4103850
2M2	ENL	B4103912	B4103950
2M3	ENL	B4104012	B4104050
2R1.5	ENL	B4104112	-
2R2.5	ENL	B4104212	-
3L1.5	ENL	B4104312	B4104350
3L2.5	ENL	B4104412	B4104450
3M1	ENL	B4104512	B4104550
3M2	ENL	B4104612	B4104650
3M3	ENL	B4104712	B4104750
3R1.5	ENL	B4104812	B4104850
3R2.5	ENL	B4104912	B4104950
4L1.5	END	B4105012	-
4L2.5	END	B4105112	-
4M1	END	B4105212	B4105250
4M2	END	B4105312	B4105350
4M3	END	B4105412	B4105450
4R1.5	END	B4105512	-
4R2.5	END	B4105612	-
5M1	END	B4105712	-
5M2	END	B4105812	-
5M3	END	B4105912	-

VITA VM 7 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g
0M1	ENL	B4106112	-
0M2	ENL	B4106212	-
0M3	ENL	B4106312	-
1M1	ENL	B4106412	B4106450
1M2	ENL	B4106512	B4106550
2L1.5	ENL	B4106612	-
2L2.5	ENL	B4106712	-
2M1	ENL	B4106812	B4106850
2M2	ENL	B4106912	B4106950
2M3	ENL	B4107012	B4107050
2R1.5	ENL	B4107112	-
2R2.5	ENL	B4107212	-
3L1.5	ENL	B4107312	B4107350
3L2.5	ENL	B4107412	B4107450
3M1	ENL	B4107512	B4107550
3M2	ENL	B4107612	B4107650
3M3	ENL	B4107712	B4107750
3R1.5	ENL	B4107812	B4107850
3R2.5	ENL	B4107912	B4107950
4L1.5	END	B4108012	-
4L2.5	END	B4108112	-
4M1	END	B4108212	B4108250
4M2	END	B4108312	B4108350
4M3	END	B4108412	B4108450
4R1.5	END	B4108512	-
4R2.5	END	B4108612	-
5M1	END	B4108712	-
5M2	END	B4108812	-
5M3	END	B4108912	-

VITAVM®7 masse supplémentaires

VITA VM 7 EFFECT ENAMEL, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
EE1	B4109112
EE2	B4109212
EE3	B4109312
EE4	B4109412
EE5	B4109512
EE6	B4109612
EE7	B4109712
EE8	B4109812
EE9	B4109912
EE10	B4110012
EE11	B4110112

VITA VM 7 EFFECT CHROMA, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
EC1	B4112112
EC2	B4112212
EC3	B4112312
EC4	B4112412
EC5	B4112512
EC6	B4112612
EC7	B4112712
EC8	B4112812
EC9	B4112912
EC10	B4113012
EC11	B4113112

VITA VM 7 EFFECT LINER, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
EL1	B4114112
EL2	B4114212
EL3	B4114312
EL4	B4114412
EL5	B4114512
EL6	B4114612

VITA VM 7 EFFECT PEARL, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
EP1	B4115112
EP2	B4115212
EP3	B4115312

VITA VM 7 MAMELON, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
MM1	B4116112
MM2	B4116212
MM3	B4116312

VITA VM 7 EFFECT OPAL, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
E01	B4117112
E02	B4117212
E03	B4117312
E04	B4117412
E05	B4117512

VITA VM 7 WINDOW, 12 g / 50 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g
WIN	B4118112	B4118150

VITA VM 7 ENAMEL, 12 g / 50 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g
ENL	B4119112	B4119150
END	B4119212	B4119250

VITA VM 7 NEUTRAL, 12 g / 50 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g
NT	B4120112	B4120150

VITA VM 7 CORRECTIVE, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
COR1	B4122112
COR2	B4122212
COR3	B4122312

VITA VM 7 GINGIVA, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
G1	B4123112
G2	B4123212
G3	B4123312
G4	B4123412
G5	B4123512

VITA VM 7 CHROMA PLUS, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
CP2	B4124212
CP3	B4124312
CP4	B4124412

VITA VM 7 MARGIN, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
M1	B4126112
M4	B4126412
M5	B4126512
M7	B4126712
M8	B4126812
M9	B4126912

VITAVM®9

Céramique cosmétique feldspathique naturelle à structure fine pour infrastructures en dioxyde de zirconium, VITABLOCS Mark II et VITA PM 9



Description du produit

VITA VM 9 est une céramique feldspathique à structure fine très esthétique dont le CDT est parfaitement adapté aux infrastructures en dioxyde de zirconium (env. 10,5 comme par ex. VITA YZ), blanc, teinté ou translucide, peu importe.

De plus, VITA VM 9 est recommandée pour la personnalisation des restaurations en VITABLOCS Mark II et en céramique à presser VITA PM 9.

Les principaux composants sont des feldspaths purs de potassium et d'albite qui apportent un rendu de couleur magnifique et possèdent de parfaites propriétés physiques telle qu'une très haute résistance en flexion.

Grâce à un état de surface compact et homogène, VITA VM 9 se fraise et se polit en bouche particulièrement bien. L'état de surface ainsi obtenu est très lisse et dense.

La plaque adhère beaucoup moins à la céramique ce qui contribue à un bon entretien de la prothèse.

VITA VM 9 est une composante de qualité du concept innovant VITA VM - la solution universelle pour toutes les indications courantes. Céramo-métallique, céramo-céramique ou composite : les possibilités sont sans limite !

Les colorants VITA AKZENT Plus et VITA INTERNO permettent de personnaliser et de caractériser la restauration.

Avantages

- Rendu chromatique naturel et dynamique lumineuse et parfaites propriétés physiques grâce à la structure fine.
- Excellente cohésion pour des résultats sûrs et des restaurations pérennes.
- Retrait minime pour limiter les cuissons répétées.
- Excellente aptitude à la sculpture pour un montage rapide et ciblé de la céramique.
- Palette complète de masses complémentaires pour d'excellents effets optiques.
- Personnalisable avec VITA AKZENT Plus et VITA INTERNO.
- Sécurité des processus grâce à de longues années d'expérience.
- Disponible en couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1–D4.

VITAVM®9 coffrets

VITAVM®9 VITA classical A1-D4®



VITAVM®9 BASIC KIT VITA classical A1-D4®

Coffret pour la stratification BASIC

BV9BK12CV2

Quantité	Contenu	Matériau
16	12 g	VITA VM 9 BASE DENTINE A1 - D4
5	12 g	VITA VM 9 CHROMA PLUS CP1 - CP5
2	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 9 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
3	12 g	VITA VM 9 CORRECTIVE COR1 - COR3
3	12 g	VITA VM 9 SUN DENTINE SD1 - SD3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1		VITA MODISOL
1		Ouate support de cuisson, 2 pièces
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Indicateur de couleurs VITA VM 9 classical
1		Teintier VITA classical A1-D4



VITAVM®9 BASIC KIT SMALL VITA classical A1-D4®

Petit coffret de base pour la stratification BASIC

BV9BKS12CV2

Quantité	Contenu	Matériau
6	12 g	VITA VM 9 BASE DENTINE A1 - A3.5, B3, D3
5	12 g	VITA VM 9 CHROMA PLUS CP1 - CP5
2	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 9 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	12 g	VITA VM 9 CORRECTIVE COR1
3	12 g	VITA VM 9 SUN DENTINE SD1 - SD3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1		VITA MODISOL
1		Ouate support de cuisson, 2 pièces
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Indicateur de couleurs VITA VM 9 classical
1		Teintier VITA classical A1-D4



VITAVM®9 BUILD UP KIT VITA classical A1-D4®
Coffret pour la stratification BUILD UP
BV9BUK12CV1

Quantité	Contenu	Matériau
16	12 g	VITA VM 9 TRANSPA DENTINE A1 - D4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS



VITAVM®9 BUILD UP KIT SMALL VITA classical A1-D4®
Petit coffret pour la stratification BUILD UP
BV9BUKS12CV1

Quantité	Contenu	Matériau
6	12 g	VITA VM 9 TRANSPA DENTINE A1 - A3.5, B3, D3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS



VITAVM®9 CLASSICAL COLOR KIT
Coffret complémentaire pour les utilisateurs de VITA VM 9 3D-MASTER
BV9CCK12V2*

Quantité	Contenu	Matériau
16	12 g	VITA VM 9 BASE DENTINE A1 - D4
16	12 g	VITA VM 9 TRANSPA DENTINE A1 - D4
2	12 g	VITA VM 9 CHROMA PLUS CP1, CP5
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1		Indicateur de couleurs VITA VM 9 classical
1		Teintier VITA classical A1-D4

* Le coffret pour les clients VITA VM 9 SYSTEM 3D-MASTER souhaitant compléter leur coffret actuel avec VITA classical A1-D4



VITAVM®9 ONE COLOR KIT A2
Coffret d'essai pour les premiers tests
BV9OCKA2V3

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VM 9 BASE DENTINE A2
1	12 g	VITA VM 9 CHROMA PLUS CP2
1	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA barrette de couleur A2



VITAVM®9 ONE COLOR KIT A3
Coffret d'essai pour premiers tests
BV9Ocka3V3

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VM 9 BASE DENTINE A3
2	12 g	VITA VM 9 CHROMA PLUS CP2 - CP3
1	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA barrette de couleur A3

VITAVM®9 VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITAVM®9 BASIC KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Coffret pour la stratification BASIC
BV9BK12V3

Quantité	Contenu	Matériau
26	12 g	VITA VM 9 BASE DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
2	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 9 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
3	12 g	VITA VM 9 CORRECTIVE COR1 - COR3
3	12 g	VITA VM 9 CHROMA PLUS CP2 - CP4
3	12 g	VITA VM 9 SUN DENTINE SD1 - SD3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1		VITA MODISOL
1		Ouate support de cuisson, 2 pièces
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Indicateur de couleurs VITA VM 9 3D-MASTER
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide



VITAVM®9 BASIC KIT SMALL VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Petit coffret de base pour la stratification BASIC
BV9BKS12V3

Quantité	Contenu	Matériau
15	12 g	VITA VM 9 BASE DENTINE 1M1 - 4M3
2	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 9 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	12 g	VITA VM 9 CORRECTIVE COR1
3	12 g	VITA VM 9 CHROMA PLUS CP2 - CP4
3	12 g	VITA VM 9 SUN DENTINE SD1 - SD3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1		VITA MODISOL
1		Ouate support de cuisson, 2 pièces
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Indicateur de couleurs VITA VM 9 3D-MASTER
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide



VITAVM®9 BLEACHED COLOR KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Couleurs ultra claires pour la reproduction des dents blanchies
BV9BLKV2

Quantité	Contenu	Matériau
3	12 g	VITA VM 9 BASE DENTINE 0M1 - 0M3
3	12 g	VITA VM 9 TRANSPA DENTINE 0M1 - 0M3
1	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 9 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1		VITA BLEACHED SHADE GUIDE, Shade Group 0



VITAVM®9 BUILD UP KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Coffret pour la stratification BUILD UP
BV9BUK12V1

Quantité	Contenu	Matériau
26	12 g	VITA VM 9 TRANSPA DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS

VITAVM®9 BUILD UP KIT SMALL VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Petit coffret pour la stratification BUILD UP

BV9BUKS12V1

Quantité	Contenu	Matériau
15	12 g	VITA VM 9 TRANSPA DENTINE 1M1 - 4M3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS



VITAVM®9 ONE COLOR KIT 2M2

Coffret d'essai pour premiers tests

BV9OCK2M2V4

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VM 9 BASE DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA barrette de couleur 2M2



VITAVM®9 ONE COLOR KIT 3M2

One-shade kit for initial tests

BV9OCK3M2V3

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VM 9 BASE DENTINE 3M2
1	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA barrette de couleur 3M2

VITAVM®9 masse supplémentaires
utilisable pour VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1-D4



VITAVM®9 ADD-ON KIT
Coffret avec masses pour la personnalisation et accessoires
BV9AOKV1

Quantité	Contenu	Matériau
8	12 g	VITA VM 9 ADD-ON ADD1 - ADD8
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		Ouate support de cuisson, 2 pièces
1		Plaquette de couleurs VITA VM 9 ADD-ON
1		Pinceau n° 3 a 3×10 mm



VITAVM®9 ESTHETIC KIT for VITABLOCS for CEREC
Coffret complémentaire pour la personnalisation des VITABLOCS
BV9EKC2

Quantité	Contenu	Matériau
1		VITABLOCS Mark II 3D Sample Set
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	12 g	VITA VM 9 NEUTRAL NT
2	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 9 EFFECT PEARL EP1
2	12 g	VITA VM 9 EFFECT ENAMEL EE1, EE10
1	12 g	VITA VM 9 CORRECTIVE COR1
1	4 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE
1	12 g	VITA VM 9 EFFECT OPAL EO2
2	12 g	VITA VM 9 EFFECT CHROMA EC1, EC4
1	12 g	VITA VM 9 MAMELON MM2
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		Support de cuisson alvéolé W pour couronnes et bridges
1		Tiges de platine pour support de cuisson W, 2 pièces



VITAVM®9 GINGIVA KIT
Masses gingivales naturelles
BV9GKV1

Quantité	Contenu	Matériau
5	12 g	VITA VM 9 GINGIVA G1 - G5
1		Plaquette de couleurs VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®9 MARGIN KIT
Uniquement pour petites corrections dans la zone marginale
BV9MKV1

Quantité	Contenu	Matériau
6	12 g	VITA VM 9 MARGIN M1, M4 - M5, M7 - M9
1		Plaquette de couleurs VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®9 PROFESSIONAL KIT SMALL
Pour création d'effets et de caractérisations
BV9PKS

Quantité	Contenu	Matériau
5	12 g	VITA VM 9 EFFECT CHROMA EC1, EC4, EC6, EC8 - EC9
1	12 g	VITA VM 9 MAMELON MM2
1	12 g	VITA VM 9 EFFECT PEARL EP1
1	12 g	VITA VM 9 EFFECT OPAL EO2
7	12 g	VITA VM 9 EFFECT ENAMEL EE1, EE3, EE7 - EE11
1		Plaquette de couleurs VITA VM PROFESSIONAL KIT SMALL



VITAVM®9 PROFESSIONAL KIT
Pour création d'effets et de caractérisations
BV9PKV2

Quantité	Contenu	Matériau
11	12 g	VITA VM 9 EFFECT CHROMA EC1 - EC11
3	12 g	VITA VM 9 MAMELON MM1 - MM3
3	12 g	VITA VM 9 EFFECT PEARL EP1 - EP3
5	12 g	VITA VM 9 EFFECT OPAL EO1 - EO5
11	12 g	VITA VM 9 EFFECT ENAMEL EE1 - EE11
6	12 g	VITA VM 9 EFFECT LINER EL1 - EL6
1		Plaquette de couleurs VITA VM EFFECT CHROMA
1		Plaquette de couleurs VITA VM EFFECT LINER / EFFECT OPAL / MAMELON
1		Plaquette de couleurs VITA VM EFFECT ENAMEL / EFFECT PEARL

VITAVM®9 articles**VITAVM®9 VITA classical A1-D4®**

VITA VM 9 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g
A1	ENL	B4243112	B4243150
A2	ENL	B4243212	B4243250
A3	ENL	B4243312	B4243350
A3.5	END	B4243412	B4243450
A4	END	B4243512	B4243550
B1	END	B4243612	B4243650
B2	END	B4243712	B4243750
B3	END	B4243812	B4243850
B4	END	B4243912	B4243950
C1	END	B4244012	B4244050
C2	END	B4244112	B4244150
C3	ENL	B4244212	B4244250
C4	ENL	B4244312	B4244350
D2	END	B4244412	B4244450
D3	END	B4244512	B4244550
D4	END	B4244612	B4244650

VITA VM 9 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g
A1	ENL	B4245112	B4245150
A2	ENL	B4245212	B4245250
A3	ENL	B4245312	B4245350
A3.5	END	B4245412	B4245450
A4	END	B4245512	B4245550
B1	END	B4245612	B4245650
B2	END	B4245712	B4245750
B3	END	B4245812	B4245850
B4	END	B4245912	B4245950
C1	END	B4246012	B4246050
C2	END	B4246112	B4246150
C3	ENL	B4246212	B4246250
C4	ENL	B4246312	B4246350
D2	END	B4246412	B4246450
D3	END	B4246512	B4246550
D4	END	B4246612	B4246650

VITAVM[®] 9 VITA SYSTEM 3D-MASTER[®]

VITA VM 9 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g
0M1	ENL	B4203112	B4203150
0M2	ENL	B4203212	B4203250
0M3	ENL	B4203312	B4203350
1M1	ENL	B4203412	B4203450
1M2	ENL	B4203512	B4203550
2L1.5	ENL	B4203612	B4203650
2L2.5	ENL	B4203712	B4203750
2M1	ENL	B4203812	B4203850
2M2	ENL	B4203912	B4203950
2M3	ENL	B4204012	B4204050
2R1.5	ENL	B4204112	B4204150
2R2.5	ENL	B4204212	B4204250
3L1.5	ENL	B4204312	B4204350
3L2.5	ENL	B4204412	B4204450
3M1	ENL	B4204512	B4204550
3M2	ENL	B4204612	B4204650
3M3	ENL	B4204712	B4204750

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g
3R1.5	ENL	B4204812	B4204850
3R2.5	ENL	B4204912	B4204950
4L1.5	END	B4205012	B4205050
4L2.5	END	B4205112	B4205150
4M1	END	B4205212	B4205250
4M2	END	B4205312	B4205350
4M3	END	B4205412	B4205450
4R1.5	END	B4205512	B4205550
4R2.5	END	B4205612	B4205650
5M1	END	B4205712	B4205750
5M2	END	B4205812	B4205850
5M3	END	B4205912	B4205950

VITA VM 9 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g
0M1	ENL	B4206112	B4206150
0M2	ENL	B4206212	B4206250
0M3	ENL	B4206312	B4206350
1M1	ENL	B4206412	B4206450
1M2	ENL	B4206512	B4206550
2L1.5	ENL	B4206612	B4206650
2L2.5	ENL	B4206712	B4206750
2M1	ENL	B4206812	B4206850
2M2	ENL	B4206912	B4206950
2M3	ENL	B4207012	B4207050
2R1.5	ENL	B4207112	B4207150
2R2.5	ENL	B4207212	B4207250
3L1.5	ENL	B4207312	B4207350
3L2.5	ENL	B4207412	B4207450
3M1	ENL	B4207512	B4207550
3M2	ENL	B4207612	B4207650
3M3	ENL	B4207712	B4207750
3R1.5	ENL	B4207812	B4207850
3R2.5	ENL	B4207912	B4207950
4L1.5	END	B4208012	B4208050
4L2.5	END	B4208112	B4208150
4M1	END	B4208212	B4208250
4M2	END	B4208312	B4208350
4M3	END	B4208412	B4208450

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g
4R1.5	END	B4208512	B4208550
4R2.5	END	B4208612	B4208650
5M1	END	B4208712	B4208750
5M2	END	B4208812	B4208850
5M3	END	B4208912	B4208950

VITAVM®9 masse supplémentaires
utilisable pour VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1-D4

VITA VM 9 EFFECT ENAMEL, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
EE1	B4209112
EE2	B4209212
EE3	B4209312
EE4	B4209412
EE5	B4209512
EE6	B4209612
EE7	B4209712
EE8	B4209812
EE9	B4209912
EE10	B4210012
EE11	B4210112

VITA VM 9 EFFECT CHROMA, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
EC1	B4212112
EC2	B4212212
EC3	B4212312
EC4	B4212412
EC5	B4212512
EC6	B4212612
EC7	B4212712
EC8	B4212812
EC9	B4212912
EC10	B4213012
EC11	B4213112

VITA VM 9 EFFECT LINER, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
EL1	B4214112
EL2	B4214212
EL3	B4214312
EL4	B4214412
EL5	B4214512
EL6	B4214612

VITA VM 9 EFFECT PEARL, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
EP1	B4215112
EP2	B4215212
EP3	B4215312

VITA VM 9 MAMELON, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
MM1	B4216112
MM2	B4216212
MM3	B4216312

VITA VM 9 EFFECT OPAL, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
E01	B4217112
E02	B4217212
E03	B4217312
E04	B4217412
E05	B4217512

VITA VM 9 WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g	N° art. 250 g
WIN	B4218112	B4218150	B42181250

VITA VM 9 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g	N° art. 250 g
ENL	B4219112	B4219150	B42191250
END	B4219212	B4219250	B42192250

VITA VM 9 NEUTRAL, 12 g / 50 g / 250 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g	N° art. 250 g
NT	B4220112	B4220150	B42201250

VITA VM 9 CORRECTIVE, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
COR1	B4222112
COR2	B4222212
COR3	B4222312

VITA VM 9 GINGIVA, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
G1	B4223112
G2	B4223212
G3	B4223312
G4	B4223412
G5	B4223512

VITA VM 9 CHROMA PLUS, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
CP1	B4224112
CP2	B4224212
CP3	B4224312
CP4	B4224412
CP5	B4224512

VITA VM 9 MARGIN, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
M1	B4226112
M4	B4226412
M5	B4226512
M7	B4226712
M8	B4226812
M9	B4226912

VITA VM 9 ADD-ON, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
ADD1	B4229112
ADD2	B4229212
ADD3	B4229312
ADD4	B4229412
ADD5	B4229512
ADD6	B4229612
ADD7	B4229712
ADD8	B4229812

VITA VM 9 SUN DENTINE, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
SD1	B4236112
SD2	B4236212
SD3	B4236312

VITAVM®11

Céramique à structure fine pour la personnalisation de VITA SUPRINITY PC*



Description du produit

VITA VM 11 est une céramique feldspathique à structure fine et basse fusion. Elle a été mise au point spécialement pour la personnalisation des restaurations en céramique vitreuse à base de silicate de lithium dopée au dioxyde de zirconium. La parfaite harmonisation des deux CDT garantit une cohésion sans tension et donc fiable.

En association avec VITA SUPRINITY PC, il est possible grâce à la remarquable mouillabilité de surface de la nouvelle céramique vitreuse d'effectuer directement le montage cosmétique sans liner ou lait.

La forte translucidité et les couleurs chaudes de VITA VM 11 conjuguées à l'opalescence de VITA SUPRINITY PC donnent des résultats très esthétiques et créent un jeu de couleurs dynamique.

Avantages

- Rendu chromatique naturel et dynamique lumineuse grâce à sa structure fine.
- Excellente cohésion pour des résultats sûrs.
- Simplicité de manipulation pour des résultats rapides et très esthétiques.
- Propriétés à la cuisson remarquables et conserve sa forme même après plusieurs cuissons.
- Excellente aptitude à la sculpture pour un montage rapide et ciblé de la céramique.
- Mise en œuvre performante et rentable.
- Personnalisable avec VITA AKZENT Plus et VITA INTERNO.
- Sécurité des processus grâce à de longues années d'expérience.
- Disponible en couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1–D4.

Avis

* Utilisable également pour CELTRA® et CELTRA® CAD FC. CELTRA est une marque déposée de DeguDent GmbH.

VITAVM®11 coffrets

VITAVM®11 VITA classical A1-D4®



**VITAVM®11 DENTINE KIT VITA classical A1-D4®
BV11DKC**

Quantité	Contenu	Matériau
8	12 g	VITA VM 11 TRANSPA DENTINE 0M1, A1 - A3.5, B2, C2, D2
2	12 g	VITA VM 11 ENAMEL ENL, END
1	50 ml	VITA LOW FUSING MODELLING LIQUID

VITAVM®11 VITA SYSTEM 3D-MASTER®



**VITAVM®11 DENTINE KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
BV11DK**

Quantité	Contenu	Matériau
6	12 g	VITA VM 11 TRANSPA DENTINE 0M1, 1M1 - 1M2, 2M2, 3M2, 4M2
2	12 g	VITA VM 11 ENAMEL ENL, END
1	50 ml	VITA LOW FUSING MODELLING LIQUID

**VITAVM®11 masse supplémentaires
utilisable pour VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1-D4**



**VITAVM®11 CREATIVE KIT
BV11CKV1**

Quantité	Contenu	Matériau
3	12 g	VITA VM 11 SUN DENTINE SD1 - SD3
2	12 g	VITA VM 11 MAMELON MM1, MM3
7	12 g	VITA VM 11 EFFECT ENAMEL EE1, EE3, EE5, EE7 - EE9, EE11
3	12 g	VITA VM 11 EFFECT CHROMA EC1, EC5, EC11
1	12 g	VITA VM 11 EFFECT PEARL EP1
4	12 g	VITA VM 11 EFFECT OPAL EO1 - EO3, EO5
2	12 g	VITA VM 11 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 11 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 11 WINDOW WIN
1	50 ml	VITA LOW FUSING MODELLING LIQUID
1		Plaquette de couleurs VITA VM 11 n° 1
1		Plaquette de couleurs VITA VM 11 n° 2

VITAVM®11 articles

VITAVM®11 VITA classical A1-D4®

VITA VM 11 TRANSPA DENTINE, 12 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g
A1	ENL	B4945112
A2	ENL	B4945212
A3	ENL	B4945312
A3.5	END	B4945412
B2	END	B4945712
C2	END	B4946112
D2	END	B4946412

VITAVM®11 VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM 11 TRANSPA DENTINE, 12 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g
0M1	ENL	B4906112
1M1	ENL	B4906412
1M2	ENL	B4906512
2M2	ENL	B4906912
3M2	ENL	B4907612
4M2	END	B4908312

**VITAVM®11 masse supplémentaires
utilisable pour VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1-D4**

VITA VM 11 EFFECT ENAMEL, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
EE1	B4909112
EE3	B4909312
EE5	B4909512
EE7	B4909712
EE8	B4909812
EE9	B4909912
EE11	B4910112

VITA VM 11 EFFECT CHROMA, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
EC1	B4912112
EC5	B4912512
EC11	B4913112

VITA VM 11 EFFECT PEARL, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
EP1	B4915112

VITA VM 11 MAMELON, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
MM1	B4916112
MM3	B4916312

VITA VM 11 EFFECT OPAL, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
E01	B4917112
E02	B4917212
E03	B4917312
E05	B4917512

VITA VM 11 WINDOW, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
WIN	B4918112

VITA VM 11 ENAMEL, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
ENL	B4919112
END	B4919212

VITA VM 11 NEUTRAL, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
NT	B4920112

VITA VM 11 SUN DENTINE, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
SD1	B4936112
SD2	B4936212
SD3	B4936312

VITA TITANKERAMIK



Description du produit

La VITA TITANKERAMIK est parfaitement adaptée au titane, aussi bien au niveau du coefficient d'expansion thermique (CET) que des propriétés physiques. Une mise en œuvre correcte garantit une cohésion sûre entre l'armature en titane et la VITA TITANKERAMIK.

Les masses parfaitement harmonisées permettent aux céramistes de réaliser des couleurs lumineuses avec une translucidité nuancée. La VITA TITANKERAMIK offre tout ce qu'il faut pour obtenir un résultat esthétique satisfaisant.

Couleurs

Disponible en couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1–D4

VITA TITANKERAMIK coffrets

VITA TITANKERAMIK VITA classical A1-D4®



VITA TITANKERAMIK STARTER KIT A2
Coffret d'essai pour les premiers tests
BTKITSA2

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA TITANKERAMIK OPAQUE A2
1	12 g	VITA TITANKERAMIK OPAQUE DENTINE A2
1	12 g	VITA TITANKERAMIK DENTINE A2
1	12 g	VITA TITANKERAMIK ENAMEL EN2
1	12 g	VITA TITANKERAMIK TRANSLUCENT T4
1	7 g	VITA TITANKERAMIK PASTE BONDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	15 ml	VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		VITA barrette de couleur A2

VITA TITANKERAMIK STARTER KIT A3
Coffret d'essai pour premiers tests
BTKITSA3V1

Quantité	Contenu	Matériau
1	7 g	VITA TITANKERAMIK PASTE BONDER
1	12 g	VITA TITANKERAMIK OPAQUE A3
1	12 g	VITA TITANKERAMIK OPAQUE DENTINE A3
1	12 g	VITA TITANKERAMIK DENTINE A3
1	12 g	VITA TITANKERAMIK ENAMEL EN2
1	12 g	VITA TITANKERAMIK TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	15 ml	VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		VITA barrette de couleur A3



VITA TITANKERAMIK STANDARD-SET VITA classical A1-D4®
Coffret de base pour la reproduction des couleurs VITA classical A1-D4
BTSET12V2

Quantité	Contenu	Matériau
1	7 g	VITA TITANKERAMIK PASTE BONDER
16	12 g	VITA TITANKERAMIK OPAQUE A1 - D4
16	12 g	VITA TITANKERAMIK OPAQUE DENTINE A1 - D4
16	12 g	VITA TITANKERAMIK DENTINE A1 - D4
4	12 g	VITA TITANKERAMIK ENAMEL EN1 - EN4
1	12 g	VITA TITANKERAMIK TRANSLUCENT T4
1	12 g	VITA TITANKERAMIK WINDOW WIN
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	15 ml	VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		Supports de cuisson A+B+C pour molaires (ensemble de 6)
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Teintier VITA classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITA TITANKERAMIK STARTER KIT 2M2
Coffret d'essai pour les premiers tests
BTKITS2M2

Quantité	Contenu	Matériau
1	7 g	VITA TITANKERAMIK PASTE BONDER
1	12 g	VITA TITANKERAMIK OPAQUE OP2
1	12 g	VITA TITANKERAMIK OPAQUE DENTINE 2M2
1	12 g	VITA TITANKERAMIK DENTINE 2M2
1	12 g	VITA TITANKERAMIK ENAMEL EN2
1	12 g	VITA TITANKERAMIK TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	15 ml	VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		VITA barrette de couleur 2M2

VITA TITANKERAMIK STARTER KIT 3M2

Coffret d'essai pour premiers tests

BTKITS3M2V1

Quantité	Contenu	Matériau
1	7 g	VITA TITANKERAMIK PASTE BONDER
1	12 g	VITA TITANKERAMIK OPAQUE OP3
1	12 g	VITA TITANKERAMIK OPAQUE DENTINE 3M2
1	12 g	VITA TITANKERAMIK DENTINE 3M2
1	12 g	VITA TITANKERAMIK ENAMEL EN2
1	12 g	VITA TITANKERAMIK TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	15 ml	VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		VITA barrette de couleur 3M2



VITA TITANKERAMIK STANDARD SET VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Coffret de base pour la reproduction des couleurs 3D-MASTER

BTSET123DV1

Quantité	Contenu	Matériau
1	7 g	VITA TITANKERAMIK PASTE BONDER
5	12 g	VITA TITANKERAMIK OPAQUE OP1 - OP5
26	12 g	VITA TITANKERAMIK OPAQUE DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
26	12 g	VITA TITANKERAMIK DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
2	12 g	VITA TITANKERAMIK ENAMEL EN2, EN4
1	12 g	VITA TITANKERAMIK TRANSLUCENT T4
1	12 g	VITA TITANKERAMIK WINDOW WIN
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	15 ml	VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		Supports de cuisson A+B+C pour molaires (ensemble de 6)
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide

VITA TITANKERAMIK masse supplémentaires
utilisable pour VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1-D4



VITA TITANKERAMIK MASTER KIT
Coffret complémentaire
BTKITV1

Quantité	Contenu	Matériau
8	12 g	VITA TITANKERAMIK COLOR OPAQUE C01 - C08
6	12 g	VITA TITANKERAMIK TRANSLUCENT T1 - T6
4	12 g	VITA TITANKERAMIK CERVICAL CE1 - CE4
7	12 g	VITA TITANKERAMIK MARGIN MARN, MAR1 - MAR6
10	12 g	VITA TITANKERAMIK INTENSIVE IN1 - IN10
2	12 g	VITA TITANKERAMIK GINGIVA G1 - G2
1		Plaquette de couleurs VITA TITANKERAMIK TRANSLUCENT / CERVICAL
1		Plaquette de couleurs VITA TITANKERAMIK MARGIN / COLOR OPAQUE
1		Plaquette de couleurs VITA TITANKERAMIK INTENSIVE / GINGIVA

VITA TITANKERAMIK articles

VITA TITANKERAMIK VITA classical A1-D4®

VITA TITANKERAMIK OPAQUE, 12 g / 50 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g
A1	B200112	B200150
A2	B200212	B200250
A3	B200312	B200350
A3.5	B200412	B200450
A4	B200512	-
B1	B200612	-
B2	B200712	-
B3	B200812	B200850
B4	B200912	-
C1	B201012	-
C2	B201112	-
C3	B201212	-
C4	B201312	-
D2	B201412	-
D3	B201512	B201550
D4	B201612	-

VITA TITANKERAMIK OPAQUE DENTINE, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
A1	B203112
A2	B203212
A3	B203312
A3.5	B203412
A4	B203512
B1	B203612
B2	B203712
B3	B203812
B4	B203912
C1	B204012
C2	B204112
C3	B204212
C4	B204312
D2	B204412
D3	B204512
D4	B204612

VITA TITANKERAMIK DENTINE, 12 g / 50 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g
A1	EN2	B205112	B205150
A2	EN2	B205212	B205250
A3	EN2	B205312	B205350
A3.5	EN4	B205412	B205450
A4	EN4	B205512	-
B1	EN1	B205612	-
B2	EN1	B205712	-
B3	EN2	B205812	B205850
B4	EN2	B205912	-
C1	EN2	B206012	-
C2	EN2	B206112	-
C3	EN2	B206212	-
C4	EN3	B206312	-
D2	EN2	B206412	-
D3	EN4	B206512	B206550
D4	-	B206612	-

VITA TITANKERAMIK VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA TITANKERAMIK OPAQUE DENTINE, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
1M1	B233112
1M2	B233212
2L1.5	B233312
2L2.5	B233412
2M1	B233512
2M2	B233612
2M3	B233712
2R1.5	B233812
2R2.5	B233912
3L1.5	B234012
3L2.5	B234112
3M1	B234212
3M2	B234312
3M3	B234412
3R1.5	B234512
3R2.5	B234612
4L1.5	B234712
4L2.5	B234812
4M1	B234912
4M2	B235012
4M3	B235112
4R1.5	B235212
4R2.5	B235312
5M1	B235412
5M2	B235512
5M3	B235612

VITA TITANKERAMIK DENTINE, 12 g / 50 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g
1M1	EN2	B236112	B236150
1M2	EN2	B236212	B236250
2L1.5	EN2	B236312	-
2L2.5	EN2	B236412	-
2M1	EN2	B236512	B236550
2M2	EN2	B236612	B236650
2M3	EN2	B236712	B236750
2R1.5	EN2	B236812	-
2R2.5	EN2	B236912	-
3L1.5	EN2	B237012	B237050
3L2.5	EN2	B237112	B237150
3M1	EN2	B237212	B237250
3M2	EN2	B237312	B237350
3M3	EN2	B237412	B237450
3R1.5	EN2	B237512	B237550
3R2.5	EN2	B237612	B237650
4L1.5	EN4	B237712	-
4L2.5	EN4	B237812	-
4M1	EN4	B237912	B237950
4M2	EN4	B238012	B238050
4M3	EN4	B238112	B238150
4R1.5	EN4	B238212	-
4R2.5	EN4	B238312	-
5M1	EN4	B238412	-
5M2	EN4	B238512	-
5M3	EN4	B238612	-

VITA TITANKERAMIK OPAQUE, 12 g / 50 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g
OP1	B2501012	B2501050
OP2	B2502012	B2502050
OP3	B2503012	B2503050
OP4	B2504012	B2504050
OP5	B2505012N	-

VITA TITANKERAMIK masse supplémentaires
utilisable pour VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1-D4

Désignation	N° art.
VITA TITANKERAMIK BONDER, 7.5 g	B200075

VITA TITANKERAMIK COLOR OPAQUE, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
C01	B202112
C02	B202212
C03	B202312
C04	B202412
C05	B202512
C06	B202612
C07	B202712
C08	B202812

VITA TITANKERAMIK ENAMEL, 12 g / 50 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g
EN1	B207112	B207150
EN2	B207212	B207250
EN3	B207312	B207350
EN4	B207412	B207450

VITA TITANKERAMIK TRANSLUCENT, 12 g / 50 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g
T1	B208112	-
T2	B208212	-
T3	B208312	-
T4	B208412	B208450
T5	B208512	-
T6	B208612	-

VITA TITANKERAMIK CERVICAL, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
CE1	B209112
CE2	B209212
CE3	B209312
CE4	B209412

VITA TITANKERAMIK INTENSIVE, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
IN1	B211112
IN2	B211212
IN3	B211312
IN4	B211412
IN5	B211512
IN6	B211612
IN7	B211712
IN8	B211812
IN9	B211912
IN10	B212012

VITA TITANKERAMIK WINDOW, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
WIN	B212212

VITA TITANKERAMIK GINGIVA, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
G1	B214112
G2	B214212

Désignation	N° art.
VITA TITANKERAMIK PASTE BONDER, 7 g	B22007

VITA TITANKERAMIK MARGIN, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
MARN	B260012
MAR1	B260112
MAR2	B260212
MAR3	B260312
MAR4	B260412
MAR5	B260512
MAR6	B260612

VITA VMK Master®

Pour le cosmétique des infrastructures métalliques dans une plage CDT classique



Description du produit

VITA VMK Master est une céramique cosmétique feldspathique pour les alliages réfractaires classiques (env. 13,8 – 15,2 $\mu\text{m/mK}$).

Peu importe qu'il s'agisse d'alliages classiques coulés, fraisés ou frittés.

Mise en œuvre sûre et précise.

Exceptionnelle fiabilité, performance au quotidien et esthétique - c'est VITA VMK Master.

Avantages

- Matériau irréprochable sur le plan de la sécurité et de l'esthétique.
- Mise en œuvre sûre et précise et donc rapidement assimilable.
- De super propriétés de mise en œuvre comme par ex. une aptitude à la sculpture améliorée, une simplicité d'utilisation et un retrait minime.
- Schéma de stratification classique dentine-émail.
- Riche palette de masses complémentaires pour la personnalisation.
- Restaurations très esthétiques grâce à de superbes couleurs.
- Disponible en couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1–D4.

VITA VMK Master® coffrets

VITA VMK MASTER® VITA classical A1-D4®



VITA VMK Master® ONE COLOR KIT A2

Coffret d'essai pour premiers tests

BVMKOCSA2V1

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE A2
1	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE A2
1	12 g	VITA VMK MASTER DENTINE A2
1	12 g	VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA barrette de couleur A2

VITA VMK Master® ONE COLOR KIT A3

Coffret d'essai pour premiers tests

BVMKOCSA3V1

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE A3
1	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE A3
1	12 g	VITA VMK MASTER DENTINE A3
1	12 g	VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA barrette de couleur A3



VITA VMK Master® STANDARD SET POWDER VITA classical A1-D4®
Coffret de base pour la reproduction des couleurs VITA classical A1-D4
BVMKSETC

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VMK MASTER WASH OPAQUE W0
16	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE A1 - D4
16	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE A1 - D4
16	12 g	VITA VMK MASTER DENTINE A1 - D4
2	12 g	VITA VMK MASTER ENAMEL EN1 - EN2
1	12 g	VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1	12 g	VITA VMK MASTER WINDOW WIN
3	12 g	VITA VMK MASTER CERVICAL CE1 - CE3
5	12 g	VITA VMK MASTER NECK N1 - N5
2	12 g	VITA VMK MASTER CORRECTIVE COR1 - COR2
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1		VITA MODISOL
1		Supports de cuisson A+B+C pour molaires (ensemble de 6)
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Indicateur de couleurs VITA VMK MASTER classical
1		Teintier VITA classical A1-D4
1		Plaquette de couleurs VITA VMK MASTER STANDARD

VITA VMK Master® STANDARD SET PASTE VITA classical A1-D4®
Coffret de base pour la reproduction des couleurs VITA classical A1-D4
BVMKSETPC

Quantité	Contenu	Matériau
1	7 g	VITA VMK MASTER WASH OPAQUE PASTE W0
16	5 g	VITA VMK MASTER OPAQUE PASTE A1 - D4
16	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE A1 - D4
16	12 g	VITA VMK MASTER DENTINE A1 - D4
2	12 g	VITA VMK MASTER ENAMEL EN1 - EN2
1	12 g	VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1	12 g	VITA VMK MASTER WINDOW WIN
3	12 g	VITA VMK MASTER CERVICAL CE1 - CE3
5	12 g	VITA VMK MASTER NECK N1 - N5
2	12 g	VITA VMK MASTER CORRECTIVE COR1 - COR2
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		VITA MODISOL
1		Supports de cuisson A+B+C pour molaires (ensemble de 6)
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Indicateur de couleurs VITA VMK MASTER classical
1		Teintier VITA classical A1-D4
1		Plaquette de couleurs VITA VMK MASTER STANDARD



VITA VMK Master® STARTER SET POWDER VITA classical A1-D4®
Coffret de deux couleurs
BVMKSSC

Quantité	Contenu	Matériau
2	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE A2 - A3
2	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE A2 - A3
2	12 g	VITA VMK MASTER DENTINE A2 - A3
1	12 g	VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1		VITA barrette de couleur A2
1		VITA barrette de couleur A3

VITA VMK Master® STARTER SET PASTE VITA classical A1-D4®

Coffret de deux couleurs

BVMKSSCP

Quantité	Contenu	Matériau
2	5 g	VITA VMK MASTER OPAQUE PASTE A2 - A3
2	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE A2 - A3
2	12 g	VITA VMK MASTER DENTINE A2 - A3
1	12 g	VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1		VITA barrette de couleur A2
1		VITA barrette de couleur A3
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE

VITA VMK MASTER® VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITA VMK Master® 10-COLOR-SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Coffret de base réduit aux dix couleurs 3D-MASTER les plus courantes
BVMK10S3D

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VMK MASTER WASH OPAQUE WO
4	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE OP1 - OP4
10	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE 1M2, 2L1.5, 2M1 - 2M2, 2R2.5, 3L1.5, 3M1 - 3M3, 4M2
10	12 g	VITA VMK MASTER DENTINE 1M2, 2L1.5, 2M1 - 2M2, 2R2.5, 3L1.5, 3M1 - 3M3, 4M2
2	12 g	VITA VMK MASTER ENAMEL EN1, EN3
1	12 g	VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1	12 g	VITA VMK MASTER WINDOW WIN
3	12 g	VITA VMK MASTER CERVICAL CE1 - CE3
5	12 g	VITA VMK MASTER NECK N1 - N5
2	12 g	VITA VMK MASTER CORRECTIVE COR1 - COR2
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1		VITA MODISOL
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Indicateur de couleurs VITA VMK MASTER 3D-MASTER
1		VITA Linearguide 3D-MASTER
1		Plaquette de couleurs VITA VMK MASTER STANDARD

VITA VMK Master® 10-COLOR-SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Coffret de base réduit aux dix couleurs 3D-MASTER les plus courantes
BVMK10SP3D

Quantité	Contenu	Matériau
1	7 g	VITA VMK MASTER WASH OPAQUE PASTE WO
4	5 g	VITA VMK MASTER OPAQUE PASTE OP1 - OP4
10	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE 1M2, 2L1.5, 2M1 - 2M2, 2R2.5, 3L1.5, 3M1 - 3M3, 4M2
10	12 g	VITA VMK MASTER DENTINE 1M2, 2L1.5, 2M1 - 2M2, 2R2.5, 3L1.5, 3M1 - 3M3, 4M2
2	12 g	VITA VMK MASTER ENAMEL EN1, EN3
1	12 g	VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1	12 g	VITA VMK MASTER WINDOW WIN
3	12 g	VITA VMK MASTER CERVICAL CE1 - CE3
5	12 g	VITA VMK MASTER NECK N1 - N5
2	12 g	VITA VMK MASTER CORRECTIVE COR1 - COR2
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		VITA MODISOL
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Indicateur de couleurs VITA VMK MASTER 3D-MASTER
1		VITA Linearguide 3D-MASTER
1		Plaquette de couleurs VITA VMK MASTER STANDARD



VITA VMK Master® BLEACHED COLOR SET POWDER VITA SYSTEM
3D-MASTER®

Couleurs ultra claires pour la reproduction des dents blanchies
BVMKBCS

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE OP0
3	12 g	VITA VMK MASTER DENTINE OM1 - OM3
3	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE OM1 - OM3
1	12 g	VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1		VITA BLEACHED SHADE GUIDE, Shade Group 0

**VITA VMK Master® BLEACHED COLOR SET PASTE VITA SYSTEM
3D-MASTER®**

**Couleurs ultra claires pour la reproduction des dents blanchies
BVMKBCSP**

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 g	VITA VMK MASTER OPAQUE PASTE OP0
3	12 g	VITA VMK MASTER DENTINE OM1 - OM3
3	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE OM1 - OM3
1	12 g	VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1		VITA BLEACHED SHADE GUIDE, Shade Group 0
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE



VITA VMK Master® ONE COLOR KIT 2M2

Coffret d'essai pour premiers tests

BVMKOC2M2V1

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE OP2
1	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VMK MASTER DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA barrette de couleur 2M2

VITA VMK Master® ONE COLOR KIT 3M2
Coffret d'essai pour premiers tests
BVMKOC3M2V1

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE OP3
1	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE 3M2
1	12 g	VITA VMK MASTER DENTINE 3M2
1	12 g	VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA barrette de couleur 3M2



**VITA VMK Master® STANDARD SET POWDER VITA SYSTEM
3D-MASTER®**

**Coffret de base pour la reproduction des couleurs 3D-MASTER
BVMKSET3D**

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VMK MASTER WASH OPAQUE WO
5	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE OP1 - OP5
26	12 g	VITA VMK MASTER DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
26	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
2	12 g	VITA VMK MASTER ENAMEL EN1, EN3
1	12 g	VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1	12 g	VITA VMK MASTER WINDOW WIN
3	12 g	VITA VMK MASTER CERVICAL CE1 - CE3
5	12 g	VITA VMK MASTER NECK N1 - N5
2	12 g	VITA VMK MASTER CORRECTIVE COR1 - COR2
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1		VITA MODISOL
1		Supports de cuisson A+B+C pour molaires (ensemble de 6)
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Indicateur de couleurs VITA VMK MASTER 3D-MASTER
1		VITA Linearguide 3D-MASTER
1		Plaquette de couleurs VITA VMK MASTER STANDARD

VITA VMK Master® STANDARD SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Coffret de base pour la reproduction des couleurs 3D-MASTER
BVMKSETP3D

Quantité	Contenu	Matériau
1	7 g	VITA VMK MASTER WASH OPAQUE PASTE W0
5	5 g	VITA VMK MASTER OPAQUE PASTE OP1 - OP5
26	12 g	VITA VMK MASTER DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
26	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
2	12 g	VITA VMK MASTER ENAMEL EN1, EN3
1	12 g	VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1	12 g	VITA VMK MASTER WINDOW WIN
3	12 g	VITA VMK MASTER CERVICAL CE1 - CE3
5	12 g	VITA VMK MASTER NECK N1 - N5
2	12 g	VITA VMK MASTER CORRECTIVE COR1 - COR2
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		VITA MODISOL
1		Supports de cuisson A+B+C pour molaires (ensemble de 6)
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Indicateur de couleurs VITA VMK MASTER 3D-MASTER
1		VITA Linearguide 3D-MASTER
1		Plaquette de couleurs VITA VMK MASTER STANDARD



VITA VMK Master® STARTER SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Coffret de deux couleurs
BVMKSS3D

Quantité	Contenu	Matériau
2	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE OP2 - OP3
2	12 g	VITA VMK MASTER DENTINE 2M2, 3M2
2	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE 2M2, 3M2
1	12 g	VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1		VITA barrette de couleur 2M2
1		VITA barrette de couleur 3M2

VITA VMK Master® STARTER SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Coffret de deux couleurs
BVMKSSP3D

Quantité	Contenu	Matériau
2	5 g	VITA VMK MASTER OPAQUE PASTE OP2 - OP3
2	12 g	VITA VMK MASTER DENTINE 2M2, 3M2
2	12 g	VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE 2M2, 3M2
1	12 g	VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1		VITA barrette de couleur 2M2
1		VITA barrette de couleur 3M2
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE

VITA VMK MASTER® masse supplémentaires
utilisable pour VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1-D4



VITA VMK Master® ADDITIONAL SET
Pour création d effets naturels et de caractérisations
BVMKAS

Quantité	Contenu	Matériau
8	12 g	VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T1 - T8
8	12 g	VITA VMK MASTER DENTINE MODIFIER DM1 - DM8
6	12 g	VITA VMK MASTER LUMINARY LM1 - LM6
6	12 g	VITA VMK MASTER MARGIN MN, M1 - M5
1	12 g	VITA VMK MASTER PEARL TRANSLUCENT PLT1
1	12 g	VITA VMK MASTER OPAL TRANSLUCENT OT1
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1		Plaquette de couleurs VITA VMK MASTER TRANSLUCENT
1		Plaquette de couleurs VITA VMK MASTER MARGIN / GINGIVA
1		Plaquette de couleurs VITA VMK MASTER DENTINE / MODIFIER / LUMINARY



VITA VMK Master® GINGIVA SET POWDER
Masses gingivales naturelles
BVMKGS

Quantité	Contenu	Matériau
5	12 g	VITA VMK MASTER GINGIVA G1 - G5
2	12 g	VITA VMK MASTER GINGIVA OPAQUE GOL, GOD
1		Plaquette de couleurs VITA VMK MASTER MARGIN / GINGIVA

VITA VMK Master® GINGIVA SET PASTE
Masses gingivales naturelles
BVMKGSP

Quantité	Contenu	Matériau
5	12 g	VITA VMK MASTER GINGIVA G1 - G5
2	5 g	VITA VMK MASTER GINGIVA OPAQUE PASTE GOL, GOD
1		Plaquette de couleurs VITA VMK MASTER MARGIN / GINGIVA

VITA VMK Master® articles**VITA VMK MASTER® VITA classical A1-D4®**

VITA VMK MASTER OPAQUE PASTE, 5 g

Désignation	N° art. 5 g
A1	B483015
A2	B483025
A3	B483035
A3.5	B483045
A4	B483055
B1	B483065
B2	B483075
B3	B483085
B4	B483095
C1	B483105
C2	B483115
C3	B483125
C4	B483135
D2	B483145
D3	B483155
D4	B483165

VITA VMK MASTER OPAQUE, 12 g / 50 g / 250 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g	N° art. 250 g
A1	B4840112	B4840150	B48401250
A2	B4840212	B4840250	B48402250
A3	B4840312	B4840350	B48403250
A3.5	B4840412	B4840450	-
A4	B4840512	B4840550	-
B1	B4840612	B4840650	-
B2	B4840712	B4840750	-
B3	B4840812	B4840850	-
B4	B4840912	B4840950	-
C1	B4841012	B4841050	-
C2	B4841112	B4841150	-
C3	B4841212	B4841250	-
C4	B4841312	B4841350	-
D2	B4841412	B4841450	-
D3	B4841512	B4841550	-
D4	B4841612	B4841650	-

VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g
A1	B4843112	B4843150
A2	B4843212	B4843250
A3	B4843312	B4843350
A3.5	B4843412	B4843450
A4	B4843512	B4843550
B1	B4843612	B4843650
B2	B4843712	B4843750
B3	B4843812	B4843850
B4	B4843912	B4843950
C1	B4844012	B4844050
C2	B4844112	B4844150
C3	B4844212	B4844250
C4	B4844312	B4844350
D2	B4844412	B4844450
D3	B4844512	B4844550
D4	B4844612	B4844650

VITA VMK MASTER DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g	N° art. 250 g
A1	EN1	B4845112	B4845150	B48451250
A2	EN1	B4845212	B4845250	B48452250
A3	EN1	B4845312	B4845350	B48453250
A3.5	EN2	B4845412	B4845450	B48454250
A4	EN2	B4845512	B4845550	-
B1	EN2	B4845612	B4845650	B48456250
B2	EN2	B4845712	B4845750	B48457250
B3	EN2	B4845812	B4845850	-
B4	EN2	B4845912	B4845950	-
C1	EN2	B4846012	B4846050	B48460250
C2	EN2	B4846112	B4846150	B48461250
C3	EN1	B4846212	B4846250	B48462250
C4	EN1	B4846312	B4846350	-
D2	EN2	B4846412	B4846450	B48464250
D3	EN2	B4846512	B4846550	-
D4	EN2	B4846612	B4846650	-

VITA VMK MASTER® VITA SYSTEM 3D-MASTER®
VITA VMK MASTER DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g	N° art. 250 g
0M1	EN1	B4803112	B4803150	-
0M2	EN1	B4803212	B4803250	-
0M3	EN1	B4803312	B4803350	-
1M1	EN1	B4803412	B4803450	B48034250
1M2	EN1	B4803512	B4803550	B48035250
2L1.5	EN1	B4803612	B4803650	B48036250
2L2.5	EN1	B4803712	B4803750	-
2M1	EN1	B4803812	B4803850	B48038250
2M2	EN1	B4803912	B4803950	B48039250
2M3	EN1	B4804012	B4804050	-
2R1.5	EN1	B4804112	B4804150	-
2R2.5	EN1	B4804212	B4804250	B48042250
3L1.5	EN1	B4804312	B4804350	-
3L2.5	EN1	B4804412	B4804450	-
3M1	EN1	B4804512	B4804550	-
3M2	EN1	B4804612	B4804650	B48046250
3M3	EN1	B4804712	B4804750	-

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g	N° art. 250 g
3R1.5	EN1	B4804812	B4804850	-
3R2.5	EN3	B4804912	B4804950	-
4L1.5	EN1	B4805012	B4805050	-
4L2.5	EN1	B4805112	B4805150	-
4M1	EN1	B4805212	B4805250	-
4M2	EN3	B4805312	B4805350	-
4M3	EN3	B4805412	B4805450	-
4R1.5	EN1	B4805512	B4805550	-
4R2.5	EN3	B4805612	B4805650	-
5M1	EN1	B4805712	B4805750	-
5M2	EN3	B4805812	B4805850	-
5M3	EN3	B4805912	B4805950	-

VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g
0M1	B4806112	B4806150
0M2	B4806212	B4806250
0M3	B4806312	B4806350
1M1	B4806412	B4806450
1M2	B4806512	B4806550
2L1.5	B4806612	B4806650
2L2.5	B4806712	B4806750
2M1	B4806812	B4806850
2M2	B4806912	B4806950
2M3	B4807012	B4807050
2R1.5	B4807112	B4807150
2R2.5	B4807212	B4807250
3L1.5	B4807312	B4807350
3L2.5	B4807412	B4807450
3M1	B4807512	B4807550
3M2	B4807612	B4807650
3M3	B4807712	B4807750
3R1.5	B4807812	B4807850
3R2.5	B4807912	B4807950
4L1.5	B4808012	B4808050
4L2.5	B4808112	B4808150
4M1	B4808212	B4808250
4M2	B4808312	B4808350
4M3	B4808412	B4808450

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g
4R1.5	B4808512	B4808550
4R2.5	B4808612	B4808650
5M1	B4808712	B4808750
5M2	B4808812	B4808850
5M3	B4808912	B4808950

VITA VMK MASTER OPAQUE, 12 g / 50 g / 250 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g	N° art. 250 g
OP0	B4825012	B4825050	-
OP1	B4825112	B4825150	B48251250
OP2	B4825212	B4825250	B48252250
OP3	B4825312	B4825350	B48253250
OP4	B4825412	B4825450	-
OP5	B4825512	B4825550	-

VITA VMK MASTER OPAQUE PASTE, 5 g

Désignation	N° art. 5 g
OP0	B483505
OP1	B483515
OP2	B483525
OP3	B483535
OP4	B483545
OP5	B483555

**VITA VMK MASTER® masse supplémentaires
utilisable pour VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1-D4**
VITA VMK MASTER TRANSLUCENT, 12 g / 50 g / 250 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g	N° art. 250 g
T1	B4809112	-	-
T2	B4809212	-	-
T3	B4809312	-	-
T4	B4809412	B4809450	B48094250
T5	B4809512	-	-
T6	B4809612	-	-
T7	B4809712	-	-
T8	B4809812	-	-

VITA VMK MASTER DENTINE MODIFIER, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
DM1	B4812112
DM2	B4812212
DM3	B4812312
DM4	B4812412
DM5	B4812512
DM6	B4812612
DM7	B4812712
DM8	B4812812

VITA VMK MASTER LUMINARY, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
LM1	B4814112
LM2	B4814212
LM3	B4814312
LM4	B4814412
LM5	B4814512
LM6	B4814612

VITA VMK MASTER PEARL TRANSLUCENT, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
PLT1	B4815112

VITA VMK MASTER OPAL TRANSLUCENT, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
OT1	B4817112

VITA VMK MASTER WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g	N° art. 250 g
WIN	B4818112	B4818150	B48181250

VITA VMK MASTER ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g	N° art. 250 g
EN1	B4819112	B4819150	B48191250
EN2	B4819212	B4819250	B48192250
EN3	B4819312	B4819350	B48193250

VITA VMK MASTER CERVICAL, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
CE1	B4820112
CE2	B4820212
CE3	B4820312

VITA VMK MASTER CORRECTIVE, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
COR1	B4822112
COR2	B4822212

VITA VMK MASTER GINGIVA, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
G1	B4823112
G2	B4823212
G3	B4823312
G4	B4823412
G5	B4823512

VITA VMK MASTER NECK, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
N1	B4824112
N2	B4824212
N3	B4824312
N4	B4824412
N5	B4824512

VITA VMK MASTER WASH OPAQUE, 12 g / 50 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g
WO	B4825912	B4825950

VITA VMK MASTER MARGIN, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
MN	B4826012
M1	B4826112
M2	B4826212
M3	B4826312
M4	B4826412
M5	B4826512

VITA VMK MASTER GINGIVA OPAQUE, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
GOL	B4827112
GOD	B4827312

VITA VMK MASTER WASH OPAQUE PASTE, 7 g

Désignation	N° art. 7 g
WO	B483597

VITA VMK MASTER GINGIVA OPAQUE PASTE, 5 g

Désignation	N° art. 5 g
GOL	B483715
GOD	B483735

VITAVM®13

Pour le cosmétique des infrastructures métalliques dans une plage CDT classique



Description du produit

VITA VM 13 est une céramique feldspathique à structure fine très esthétique qui est parfaitement harmonisée avec le CDT des alliages réfractaires classiques (env. 13,8 – 15,2 µm/mK).

Peu importe qu'il s'agisse d'alliages classiques coulés, fraisés ou frittés.

VITA VM 13 est une véritable alternative à la céramo-céramique et trouve sa place pour tous les cas où l'on souhaite masquer l'infrastructure métallique.

La température de cuisson (cuisson dentine 880°C) vous apporte une grande sécurité de mise en œuvre, notamment pour les alliages avec un point de solidus bas (<1.100°C).

Les principaux composants sont des feldspaths purs de potassium et d'albite qui procurent un magnifique rendu de couleur et une très grande résistance en flexion.

Grâce à un état de surface compact et homogène, VITA VM 13 se fraise et se polit en bouche particulièrement bien. L'état de surface ainsi obtenu est très lisse et dense. La plaque adhère beaucoup moins à la céramique ce qui contribue à un bon entretien de la prothèse.

VITA VM 13 est une composante de qualité du concept innovant VITA VM - la solution universelle pour toutes les indications courantes. Céramo-métallique, céramo-céramique ou composite : les possibilités sont sans limite !

Les colorants VITA AKZENT Plus et VITA INTERNO permettent de personnaliser et de caractériser la restauration.

Avantages

- Rendu chromatique naturel et dynamique lumineuse grâce à sa structure fine.
- Retrait minime pour limiter les cuissons répétées.
- Excellente aptitude à la sculpture pour un montage rapide et ciblé de la céramique.
- Palette complète de masses complémentaires pour d'excellents effets.
- Mise en œuvre performante et rentable.
- Personnalisable avec VITA AKZENT Plus et VITA INTERNO.
- Sécurité des processus grâce à de longues années d'expérience.
- Disponible en couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1–D4.

VITAVM®13 coffrets

VITAVM®13 VITA classical A1-D4®



VITAVM®13 BASIC KIT POWDER VITA classical A1-D4®

Coffret de base pour la stratification BASIC

BV13BK12CV2

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
16	12 g	VITA VM 13 OPAQUE A1 - D4
16	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE A1 - D4
3	12 g	VITA VM 13 SUN DENTINE SD1 - SD3
5	12 g	VITA VM 13 CHROMA PLUS CP1 - CP5
2	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 13 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
3	12 g	VITA VM 13 CORRECTIVE COR1 - COR3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1		VITA MODISOL
1		Supports de cuisson A+B+C pour molaires (ensemble de 6)
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		VITA Indicateur de couleurs VITA VM 13 classical
1		Teintier VITA classical A1-D4

VITAVM®13 BASIC KIT PASTE VITA classical A1-D4®
Coffret de base pour la stratification BASIC
BV13BK12PCV2

Quantité	Contenu	Matériau
1	7 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE PASTE W0
16	5 g	VITA VM 13 OPAQUE PASTE A1 - D4
16	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE A1 - D4
3	12 g	VITA VM 13 SUN DENTINE SD1 - SD3
5	12 g	VITA VM 13 CHROMA PLUS CP1 - CP5
2	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL, END
3	12 g	VITA VM 13 CORRECTIVE COR1 - COR3
1	12 g	VITA VM 13 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA VM PASTE FLUID
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		VITA MODISOL
1		Supports de cuisson A+B+C pour molaires (ensemble de 6)
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		VITA Indicateur de couleurs VITA VM 13 classical
1		Teintier VITA classical A1-D4



VITAVM®13 BASIC KIT SMALL POWDER VITA classical A1-D4®
Petit coffret de base pour la stratification BASIC
BV13BKS12CV2

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
6	12 g	VITA VM 13 OPAQUE A1 - A3.5, B3, D3
6	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE A1 - A3.5, B3, D3
3	12 g	VITA VM 13 SUN DENTINE SD1 - SD3
5	12 g	VITA VM 13 CHROMA PLUS CP1 - CP5
2	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 13 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	12 g	VITA VM 13 CORRECTIVE COR1
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1		VITA MODISOL
1		Supports de cuisson A+B+C pour molaires (ensemble de 6)
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		VITA Indicateur de couleurs VITA VM 13 classical
1		Teintier VITA classical A1-D4

VITAVM®13 BASIC KIT SMALL PASTE VITA classical A1-D4®

Petit coffret de base pour la stratification BASIC

BV13BKS12PCV2

Quantité	Contenu	Matériau
1	7 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE PASTE W0
6	5 g	VITA VM 13 OPAQUE PASTE A1 - A3.5, B3, D3
6	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE A1 - A3.5, B3, D3
3	12 g	VITA VM 13 SUN DENTINE SD1 - SD3
5	12 g	VITA VM 13 CHROMA PLUS CP1 - CP5
2	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 13 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	12 g	VITA VM 13 CORRECTIVE COR1
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA VM PASTE FLUID
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		VITA MODISOL
1		Supports de cuisson A+B+C pour molaires (ensemble de 6)
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		VITA Indicateur de couleurs VITA VM 13 classical
1		Teintier VITA classical A1-D4



VITAVM®13 BUILD UP KIT VITA classical A1-D4®

Coffret pour la stratification BUILD UP

BV13BUK12CV1

Quantité	Contenu	Matériau
16	12 g	VITA VM 13 TRANSPA DENTINE A1 - D4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS

VITAVM®13 BUILD UP KIT SMALL VITA classical A1-D4®

Petit coffret pour la stratification BUILD UP

BV13BUKS12CV1

Quantité	Contenu	Matériau
6	12 g	VITA VM 13 TRANSPA DENTINE A1 - A3.5, B3, D3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS

VITAVM®13 CLASSICAL COLOR KIT PASTE

Coffret complémentaire pour les utilisateurs de VITA VM 13 3D-MASTER BV13CCK12PV1*

Quantité	Contenu	Matériau
16	5 g	VITA VM 13 OPAQUE PASTE A1 - D4
16	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE A1 - D4
16	12 g	VITA VM 13 TRANSPA DENTINE A1 - D4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA VM PASTE FLUID
1		VITA Indicateur de couleurs VITA VM 13 classical
1		Teintier VITA classical A1-D4

* Le coffret pour les clients VITA VM 13 SYSTEM 3D-MASTER souhaitant compléter leur coffret actuel avec VITA classical A1-D4



VITAVM®13 CLASSICAL COLOR KIT POWDER

Coffret complémentaire pour les utilisateurs de VITA VM 13 3D-MASTER BV13CCK12V1*

Quantité	Contenu	Matériau
16	12 g	VITA VM 13 OPAQUE A1 - D4
16	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE A1 - D4
16	12 g	VITA VM 13 TRANSPA DENTINE A1 - D4
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1		VITA Indicateur de couleurs VITA VM 13 classical
1		Teintier VITA classical A1-D4

* Le coffret pour les clients VITA VM 13 SYSTEM 3D-MASTER souhaitant compléter leur coffret actuel avec VITA classical A1-D4

VITAVM®13 ONE COLOR KIT A2 PASTE

Coffret de d'essai pour premiers tests

BV130CKA2PV3

Quantité	Contenu	Matériau
1	7 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE PASTE WO
1	5 g	VITA VM 13 OPAQUE PASTE A2
1	12 g	VITA VM 13 CHROMA PLUS CP2
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE A2
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA VM PASTE FLUID
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA barrette de couleur A2



VITAVM®13 ONE COLOR KIT A2 POWDER

Coffret d'essai pour les premiers tests

BV130CKA2V3

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
1	12 g	VITA VM 13 OPAQUE A2
1	12 g	VITA VM 13 CHROMA PLUS CP2
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE A2
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA barrette de couleur A2

VITAVM®13 ONE COLOR KIT A3 PASTE

Coffret d'essai pour premiers tests

BV130CKA3PV3

Quantité	Contenu	Matériau
1	7 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE PASTE WO
1	5 g	VITA VM 13 OPAQUE PASTE A3
2	12 g	VITA VM 13 CHROMA PLUS CP2 - CP3
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE A3
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA VM PASTE FLUID
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA barrette de couleur A3

VITAVM®13 ONE COLOR KIT A3 POWDER

Coffret d'essai pour premiers tests

BV130CKA3V3

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
1	12 g	VITA VM 13 OPAQUE A3
2	12 g	VITA VM 13 CHROMA PLUS CP2 - CP3
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE A3
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA barrette de couleur A3

VITAVM®13 VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITAVM®13 BASIC KIT PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Coffret de base pour la stratification BASIC

BV13BK12PV2

Quantité	Contenu	Matériau
1	7 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE PASTE WO
5	5 g	VITA VM 13 OPAQUE PASTE OP1 - OP5
3	5 g	VITA VM 13 SUN OPAQUE PASTE SO1 - SO3
26	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
3	12 g	VITA VM 13 SUN DENTINE SD1 - SD3
2	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 13 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
3	12 g	VITA VM 13 CORRECTIVE COR1 - COR3
5	12 g	VITA VM 13 CHROMA PLUS CP1 - CP5
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA VM PASTE FLUID
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		VITA MODISOL
1		Supports de cuisson A+B+C pour molaires (ensemble de 6)
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Indicateur de couleurs VITA VM 13 3D-MASTER
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide



VITAVM®13 BASIC KIT POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Coffret de base pour la stratification BASIC
BV13BK12V2

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
5	12 g	VITA VM 13 OPAQUE OP1 - OP5
3	12 g	VITA VM 13 SUN OPAQUE SO1 - SO3
26	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
3	12 g	VITA VM 13 SUN DENTINE SD1 - SD3
5	12 g	VITA VM 13 CHROMA PLUS CP1 - CP5
2	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 13 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
3	12 g	VITA VM 13 CORRECTIVE COR1 - COR3
1		VITA MODISOL
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Supports de cuisson A+B+C pour molaires (ensemble de 6)
1		Indicateur de couleurs VITA VM 13 3D-MASTER
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide

VITAVM®13 BASIC KIT SMALL PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Petit coffret de base pour la stratification BASIC
BV13BKS12PV2

Quantité	Contenu	Matériau
1	7 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE PASTE WO
4	5 g	VITA VM 13 OPAQUE PASTE OP1 - OP4
3	5 g	VITA VM 13 SUN OPAQUE PASTE SO1 - SO3
15	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE 1M1 - 4M3
3	12 g	VITA VM 13 SUN DENTINE SD1 - SD3
2	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 13 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	12 g	VITA VM 13 CORRECTIVE COR1
5	12 g	VITA VM 13 CHROMA PLUS CP1 - CP5
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA VM PASTE FLUID
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		VITA MODISOL
1		Supports de cuisson A+B+C pour molaires (ensemble de 6)
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Indicateur de couleurs VITA VM 13 3D-MASTER
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide



VITAVM®13 BASIC KIT SMALL POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Petit coffret de base pour la stratification BASIC
BV13BKS12V2

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
4	12 g	VITA VM 13 OPAQUE OP1 - OP4
3	12 g	VITA VM 13 SUN OPAQUE SO1 - SO3
15	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE 1M1 - 4M3
3	12 g	VITA VM 13 SUN DENTINE SD1 - SD3
2	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 13 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	12 g	VITA VM 13 CORRECTIVE COR1
5	12 g	VITA VM 13 CHROMA PLUS CP1 - CP5
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1		VITA MODISOL
1		Supports de cuisson A+B+C pour molaires (ensemble de 6)
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Indicateur de couleurs VITA VM 13 3D-MASTER
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide

VITAVM®13 BLEACHED COLOR KIT PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Couleurs ultra claires pour la reproduction des dents blanchies
BV13BLKPV1

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 g	VITA VM 13 OPAQUE PASTE OPO
3	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE 0M1 - 0M3
3	12 g	VITA VM 13 TRANSPA DENTINE 0M1 - 0M3
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	15 ml	VITA VM PASTE FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		VITA BLEACHED SHADE GUIDE, Shade Group 0



VITAVM®13 BLEACHED COLOR KIT POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Couleurs ultra claires pour la reproduction des dents blanchies
BV13BLKV1

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VM 13 OPAQUE OP0
3	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE 0M1 - 0M3
3	12 g	VITA VM 13 TRANSPA DENTINE 0M1 - 0M3
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1		VITA BLEACHED SHADE GUIDE, Shade Group 0



VITAVM®13 BUILD UP KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Coffret pour la stratification BUILD UP
BV13BUK12V1

Quantité	Contenu	Matériau
26	12 g	VITA VM 13 TRANSPA DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS

VITAVM®13 BUILD UP KIT SMALL VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Petit coffret pour la stratification BUILD UP
BV13BUKS12V1

Quantité	Contenu	Matériau
15	12 g	VITA VM 13 TRANSPA DENTINE 1M1 - 4M3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS

VITAVM®13 ONE COLOR KIT 2M2 PASTE

Coffret d'essai pour premiers tests

BV130CK2M2PV3

Quantité	Contenu	Matériau
1	7 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE PASTE WO
1	5 g	VITA VM 13 OPAQUE PASTE OP2
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA VM PASTE FLUID
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA barrette de couleur 2M2



VITAVM®13 ONE COLOR KIT 2M2 POWDER

Coffret d'essai pour les premiers tests

BV130CK2M2V3

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
1	12 g	VITA VM 13 OPAQUE OP2
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA barrette de couleur 2M2

VITAVM®13 ONE COLOR KIT 3M2 PASTE

Coffret d'essai pour premiers tests

BV130CK3M2PV3

Quantité	Contenu	Matériau
1	7 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE PASTE WO
1	5 g	VITA VM 13 OPAQUE PASTE OP3
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE 3M2
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA VM PASTE FLUID
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA barrette de couleur 3M2

VITAVM®13 ONE COLOR KIT 3M2 POWDER

Coffret d'essai pour premiers tests

BV130CK3M2V3

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
1	12 g	VITA VM 13 OPAQUE OP3
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE 3M2
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA barrette de couleur 3M2

VITAVM®13 masse supplémentaires

utilisable pour VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1-D4

VITAVM®13 GINGIVA KIT PASTE

Masses gingivales naturelles

BV13GKPV1

Quantité	Contenu	Matériau
5	12 g	VITA VM 13 GINGIVA G1 - G5
2	5 g	VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE PASTE GOL, GOD
1		Plaquette de couleurs VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®13 GINGIVA KIT
Masses gingivales naturelles
BV13GKV1

Quantité	Contenu	Matériau
5	12 g	VITA VM 13 GINGIVA G1 - G5
2	12 g	VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE GOL, GOD
1		Plaquette de couleurs VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®13 MARGIN KIT
Pour la réalisation d'épaulements en céramique
BV13MKV1

Quantité	Contenu	Matériau
6	12 g	VITA VM 13 MARGIN M1, M4 - M5, M7 - M9
1		Plaquette de couleurs VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®13 PROFESSIONAL KIT SMALL
Pour création d'effets et de caractérisations
BV13PKS

Quantité	Contenu	Matériau
5	12 g	VITA VM 13 EFFECT CHROMA EC1, EC4, EC6, EC8 - EC9
1	12 g	VITA VM 13 MAMELON MM2
1	12 g	VITA VM 13 EFFECT PEARL EP1
1	12 g	VITA VM 13 EFFECT OPAL EO2
7	12 g	VITA VM 13 EFFECT ENAMEL EE1, EE3, EE7 - EE11
1		Plaquette de couleurs VITA VM PROFESSIONAL KIT SMALL



VITAVM®13 PROFESSIONAL KIT
Pour création d'effets et de caractérisations
BV13PKV2

Quantité	Contenu	Matériau
11	12 g	VITA VM 13 EFFECT CHROMA EC1 - EC11
3	12 g	VITA VM 13 MAMELON MM1 - MM3
3	12 g	VITA VM 13 EFFECT PEARL EP1 - EP3
5	12 g	VITA VM 13 EFFECT OPAL EO1 - EO5
11	12 g	VITA VM 13 EFFECT ENAMEL EE1 - EE11
6	12 g	VITA VM 13 EFFECT LINER EL1 - EL6
1		Plaquette de couleurs VITA VM EFFECT CHROMA
1		Plaquette de couleurs VITA VM EFFECT LINER / EFFECT OPAL / MAMELON
1		Plaquette de couleurs VITA VM EFFECT ENAMEL / EFFECT PEARL

VITAVM®13 articles**VITAVM®13 VITA classical A1-D4®**

VITA VM 13 OPAQUE PASTE, 5 g

Désignation	N° art. 5 g
A1	B453015
A2	B453025
A3	B453035
A3.5	B453045
A4	B453055
B1	B453065
B2	B453075
B3	B453085
B4	B453095
C1	B453105
C2	B453115
C3	B453125
C4	B453135
D2	B453145
D3	B453155
D4	B453165

VITA VM 13 OPAQUE, 12 g / 50 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g
A1	B4540112	B4540150
A2	B4540212	B4540250
A3	B4540312	B4540350
A3.5	B4540412	B4540450
A4	B4540512	B4540550
B1	B4540612	B4540650
B2	B4540712	B4540750
B3	B4540812	B4540850
B4	B4540912	B4540950
C1	B4541012	B4541050
C2	B4541112	B4541150
C3	B4541212	B4541250
C4	B4541312	B4541350
D2	B4541412	B4541450
D3	B4541512	B4541550
D4	B4541612	B4541650

VITA VM 13 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g
A1	ENL	B4543112	B4543150
A2	ENL	B4543212	B4543250
A3	ENL	B4543312	B4543350
A3.5	END	B4543412	B4543450
A4	END	B4543512	B4543550
B1	END	B4543612	B4543650
B2	END	B4543712	B4543750
B3	END	B4543812	B4543850
B4	END	B4543912	B4543950
C1	END	B4544012	B4544050
C2	END	B4544112	B4544150
C3	ENL	B4544212	B4544250
C4	ENL	B4544312	B4544350
D2	END	B4544412	B4544450
D3	END	B4544512	B4544550
D4	END	B4544612	B4544650

VITA VM 13 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g
A1	ENL	B4545112	B4545150
A2	ENL	B4545212	B4545250
A3	ENL	B4545312	B4545350
A3.5	END	B4545412	B4545450
A4	END	B4545512	B4545550
B1	END	B4545612	B4545650
B2	END	B4545712	B4545750
B3	END	B4545812	B4545850
B4	END	B4545912	B4545950
C1	END	B4546012	B4546050
C2	END	B4546112	B4546150
C3	ENL	B4546212	B4546250
C4	ENL	B4546312	B4546350
D2	END	B4546412	B4546450
D3	END	B4546512	B4546550
D4	END	B4546612	B4546650

VITAVM® 13 VITA SYSTEM 3D-MASTER®
VITA VM 13 BASE DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g	N° art. 250 g
0M1	ENL	B4503112	B4503150	-
0M2	ENL	B4503212	B4503250	-
0M3	ENL	B4503312	B4503350	-
1M1	ENL	B4503412	B4503450	-
1M2	ENL	B4503512	B4503550	-
2L1.5	ENL	B4503612	B4503650	-
2L2.5	ENL	B4503712	B4503750	-
2M1	ENL	B4503812	B4503850	-
2M2	ENL	B4503912	B4503950	B45039250
2M3	ENL	B4504012	B4504050	B45040250
2R1.5	ENL	B4504112	B4504150	-
2R2.5	ENL	B4504212	B4504250	-
3L1.5	ENL	B4504312	B4504350	-
3L2.5	ENL	B4504412	B4504450	-
3M1	ENL	B4504512	B4504550	-
3M2	ENL	B4504612	B4504650	B45046250
3M3	ENL	B4504712	B4504750	B45047250

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g	N° art. 250 g
3R1.5	ENL	B4504812	B4504850	-
3R2.5	ENL	B4504912	B4504950	-
4L1.5	END	B4505012	B4505050	-
4L2.5	END	B4505112	B4505150	-
4M1	END	B4505212	B4505250	-
4M2	END	B4505312	B4505350	-
4M3	END	B4505412	B4505450	-
4R1.5	END	B4505512	B4505550	-
4R2.5	END	B4505612	B4505650	-
5M1	END	B4505712	B4505750	-
5M2	END	B4505812	B4505850	-
5M3	END	B4505912	B4505950	-

VITA VM 13 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g	N° art. 250 g
0M1	ENL	B4506112	B4506150	-
0M2	ENL	B4506212	B4506250	-
0M3	ENL	B4506312	B4506350	-
1M1	ENL	B4506412	B4506450	-
1M2	ENL	B4506512	B4506550	-
2L1.5	ENL	B4506612	B4506650	-
2L2.5	ENL	B4506712	B4506750	-
2M1	ENL	B4506812	B4506850	-
2M2	ENL	B4506912	B4506950	B45069250
2M3	ENL	B4507012	B4507050	B45070250
2R1.5	ENL	B4507112	B4507150	-
2R2.5	ENL	B4507212	B4507250	-
3L1.5	ENL	B4507312	B4507350	-
3L2.5	ENL	B4507412	B4507450	-
3M1	ENL	B4507512	B4507550	-
3M2	ENL	B4507612	B4507650	B45076250
3M3	ENL	B4507712	B4507750	B45077250
3R1.5	ENL	B4507812	B4507850	-
3R2.5	ENL	B4507912	B4507950	-
4L1.5	END	B4508012	B4508050	-
4L2.5	END	B4508112	B4508150	-
4M1	END	B4508212	B4508250	-
4M2	END	B4508312	B4508350	-
4M3	END	B4508412	B4508450	-

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g	N° art. 250 g
4R1.5	END	B4508512	B4508550	-
4R2.5	END	B4508612	B4508650	-
5M1	END	B4508712	B4508750	-
5M2	END	B4508812	B4508850	-
5M3	END	B4508912	B4508950	-

VITA VM 13 OPAQUE, 12 g / 50 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g
OP0	B4525012	-
OP1	B4525112	B4525150
OP2	B4525212	B4525250
OP3	B4525312	B4525350
OP4	B4525412	B4525450
OP5	B4525512	-

VITA VM 13 OPAQUE PASTE, 5 g

Désignation	N° art. 5 g
OP0	B453505
OP1	B453515
OP2	B453525
OP3	B453535
OP4	B453545
OP5	B453555

VITAVM®13 masse supplémentaires
utilisable pour VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1-D4

VITA VM 13 EFFECT ENAMEL, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
EE1	B4509112
EE2	B4509212
EE3	B4509312
EE4	B4509412
EE5	B4509512
EE6	B4509612
EE7	B4509712
EE8	B4509812
EE9	B4509912
EE10	B4510012
EE11	B4510112

VITA VM 13 EFFECT CHROMA, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
EC1	B4512112
EC2	B4512212
EC3	B4512312
EC4	B4512412
EC5	B4512512
EC6	B4512612
EC7	B4512712
EC8	B4512812
EC9	B4512912
EC10	B4513012
EC11	B4513112

VITA VM 13 EFFECT LINER, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
EL1	B4514112
EL2	B4514212
EL3	B4514312
EL4	B4514412
EL5	B4514512
EL6	B4514612

VITA VM 13 EFFECT PEARL, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
EP1	B4515112
EP2	B4515212
EP3	B4515312

VITA VM 13 MAMELON, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
MM1	B4516112
MM2	B4516212
MM3	B4516312

VITA VM 13 EFFECT OPAL, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
E01	B4517112
E02	B4517212
E03	B4517312
E04	B4517412
E05	B4517512

VITA VM 13 WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g	N° art. 250 g
WIN	B4518112	B4518150	B45181250

VITA VM 13 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g	N° art. 250 g
ENL	B4519112	B4519150	B45191250
END	B4519212	B4519250	B45192250

VITA VM 13 NEUTRAL, 12 g / 50 g / 250 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g	N° art. 250 g
NT	B4520112	B4520150	B45201250

VITA VM 13 CORRECTIVE, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
COR1	B4522112
COR2	B4522212
COR3	B4522312

VITA VM 13 GINGIVA, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
G1	B4523112
G2	B4523212
G3	B4523312
G4	B4523412
G5	B4523512

VITA VM 13 CHROMA PLUS, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
CP1	B4524112
CP2	B4524212
CP3	B4524312
CP4	B4524412
CP5	B4524512

VITA VM 13 WASH OPAQUE, 12 g / 50 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g
W0	B4525912	B4525950

VITA VM 13 MARGIN, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
M1	B4526112
M4	B4526412
M5	B4526512
M7	B4526712
M8	B4526812
M9	B4526912

VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
GOL	B4527112
GOD	B4527312

VITA VM 13 COLOR OPAQUE, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
C01	B4528112
C02	B4528212
C03	B4528312

VITA VM 13 SUN OPAQUE, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
S01	B4529112
S02	B4529212
S03	B4529312

VITA VM 13 WASH OPAQUE PASTE, 7 g

Désignation	N° art. 7 g
W0	B453597

VITA VM 13 SUN DENTINE, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
SD1	B4536112
SD2	B4536212
SD3	B4536312

VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE PASTE, 5 g

Désignation	N° art. 5 g
G0L	B453715
G0D	B453735

VITA VM 13 COLOR OPAQUE PASTE, 5 g

Désignation	N° art. 5 g
C01	B453815
C02	B453825
C03	B453835

VITA VM 13 SUN OPAQUE PASTE, 5 g

Désignation	N° art. 5 g
S01	B453915
S02	B453925
S03	B453935

VITAVM®15

Céramique basse fusion, spécialement conçue pour le cosmétique des alliages à forte expansion



Description du produit

VITA VM 15 est une céramique basse fusion conçue spécialement pour le cosmétique des alliages à forte expansion dans une plage CDT de 16,0 - 17,3 x 10⁻⁶ K⁻¹.

Grâce à la modification apportée au procédé de fabrication, il a été possible de produire une céramique dont la structure, contrairement aux céramiques classiques, présente après la cuisson une répartition particulièrement homogène des phases cristalline et vitreuse, d'où son appellation de céramique à structure fine. Cette structure confère de remarquables propriétés au matériau VM 15.

Comme pour toutes les masses VITA VM le concept de stratification VITA VM 15 est calqué sur l'exemple vivant et se différencie donc nettement de tous les concepts de stratification connus. La BASE DENTINE qui donne la couleur est la composante fondamentale pour reproduire la couleur de la dent.

Avantages

- Parfaites qualités de mise en œuvre telles que tenue et aptitude à la sculpture.
- Remarquable comportement au meulage et au polissage, notamment en bouche.
- État de surface homogène et dense avec pour conséquence une réduction importante des dépôts.
- Le matériau est très similaire à l'émail et procure ainsi une agréable sensation en bouche.
- Réfraction et réflexion de la lumière similaires à l'émail.
- Offre compacte de masses complémentaires fluorescentes et opalescentes pour les caractérisations.
- Compatibilité avec les masses VITA AKZENT Plus et VITA INTERNO.
- Concordance chromatique avec les autres composants du système VITA VM.

Couleurs

Disponible exclusivement en couleurs du VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITAVM®15 coffrets

VITAVM®15 VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITAVM®15 BASIC KIT POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Coffret de base pour la stratification BASIC

BV15BK12

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VM 15 WASH OPAQUE WO
5	12 g	VITA VM 15 OPAQUE OP1 - OP5
26	12 g	VITA VM 15 BASE DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
5	12 g	VITA VM 15 CHROMA PLUS CP1 - CP5
2	12 g	VITA VM 15 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 15 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 15 WINDOW WIN
3	12 g	VITA VM 15 CORRECTIVE COR1 - COR3
1	50 ml	VITA VM 15 MODELLING LIQUID
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1		VITA MODISOL
1		Supports de cuisson A+B+C pour molaires (ensemble de 6)
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Indicateur de couleurs VITA VM 15 3D-MASTER
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide

VITAVM®15 BASIC KIT PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Coffret de base pour la stratification BASIC
BV15BK12P

Quantité	Contenu	Matériau
1	7 g	VITA VM 15 WASH OPAQUE PASTE W0
5	5 g	VITA VM 15 OPAQUE PASTE OP1 - OP5
26	12 g	VITA VM 15 BASE DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
5	12 g	VITA VM 15 CHROMA PLUS CP1 - CP5
2	12 g	VITA VM 15 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 15 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 15 WINDOW WIN
3	12 g	VITA VM 15 CORRECTIVE COR1 - COR3
1	50 ml	VITA VM 15 MODELLING LIQUID
1	15 ml	VITA VM PASTE FLUID
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		VITA MODISOL
1		Supports de cuisson A+B+C pour molaires (ensemble de 6)
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Indicateur de couleurs VITA VM 15 3D-MASTER
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide

VITAVM®15 BASIC KIT SMALL POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Petit coffret de base pour la stratification BASIC
BV15BKS12

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VM 15 WASH OPAQUE WO
4	12 g	VITA VM 15 OPAQUE OP1 - OP4
15	12 g	VITA VM 15 BASE DENTINE 1M1 - 4M3
5	12 g	VITA VM 15 CHROMA PLUS CP1 - CP5
2	12 g	VITA VM 15 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 15 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 15 WINDOW WIN
1	12 g	VITA VM 15 CORRECTIVE COR1
1	50 ml	VITA VM 15 MODELLING LIQUID
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1		VITA MODISOL
1		Supports de cuisson A+B+C pour molaires (ensemble de 6)
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Indicateur de couleurs VITA VM 15 3D-MASTER
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide

VITAVM®15 BASIC KIT SMALL PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Petit coffret de base pour la stratification BASIC
BV15BKS12P

Quantité	Contenu	Matériau
1	7 g	VITA VM 15 WASH OPAQUE PASTE WO
4	5 g	VITA VM 15 OPAQUE PASTE OP1 - OP4
15	12 g	VITA VM 15 BASE DENTINE 1M1 - 4M3
5	12 g	VITA VM 15 CHROMA PLUS CP1 - CP5
2	12 g	VITA VM 15 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 15 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 15 WINDOW WIN
1	12 g	VITA VM 15 CORRECTIVE COR1
1	50 ml	VITA VM 15 MODELLING LIQUID
1	15 ml	VITA VM PASTE FLUID
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		VITA MODISOL
1		Supports de cuisson A+B+C pour molaires (ensemble de 6)
1		Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges)
1		Indicateur de couleurs VITA VM 15 3D-MASTER
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide



VITAVM®15 BLEACHED COLOR KIT POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Couleurs ultra claires pour la reproduction des dents blanchies
BV15BLK

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VM 15 OPAQUE OPO
3	12 g	VITA VM 15 BASE DENTINE 0M1 - 0M3
3	12 g	VITA VM 15 TRANSPA DENTINE 0M1 - 0M3
1	12 g	VITA VM 15 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 15 NEUTRAL NT
1	12 g	VITA VM 15 WINDOW WIN
1	50 ml	VITA VM 15 MODELLING LIQUID
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1		VITA BLEACHED SHADE GUIDE, Shade Group 0



VITAVM®15 BUILD UP KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Coffret pour la stratification BUILD UP
BV15BUK12

Quantité	Contenu	Matériau
26	12 g	VITA VM 15 TRANSPA DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
1	50 ml	VITA VM 15 MODELLING LIQUID



VITAVM®15 BUILD UP KIT SMALL VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Petit coffret pour la stratification BUILD UP
BV15BUKS12

Quantité	Contenu	Matériau
15	12 g	VITA VM 15 TRANSPA DENTINE 1M1 - 4M3
1	50 ml	VITA VM 15 MODELLING LIQUID

VITAVM®15 ONE COLOR KIT 3M2 POWDER
Coffret d'essai pour premiers tests
BV15OCK3M2V2

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA VM 15 WASH OPAQUE WO
1	12 g	VITA VM 15 OPAQUE OP3
1	12 g	VITA VM 15 BASE DENTINE 3M2
1	12 g	VITA VM 15 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 15 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA VM 15 MODELLING LIQUID
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA barrette de couleur 3M2

VITAVM®15 masse supplémentaires



VITAVM®15 GINGIVA KIT
Masses gingivales naturelles
BV15GKV1

Quantité	Contenu	Matériau
5	12 g	VITA VM 15 GINGIVA G1 - G5
2	12 g	VITA VM 15 GINGIVA OPAQUE GOL, GOD
1		Plaquette de couleurs VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®15 MARGIN KIT

**Pour la réalisation d'épaulements en céramique
BV15MKV1**

Quantité	Contenu	Matériau
6	12 g	VITA VM 15 MARGIN M1, M4 - M5, M7 - M9
1		Plaquette de couleurs VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®15 PROFESSIONAL KIT SMALL

**Pour création d'effets et de caractérisations
BV15PKS**

Quantité	Contenu	Matériau
5	12 g	VITA VM 15 EFFECT CHROMA EC1, EC4, EC6, EC8 - EC9
1	12 g	VITA VM 15 MAMELON MM2
1	12 g	VITA VM 15 EFFECT PEARL EP1
1	12 g	VITA VM 15 EFFECT OPAL EO2
7	12 g	VITA VM 15 EFFECT ENAMEL EE1, EE3, EE7 - EE11
1		Plaquette de couleurs VITA VM PROFESSIONAL KIT SMALL



VITAVM®15 PROFESSIONAL KIT

**Pour création d'effets et de caractérisations
BV15PKV1**

Quantité	Contenu	Matériau
11	12 g	VITA VM 15 EFFECT CHROMA EC1 - EC11
3	12 g	VITA VM 15 MAMELON MM1 - MM3
3	12 g	VITA VM 15 EFFECT PEARL EP1 - EP3
3	12 g	VITA VM 15 EFFECT OPAL EO1 - EO3
11	12 g	VITA VM 15 EFFECT ENAMEL EE1 - EE11
6	12 g	VITA VM 15 EFFECT LINER EL1 - EL6
1		Plaquette de couleurs VITA VM EFFECT ENAMEL / EFFECT PEARL
1		Plaquette de couleurs VITA VM EFFECT CHROMA
1		Plaquette de couleurs VITA VM EFFECT LINER / EFFECT OPAL / MAMELON

VITAVM®15 articles**VITAVM®15 VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITA VM 15 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g
0M1	ENL	B4603112	-
0M2	ENL	B4603212	-
0M3	ENL	B4603312	-
1M1	ENL	B4603412	B4603450
1M2	ENL	B4603512	B4603550
2L1.5	ENL	B4603612	-
2L2.5	ENL	B4603712	-
2M1	ENL	B4603812	B4603850
2M2	ENL	B4603912	B4603950
2M3	ENL	B4604012	B4604050
2R1.5	ENL	B4604112	-
2R2.5	ENL	B4604212	-
3L1.5	ENL	B4604312	B4604350
3L2.5	ENL	B4604412	B4604450
3M1	ENL	B4604512	B4604550
3M2	ENL	B4604612	B4604650
3M3	ENL	B4604712	B4604750
3R1.5	ENL	B4604812	B4604850
3R2.5	ENL	B4604912	B4604950
4L1.5	END	B4605012	-
4L2.5	END	B4605112	-
4M1	END	B4605212	B4605250
4M2	END	B4605312	B4605350
4M3	END	B4605412	B4605450
4R1.5	END	B4605512	-
4R2.5	END	B4605612	-
5M1	END	B4605712	-
5M2	END	B4605812	-
5M3	END	B4605912	-

VITA VM 15 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 12 g	N° art. 50 g
0M1	ENL	B4606112	-
0M2	ENL	B4606212	-
0M3	ENL	B4606312	-
1M1	ENL	B4606412	B4606450
1M2	ENL	B4606512	B4606550
2L1.5	ENL	B4606612	-
2L2.5	ENL	B4606712	-
2M1	ENL	B4606812	B4606850
2M2	ENL	B4606912	B4606950
2M3	ENL	B4607012	B4607050
2R1.5	ENL	B4607112	-
2R2.5	ENL	B4607212	-
3L1.5	ENL	B4607312	B4607350
3L2.5	ENL	B4607412	B4607450
3M1	ENL	B4607512	B4607550
3M2	ENL	B4607612	B4607650
3M3	ENL	B4607712	B4607750
3R1.5	ENL	B4607812	B4607850
3R2.5	ENL	B4607912	B4607950
4L1.5	END	B4608012	-
4L2.5	END	B4608112	-
4M1	END	B4608212	B4608250
4M2	END	B4608312	B4608350
4M3	END	B4608412	B4608450
4R1.5	END	B4608512	-
4R2.5	END	B4608612	-
5M1	END	B4608712	-
5M2	END	B4608812	-
5M3	END	B4608912	-

VITA VM 15 OPAQUE, 12 g / 50 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g
OP0	B4625012	-
OP1	B4625112	B4625150
OP2	B4625212	B4625250
OP3	B4625312	B4625350
OP4	B4625412	B4625450
OP5	B4625512	-

VITA VM 15 OPAQUE PASTE, 5 g

Désignation	N° art. 5 g
OP1	B463515
OP2	B463525
OP3	B463535
OP4	B463545
OP5	B463555

VITAVM®15 masse supplémentaires

VITA VM 15 EFFECT ENAMEL, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
EE1	B4609112
EE2	B4609212
EE3	B4609312
EE4	B4609412
EE5	B4609512
EE6	B4609612
EE7	B4609712
EE8	B4609812
EE9	B4609912
EE10	B4610012
EE11	B4610112

VITA VM 15 EFFECT CHROMA, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
EC1	B4612112
EC2	B4612212
EC3	B4612312
EC4	B4612412
EC5	B4612512
EC6	B4612612
EC7	B4612712
EC8	B4612812
EC9	B4612912
EC10	B4613012
EC11	B4613112

VITA VM 15 EFFECT LINER, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
EL1	B4614112
EL2	B4614212
EL3	B4614312
EL4	B4614412
EL5	B4614512
EL6	B4614612

VITA VM 15 EFFECT PEARL, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
EP1	B4615112
EP2	B4615212
EP3	B4615312

VITA VM 15 MAMELON, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
MM1	B4616112
MM2	B4616212
MM3	B4616312

VITA VM 15 EFFECT OPAL, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
E01	B4617112
E02	B4617212
E03	B4617312

VITA VM 15 WINDOW, 12 g / 50 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g
WIN	B4618112	B4618150

VITA VM 15 ENAMEL, 12 g / 50 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g
ENL	B4619112	B4619150
END	B4619212	B4619250

VITA VM 15 NEUTRAL, 12 g / 50 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g
NT	B4620112	B4620150

VITA VM 15 CORRECTIVE, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
COR1	B4622112
COR2	B4622212
COR3	B4622312

VITA VM 15 GINGIVA, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
G1	B4623112
G2	B4623212
G3	B4623312
G4	B4623412
G5	B4623512

VITA VM 15 CHROMA PLUS, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
CP1	B4624112
CP2	B4624212
CP3	B4624312
CP4	B4624412
CP5	B4624512

VITA VM 15 WASH OPAQUE, 12 g / 50 g

Désignation	N° art. 12 g	N° art. 50 g
WO	B4625912	B4625950

VITA VM 15 MARGIN, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
M1	B4626112
M4	B4626412
M5	B4626512
M7	B4626712
M8	B4626812
M9	B4626912

VITA VM 15 GINGIVA OPAQUE, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
GOL	B4627112
GOD	B4627312

VITA VM 15 COLOR OPAQUE, 12 g

Désignation	N° art. 12 g
CO1	B4628112
CO2	B4628212
CO3	B4628312

VITA VM 15 WASH OPAQUE PASTE, 7 g

Désignation	N° art. 7 g
WO	B463597

VITA NP BOND



Description du produit

Bonder pour une plus grande sécurité et une plus belle esthétique lors du montage cosmétique des alliages dentaires non précieux. En fiabilisant la cohésion entre l'infrastructure métallique et la céramique cosmétique (par ex. VITA VMK MASTER et VITA VM 13) VITA NP BOND contribue à éviter les erreurs consécutives à des contraintes entre l'alliage et la céramique.

VITA NP BOND (NP : Non Précieux) améliore la cohésion entre l'infrastructure métallique et la céramique cosmétique en particulier en présence d'alliages non précieux. Il apporte une plus grande sécurité aux prothésistes qui veulent réaliser un montage cosmétique durable et esthétique.

Avantages

- Compensateur efficace de CDT entre la céramique et l'alliage métallique, notamment en présence d'alliages non précieux pour une cohésion durable entre l'infrastructure et la céramique.
- Meilleure reproduction de la couleur.
- Gain de temps avec la suppression du LAIT D'OPAQUE.
- La structure de surface étant meilleure après la cuisson du BONDER, l'opaque s'applique mieux et de manière homogène.

VITA NP BOND articles

VITA NP BOND

Désignation	N° art.
VITA NP BOND PASTE, 5 g	BNPB5

VITAVM® LC

Composite à micro particules photopolymérisable pour une utilisation au laboratoire en prothèse amovible et fixée



Description du produit

VITA VM LC flow

Simplicité de la mise en œuvre. Rentabilité et esthétique assurées. De nombreuses applications : la gamme de produits VITA VM LC offre tout ce que l'on peut attendre d'un composite cosmétique pour la fabrication de restaurations au laboratoire.

Composite en pâte classique, combiné aux masses à basse viscosité ou à d'autres au choix : VITA VM LC donne toujours de superbes résultats. Très proche de la céramique et totalement fiable grâce au système associé.

Avantages

- Deux conditionnements pour des possibilités quasiment illimitées
- Parfaitement adaptée à toutes les indications
- De superbes résultats avec une reproduction remarquable de la couleur à partir des formules de couleur VITA
- Excellentes propriétés du matériau
- Palette de produits modulaire, basée sur un système pour une créativité performante

Indications

Indications

- Incrustation partielle et complète des infrastructures métalliques : couronnes, bridges, couronnes télescopes, suprastructures implantaires.
- Inlays, facettes.

Domaines d'application

- Personnalisation et stratification secondaire de VITA ENAMIC.
- Incrustation des infrastructures en ZrO2 partiellement stabilisées à l'yttrium (CDT env. 10,5 · 10-6 · K-1) comme par ex. VITA YZ.
- Personnalisation des dents en résine VITA.
- Reproduction des zones gingivales.
- Incrustation de prothèses amovibles et amovo-inamovibles (selon indications du fabricant) en
 - polyétheréthercétone chargé jusqu'à 20% de céramique (PEEK), comme par ex. BioHPP/Bredent,
 - PEEK-OPTIMA® LT1 polymère, par ex. Juvora, InnoBlanc Medical.

Prothèses transitoires

- Personnalisation et stratification secondaire des prothèses temporaires en VITA CAD-Temp.
- Couronnes et bridges antérieurs de 3 éléments sans métal en VITA VM LC.

Couleurs

Disponible en couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® et VITA classical A1–D4®

VITAVM® LC coffrets**VITAVM® LC VITA classical A1-D4®**

VITAVM® LC BASIC KIT VITA classical A1-D4® - Paste Edition
Coffret de base pour la stratification BASIC
CVLCBKCV3

Quantité	Contenu	Matériau
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
15	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A1 - D4
15	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE A1 - D4
2	4 g	VITA VM LC ENAMEL ENL, END
1	4 g	VITA VM LC NEUTRAL NT
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
5	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1 - CP5
1	20 ml	VITA VM LC GEL
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	30 ml	VITA VM LC SEPARATOR
1	50 ml	VITA VM LC CLEANER
1	en porcelaine avec couvercle	linge noire
1		Porte pinceau blanc
1		Embouts de pinceau à usage unique, 50 pièces
1		Pinceau N° E 0 pinceau de maquillage
1		Plaquette de couleurs VITA VM INDIVIDUAL
1		Teintier VITA classical A1-D4

VITAVM®LC BASIC KIT SMALL VITA classical A1-D4® - Paste Edition
Petit coffret de base pour la stratification BASIC
CVLCBKSCV5

Quantité	Contenu	Matériau
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
6	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A1 - A3.5, B3, D3
6	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE A1 - A3.5, B3, D3
4	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1 - CP3, CP5
1	20 ml	VITA VM LC GEL
2	4 g	VITA VM LC ENAMEL ENL, END
1	4 g	VITA VM LC NEUTRAL NT
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	30 ml	VITA VM LC SEPARATOR
1	50 ml	VITA VM LC CLEANER
1	en porcelaine avec couvercle	linge noire
1		Porte pinceau blanc
1		Embouts de pinceau à usage unique, 50 pièces
1		Pinceau N° E 0 pinceau de maquillage
1		Plaquette de couleurs VITA VM INDIVIDUAL
1		Teintier VITA classical A1-D4

VITAVM®LC BASIC KIT VITA classical A1-D4® - flow Edition
Coffret de base pour la stratification BASIC
CVLCFBKC

Quantité	Contenu	Matériau
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
15	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A1 - D4
15	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE A1 - D4
2	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL, END
1	4 g	VITA VM LC flow NEUTRAL NT
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
5	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1 - CP5
1	20 ml	VITA VM LC GEL
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	30 ml	VITA VM LC SEPARATOR
1	50 ml	VITA VM LC CLEANER
1	en porcelaine avec couvercle	lange noire
1		Porte pinceau blanc
1		Embouts de pinceau à usage unique, 50 pièces
1		Pinceau N° E 0 pinceau de maquillage
1		Plaquette de couleurs VITA VM INDIVIDUAL
1		Teintier VITA classical A1-D4

VITAVM®LC BASIC KIT SMALL VITA classical A1-D4® - flow Edition
Petit coffret de base pour la stratification BASIC
CVLCFBKSC

Quantité	Contenu	Matériau
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
6	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A1 - A3.5, B3, D3
6	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE A1 - A3.5, B3, D3
4	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1 - CP3, CP5
1	20 ml	VITA VM LC GEL
2	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL, END
1	4 g	VITA VM LC flow NEUTRAL NT
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	30 ml	VITA VM LC SEPARATOR
1	50 ml	VITA VM LC CLEANER
1	en porcelaine avec couvercle	linge noire
1		Porte pinceau blanc
1		Embouts de pinceau à usage unique, 50 pièces
1		Pinceau N° E 0 pinceau de maquillage
1		Plaquette de couleurs VITA VM INDIVIDUAL
1		Teintier VITA classical A1-D4



VITAVM®LC INLAY/VENEER KIT VITA classical A1-D4® flow Edition
pour restaurations sans métal
CVLCFIVKC

Quantité	Contenu	Matériau
6	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE A1 - A3.5, B3, D3
2	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL, END
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	30 ml	VITA VM LC SEPARATOR
1		VITA barrette de couleur classical (A1-A3.5, B3, D3), 6 pièces



VITAVM®LC ONE COLOR KIT A2 - flow Edition
Coffret d'essai pour les premiers tests
CVLCFTKGA2

Quantité	Contenu	Matériau
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A2
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE A2
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Porte pinceau blanc
1		Embouts de pinceau à usage unique, 50 pièces
1		VITA barrette de couleur A2



VITAVM®LC ONE COLOR KIT A3 - flow Edition
Coffret d'essai pour les premiers tests
CVLCFTKGA3

Quantité	Contenu	Matériau
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A3
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE A3
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
2	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2 - CP3
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Porte pinceau blanc
1		Embouts de pinceau à usage unique, 50 pièces
1		VITA barrette de couleur A3

VITAVM® LC VITA SYSTEM 3D-MASTER®

**VITAVM® LC BASIC KIT SMALL VITA SYSTEM 3D-MASTER® - Paste
Edition
Petit coffret de base pour la stratification BASIC
CVLCBKS6**

Quantité	Contenu	Matériau
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
11	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE 1M1 - 1M2, 2L1.5, 2M1 - 2M3, 3L1.5, 3M2 - 3M3, 3R2.5, 4M2
11	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5, 2M1 - 2M3, 3L1.5, 3M2 - 3M3, 3R2.5, 4M2
2	4 g	VITA VM LC ENAMEL ENL, END
1	4 g	VITA VM LC NEUTRAL NT
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
5	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1 - CP5
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	30 ml	VITA VM LC SEPARATOR
1	50 ml	VITA VM LC CLEANER
1	20 ml	VITA VM LC GEL
1	en porcelaine avec couvercle	linge noire
1		Porte pinceau blanc
1		Embouts de pinceau à usage unique, 50 pièces
1		Pinceau N° E 0 pinceau de maquillage
1		Plaquette de couleurs VITA VM INDIVIDUAL
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide

VITAVM®LC BASIC KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER® - Paste Edition
Coffret de base pour la stratification BASIC
CVLCBKV6

Quantité	Contenu	Matériau
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
15	10 g	VITA VM LC OPAQUE 2L2.5 - 5M3
11	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE 1M1 - 1M2, 2L1.5, 2M1 - 2M3, 3L1.5, 3M2 - 3M3, 3R2.5, 4M2
26	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
2	4 g	VITA VM LC ENAMEL ENL, END
1	4 g	VITA VM LC NEUTRAL NT
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
5	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1 - CP5
2	5 ml	VITA VM LC OPAQUE LIQUID
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	30 ml	VITA VM LC SEPARATOR
1	50 ml	VITA VM LC CLEANER
1	20 ml	VITA VM LC GEL
1	en porcelaine avec couvercle	linge noire
1		Porte pinceau blanc
1		Embouts de pinceau à usage unique, 50 pièces
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		Cuiller dose, 0,1 ml / Spatule de mélange 2 faces
1		Pinceau N° E 0 pinceau de maquillage
1		Plaquette de couleurs VITA VM INDIVIDUAL
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide

VITAVM®LC BASIC KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER® - flow Edition
Coffret de base pour la stratification BASIC
CVLCFBK

Quantité	Contenu	Matériau
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
15	10 g	VITA VM LC OPAQUE 2L2.5 - 5M3
11	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE 1M1 - 1M2, 2L1.5, 2M1 - 2M3, 3L1.5, 3M2 - 3M3, 3R2.5, 4M2
26	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
2	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL, END
1	4 g	VITA VM LC flow NEUTRAL NT
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
5	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1 - CP5
2	5 ml	VITA VM LC OPAQUE LIQUID
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	30 ml	VITA VM LC SEPARATOR
1	50 ml	VITA VM LC CLEANER
1	20 ml	VITA VM LC GEL
1	en porcelaine avec couvercle	linge noire
1		Porte pinceau blanc
1		Embouts de pinceau à usage unique, 50 pièces
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
1		Cuiller dose, 0,1 ml / Spatule de mélange 2 faces
1		Pinceau N° E 0 pinceau de maquillage
1		Plaquette de couleurs VITA VM INDIVIDUAL
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide

VITAVM®LC BASIC KIT SMALL VITA SYSTEM 3D-MASTER® - flow Edition
Petit coffret de base pour la stratification BASIC
CVLCFBKS

Quantité	Contenu	Matériau
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
11	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE 1M1 - 1M2, 2L1.5, 2M1 - 2M3, 3L1.5, 3M2 - 3M3, 3R2.5, 4M2
11	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5, 2M1 - 2M3, 3L1.5, 3M2 - 3M3, 3R2.5, 4M2
2	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL, END
1	4 g	VITA VM LC flow NEUTRAL NT
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
5	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1 - CP5
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	30 ml	VITA VM LC SEPARATOR
1	50 ml	VITA VM LC CLEANER
1	20 ml	VITA VM LC GEL
1	en porcelaine avec couvercle	lange noire
1		Porte pinceau blanc
1		Embouts de pinceau à usage unique, 50 pièces
1		Pinceau N° E 0 pinceau de maquillage
1		Plaquette de couleurs VITA VM INDIVIDUAL
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide



VITAVM®LC INLAY/VENEER KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER® flow Edition
pour restaurations sans métal
CVLCFIVK

Quantité	Contenu	Matériau
6	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE 1M2, 2M2, 3M2, 2L1.5, 3R2.5, 3L2.5
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	30 ml	VITA VM LC SEPARATOR
1		VITA barrette de couleur 3D-MASTER (1M2, 2L1.5, 2M2, 3L2.5, 3M2, 3R2.5), 6 pièces



VITAVM®LC ONE COLOR KIT 2M2 - flow Edition
Coffret d'essai pour les premiers tests
CVLCFTKG2M2

Quantité	Contenu	Matériau
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE 2M2
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE 2M2
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
2	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1, CP3
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Porte pinceau blanc
1		Embouts de pinceau à usage unique, 50 pièces
1		VITA barrette de couleur 2M2



VITAVM®LC ONE COLOR KIT 3M2 - flow Edition
Coffret d'essai pour les premiers tests
CVLCFTKG3M2

Quantité	Contenu	Matériau
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE 3M2
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE 3M2
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
2	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP3, CP5
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Porte pinceau blanc
1		Embouts de pinceau à usage unique, 50 pièces
1		VITA barrette de couleur 3M2

VITAVM®LC masse supplémentaires
 utilisable pour VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1-D4



VITAVM®LC CREATIVE KIT - flow Edition
 pour stratification sur CAD-Temp et pour l'individualisation des dents en
 résine VITA

CVLCFCK

Quantité	Contenu	Matériau
4	2 g	VITA VM LC PAINT PT1, PT5, PT15, PT17
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
2	3 g	VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL EE6, EE9
1	4 g	VITA VM LC flow NEUTRAL NT
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Pinceau N° E 0 pinceau de maquillage



VITAVM®LC PROFESSIONAL KIT - flow Edition
 pour des effets et des caractérisations naturelles

CVLCFPK

Quantité	Contenu	Matériau
8	3 g	VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL EE1 - EE2, EE5 - EE7, EE9, EE11 - EE12
1		Plaquette de couleurs VITA VM INDIVIDUAL



VITAVM®LC GINGIVA KIT
 Masses gingivales naturelles

CVLCGKV4

Quantité	Contenu	Matériau
1	3 g	VITA VM LC GINGIVA OPAQUE PASTE GOL
4	4 g	VITA VM LC GINGIVA G1 - G2, G4 - G5
5	3 g	VITA VM LC flow GINGIVA G1 - G5
1		Plaquette de couleurs VITA VM INDIVIDUAL



VITAVM®LC PAINT KIT
 Masses intenses

CVLCPAKV4

Quantité	Contenu	Matériau
10	2 g	VITA VM LC PAINT PT1, PT3, PT5, PT8 - PT9, PT12 - PT13, PT15, PT17, PT19
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
1		Plaquette de couleurs VITA VM INDIVIDUAL



VITAVM®LC PROFESSIONAL KIT Paste Edition
pour des effets et des caractérisations naturelles
CVLCPKV5

Quantité	Contenu	Matériau
5	4 g	VITA VM LC EFFECT ENAMEL EE2 - EE3, EE6, EE9, EE12
1		Plaquette de couleurs VITA VM INDIVIDUAL

VITAVM® LC articles

VITAVM® LC VITA classical A1-D4®

VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g

Désignation	N° art. 3 g
A1	C443013
A2	C443023
A3	C443033
A3.5	C443043
A4	C443053
B2	C443073
B3	C443083
B4	C443093
C1	C443103
C2	C443113
C3	C443123
C4	C443133
D2	C443143
D3	C443153
D4	C443163

VITA VM LC OPAQUE, 10g

Désignation	N° art. 10g
A1	C4440110
A2	C4440210
A3	C4440310
A3.5	C4440410
B3	C4440810
D3	C4441510

VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 4 g
A1	ENL	C444314
A2	ENL	C444324
A3	ENL	C444334
A3.5	END	C444344
A4	END	C444354
B2	ENL	C444374
B3	END	C444384
B4	END	C444394
C1	END	C444404
C2	ENL	C444414
C3	END	C444424
C4	END	C444434
D2	END	C444444
D3	END	C444454
D4	END	C444464

VITAVM® LC VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM LC OPAQUE, 10 g

Désignation	N° art. 10 g
0M1	C4400110
1M1	C4400410
1M2	C4400510
2L1.5	C4400610
2L2.5	C4400710
2M1	C4400810
2M2	C4400910
2M3	C4401010
2R1.5	C4401110
2R2.5	C4401210
3L1.5	C4401310
3L2.5	C4401410
3M1	C4401510
3M2	C4401610
3M3	C4401710
3R1.5	C4401810
3R2.5	C4401910
4L1.5	C4402010

Désignation	N° art. 10 g
4L2.5	C4402110
4M1	C4402210
4M2	C4402310
4M3	C4402410
4R1.5	C4402510
4R2.5	C4402610
5M1	C4402710
5M2	C4402810
5M3	C4402910

VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 4 g
0M1	ENL	C440314
1M1	ENL	C440344
1M2	ENL	C440354
2L1.5	ENL	C440364
2L2.5	ENL	C440374
2M1	ENL	C440384
2M2	ENL	C440394
2M3	ENL	C440404
2R1.5	ENL	C440414
2R2.5	ENL	C440424
3L1.5	ENL	C440434
3L2.5	ENL	C440444
3M1	ENL	C440454
3M2	ENL	C440464
3M3	ENL	C440474
3R1.5	ENL	C440484
3R2.5	ENL	C440494
4L1.5	END	C440504
4L2.5	END	C440514
4M1	END	C440524
4M2	END	C440534
4M3	END	C440544
4R1.5	END	C440554
4R2.5	END	C440564
5M1	END	C440574
5M2	END	C440584
5M3	END	C440594


VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g

Désignation	N° art. 3 g
0M1	C445013
1M1	C445043
1M2	C445053
2L1.5	C445063
2M1	C445083
2M2	C445093
2M3	C445103
3L1.5	C445133
3M2	C445163
3M3	C445173
3R2.5	C445193
4M2	C445233

VITAVM® LC masse supplémentaires
utilisable pour VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1-D4

VITA VM LC CHROMA PLUS, 4 g

Désignation	N° art. 4 g
CP1	C442414
CP2	C442424
CP3	C442434
CP4	C442444
CP5	C442454

Désignation		N° art.
VITA VM LC CLEANER, 50 ml Liquide de nettoyage		CVMLC50

VITA VM LC COLOR OPAQUE, 10 g

Désignation	N° art. 10 g
C01	C4428110
C02	C4428210
C03	C4428310

VITA VM LC EFFECT ENAMEL, 4 g

Désignation	N° art. 4 g
EE12	C441024
EE2	C440924
EE3	C440934
EE6	C440964
EE9	C440994

VITA VM LC EFFECT LINER, 4 g

Désignation	N° art. 4 g
EL2	C441424
EL3	C441434
EL4	C441444
EL5	C441454
EL6	C441464

VITA VM LC ENAMEL, 4 g

Désignation	N° art. 4 g
END	C441924
ENL	C441914

VITA VM LC flow CHROMA PLUS, 3 g

Désignation	N° art. 3 g
CP1	C44241F3
CP2	C44242F3
CP3	C44243F3
CP4	C44244F3
CP5	C44245F3

VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL, 3 g

Désignation	N° art. 3 g
EE1	C44091F3
EE11	C44101F3
EE12	C44102F3
EE2	C44092F3
EE5	C44095F3
EE6	C44096F3
EE7	C44097F3
EE9	C44099F3

VITA VM LC flow ENAMEL, 4 g

Désignation	N° art. 4 g
END	C44192F4
ENL	C44191F4

VITA VM LC flow GINGIVA, 3 g

Désignation	N° art. 3 g
G1	C44231F3
G2	C44232F3
G3	C44233F3
G4	C44234F3
G5	C44235F3

VITA VM LC flow NEUTRAL, 4 g

Désignation	N° art. 4 g
NT	C44201F4

VITA VM LC flow WINDOW, 3 g

Désignation	N° art. 3 g
WIN	C44181F3

Désignation	N° art.
VITA VM LC GEL, 20 ml	CVMLG20

VITA VM LC GINGIVA OPAQUE PASTE, 3 g



Désignation	N° art. 3 g
GOL	C443713

VITA VM LC GINGIVA OPAQUE, 10 g

Désignation	N° art. 10 g
GOL	C4427110


VITA VM LC GINGIVA, 4 g

Désignation	N° art. 4 g
G1	C442314
G2	C442324
G4	C442344
G5	C442354

Désignation		N° art.
VITA VM LC MODELLING LIQUID, 10 ml Liquide à modeler		CVMLM10
Modeling liquid Liquide à modeler		CVMLM30

VITA VM LC NEUTRAL, 4 g

Désignation	N° art. 4 g
NT	C442014


Désignation		N° art.
VITA VM LC OPAQUE LIQUID, 5 ml Liquide pour opaque		CVML0L5

VITA VM LC PAINT, 2 g

Désignation	N° art. 2 g
PT1	C444012
PT12	C444122
PT13	C444132
PT15	C444152
PT17	C444172
PT19	C444192
PT3	C444032
PT5	C444052
PT8	C444082
PT9	C444092

VITA VM LC PRE OPAQUE, 3 g

Désignation	N° art. 3 g
PRE	C445913

Désignation		N° art.
VITA VM LC SEPARATOR, 30 ml Isolant à modèles		CVMLS30

VITAVM® CC

Résine polymérisable à froid non chargée pour la fabrication extra orale de provisoires



Description du produit

VITA VM CC est une résine non chargée polymérisable à froid. C'est le matériau idéal pour la réalisation de provisoires au laboratoire.

Le très bon comportement au mélange et la remarquable coulabilité du matériau permettent de travailler vite et bien.

La plaque s'accumule beaucoup moins car le matériau se polit facilement et présente une structure homogène. La surface lisse du provisoire est agréable pour le patient et le confort en bouche est donc assuré.

Avantages

- Remarquable coulabilité.
- Très bon comportement au mélange.
- Polissage facile.
- Stabilité chromatique supérieure à celle de matériaux similaires.
- Très bonne stabilité du matériau et peu de risques de fracture du fait de la parfaite harmonisation de la résistance en flexion et du module d'élasticité.
- Accumulation de la plaque fortement limitée.
- Durcissement sans bulle, avec ou sans cocotte.

Indications

- Conception de couronnes et bridges provisoires
- Fixation des dents en résine VITA, par ex. sur les châssis métalliques
- Réparations
- Recouvrement des attachements sur les travaux combinés

Couleurs

Disponible en couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1–D4

VITAVM® CC coffrets

VITAVM® CC VITA classical A1-D4®



VITAVM®CC BASIC KIT VITA classical A1-D4®
Coffret pour la stratification BASIC
CVCCBKC

Quantité	Contenu	Matériau
15	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE A1 - D4
2	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL, END
1	30 g	VITA VM CC WINDOW WIN
1	100 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Cuiller dose en plastique
1		Teintier VITA classical A1-D4



VITAVM®CC BASIC KIT SMALL VITA classical A1-D4®
Petit coffret de base pour la stratification BASIC
CVCCBKSC

Quantité	Contenu	Matériau
6	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE A1 - A3.5, B3, D3
2	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL, END
1	30 g	VITA VM CC WINDOW WIN
1	30 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Cuiller dose en plastique
1		Teintier VITA classical A1-D4

VITAVM® CC VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITAVM®CC BASIC KIT 16-COLOR VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Coffret pour la stratification BASIC
CVCCBK16

Quantité	Contenu	Matériau
16	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE 0M1 - 5M1
2	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL, END
1	30 g	VITA VM CC WINDOW WIN
1	100 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Cuiller dose en plastique
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide



VITAVM®CC BASIC KIT 5-COLOR VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Petit coffret de base pour la stratification BASIC
CVCCBK5

Quantité	Contenu	Matériau
5	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE 1M1, 2M2, 3M2, 3R2.5, 4M2
2	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL, END
1	30 g	VITA VM CC WINDOW WIN
1	30 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Cuiller dose en plastique
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide

VITAVM®CC masse supplémentaires
utilisable pour VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1-D4



VITAVM®CC PROFESSIONAL KIT
pour des effets et des caractérisations naturelles
CVCCPK

Quantité	Contenu	Matériau
5	30 g	VITA VM CC EFFECT LINER EL2 - EL6

VITAVM® CC articles

VITAVM® CC VITA classical A1-D4®

VITA VM CC BASE DENTINE, 30 g / 100 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 30 g	N° art. 100 g
A1	ENL	C4743130	C47431100
A2	ENL	C4743230	C47432100
A3	ENL	C4743330	C47433100
A3.5	END	C4743430	C47434100
A4	END	C4743530	C47435100
B2	END	C4743730	C47437100
B3	END	C4743830	C47438100
B4	END	C4743930	-
C1	END	C4744030	-
C2	END	C4744130	C47441100
C3	ENL	C4744230	C47442100
C4	ENL	C4744330	-
D2	END	C4744430	-
D3	END	C4744530	C47445100
D4	END	C4744630	-

VITAVM® CC VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM CC BASE DENTINE, 30 g / 100 g

Désignation	Correspondance émail	N° art. 30 g	N° art. 100 g
0M1	ENL	C4703130	C47031100
1M1	ENL	C4703430	C47034100
2L1.5	ENL	C4703630	C47036100
2M1	ENL	C4703830	C47038100
2M2	ENL	C4703930	C47039100
2M3	ENL	C4704030	C47040100
3L1.5	ENL	C4704330	C47043100
3L2.5	ENL	C4704430	C47044100
3M1	ENL	C4704530	C47045100
3M2	ENL	C4704630	C47046100
3M3	ENL	C4704730	C47047100
3R1.5	ENL	C4704830	C47048100
3R2.5	ENL	C4704930	C47049100
4L1.5	END	C4705030	C47050100
4M2	END	C4705330	C47053100
5M1	END	C4705730	C47057100

**VITAVM® CC masse supplémentaires
utilisable pour VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1-D4**

VITA VM CC EFFECT LINER, 30 g

Désignation	N° art. 30 g
EL2	C4714230
EL3	C4714330
EL4	C4714430
EL5	C4714530
EL6	C4714630

VITA VM CC WINDOW, 30 g

Désignation	N° art. 30 g
WIN	C4718130

VITA VM CC ENAMEL, 30 g / 100 g

Désignation	N° art. 30 g	N° art. 100 g
ENL	C4719130	C47191100
END	C4719230	C47192100

Désignation	N° art.
VITA VM CC LIQUID, 100 ml	CVCCCL100
VITA VM CC LIQUID, 30 ml	CVCCCL30

VITA INTERNO®

Pour les caractérisations internes



Description du produit

Les masses VITA INTERNO offrent au céramiste une excellente base de départ pour parfaire la reproduction des effets de couleurs, issus du corps de la dent. Les effets chromatiques que l'on observe notamment dans la zone incisale d'une dent vivante (contrastes), seront parfaitement reproduits avec les masses INTERNO. Grâce à leur grande fluorescence - analogue à celle présente dans la nature - les couleurs sont plus lumineuses et la lumière circule mieux.

Les couleurs VITA INTERNO s'utilisent avec **toutes** les céramiques cosmétiques VITA.

Avantages

- Utilisables pour toutes les céramiques cosmétiques VITA.
- Couleurs miscibles entre elles.
- La palette de couleurs est calquée sur les effets observés sur la dent naturelle ce qui supprime le fastidieux travail de mélange des couleurs.
- Résistance et stabilité chromatique.

VITA INTERNO® coffrets**VITA INTERNO®****VITA INTERNO® KIT
BISETV2**

Quantité	Contenu	Matériau
14	3 g	VITA INTERNO Int01 - Int14
1	20 ml	VITA INTERNO FLUID
1		VITA INTERNO plaquette de couleurs échantillons
1		Plaque de mélange VITA INTERNO en plastique (Ø 144 mm, avec creux)
1		Spatule en verre VITA pour colorants
1		Pinceau n° 3 a e

VITA INTERNO® articles

VITA INTERNO®

VITA INTERNO, 3 g

Désignation	N° art. 3 g
Int01	BI013
Int02	BI023
Int03	BI033
Int04	BI043
Int05	BI053
Int06	BI063
Int07	BI073
Int08	BI083
Int09	BI093
Int10	BI103
Int11	BI113
Int12	BI123
Int13	BI133
Int14	BI143

Désignation	N° art.
VITA INTERNO FLUID, 20 ml	BIF20

VITA AKZENT® Plus

Optimisation. Simplicité. Exhaustivité.



Description du produit

De nouvelles applications nécessitent de nouveaux matériaux polyvalents. Avec les colorants VITA AKZENT Plus, les utilisateurs pourront vite et bien optimiser la couleur et caractériser leurs travaux dans tous les types de céramique, indépendamment du CDT.

Qu'il s'agisse de teinter une restauration à cœur ou en surface, avec les nouveaux colorants fluorescents VITA AKZENT Plus, la tâche est facile et relativement rapide.

Les colorants VITA AKZENT Plus sont proposés, en fonction des préférences de chacun et du domaine d'utilisation, sous forme de poudre/liquide ou de pâte prête à l'emploi.

Les Body Stains et la Glaze sont également livrables en spray pour une application régulière et sans risque de perte sur des surfaces assez étendues. Le nouvel embout vaporisateur sécurise la précision d'application.

Avantages

Pour tous les types de céramique dentaire - céramiques à stratifier et céramiques à presser, blocs de céramique feldspathique comme par ex. VITABLOCS ou bien encore les restaurations monolithiques. Le produit est conçu pour toutes les céramiques dentaires et pour tous les CDT.

Disponible en trois conditionnements

POWDER:

Pour une flexibilité et une rentabilité sans limite.

PASTE:

Pâtes prêtes à l'emploi d'une consistance constante et d'une pigmentation homogène.

SPRAY:

Lasures et glaçures prêtes à l'emploi, faciles à appliquer.

VITA AKZENT® Plus coffrets

VITA AKZENT® Plus



**VITA AKZENT® Plus POWDER KIT
BAPK**

Quantité	Contenu	Matériau
14	3 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01 - ES14
5	3 g	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	5 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		Plaque de mélange VITA AKZENT Plus, y compris disque de teintes
1		Spatule en verre VITA pour colorants
1		Cuiller dose, 0,1 ml / Spatule de mélange 2 faces
1		Pinceau n° 3 a $\langle \rangle$ e



**VITA AKZENT® Plus PASTE KIT
BAPKP**

Quantité	Contenu	Matériau
14	4 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01 - ES14
5	4 g	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE
1		VITA AKZENT Plus plaquette de couleurs échantillons
1		Plaque de mélange VITA AKZENT Plus en verre cristal (70 x 95 mm)
1		Spatule en verre VITA pour colorants
1		Pinceau n° 3 a $\langle \rangle$ e



**VITA AKZENT® Plus SPRAY KIT
BAPKSV1**

Quantité	Contenu	Matériau
5	75 ml	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		VITA AKZENT Plus plaquette de couleurs échantillons

VITA AKZENT® Plus articles
VITA AKZENT® Plus

VITA AKZENT Plus BODY STAINS, 3 g (Powder) / 4 g (Paste) / 75 ml (Spray)

Désignation	N° art. 3 g (Powder)	N° art. 4 g (Paste)	N° art. 75 ml (Spray)
BS01	B505013	B505014	B5050175
BS02	B505023	B505024	B5050275
BS03	B505033	B505034	B5050375
BS04	B505043	B505044	B5050475
BS05	B505053	B505054	B5050575

Désignation	N° art.
VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY, 75 ml	B5051075
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray, 75 ml	B5052075

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS, 3 g (Powder) / 4 g (Paste)

Désignation	N° art. 3 g (Powder)	N° art. 4 g (Paste)
ES01	B505513	B505514
ES02	B505523	B505524
ES03	B505533	B505534
ES04	B505543	B505544
ES05	B505553	B505554
ES06	B505563	B505564
ES07	B505573	B505574
ES08	B505583	B505584
ES09	B505593	B505594
ES10	B505603	B505604
ES11	B505613	B505614
ES12	B505623	B505624
ES13	B505633	B505634
ES14	B505643	B505644

Désignation	N° art.
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 30 g	B5058130
VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE, 4 g	B505814
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 5 g	B505815
VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE, 4 g	B505824
VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER, 5 g	B505825
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE, 4 g	B505834
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER, 5 g	B505835
VITA AKZENT Plus POWDER FLUID, 20 ml	BAPF20
VITA AKZENT Plus PASTE FLUID, 15 ml	BAPPF15

VITA SPRAY-ON



Description du produit

VITA SPRAY-ON permet de vaporiser les opaques en poudre sur les infrastructures métalliques.

À l'aide d'un pistolet alimenté en air comprimé, on applique l'opaque en couche régulière. Les poudres opaques mélangées se conservent jusqu'à la fin dans les flacons de verre livrés.

Pour un raccordement à une aspiration, des gabarits de différents diamètres sont également fournis.

Avantages

- Gain de temps appréciable.
- Une couche d'opaque régulière et globalement très fine.
- Une adhérence parfaite de l'opaque sur les infrastructures métalliques.
- Une considérable économie en matériau.

VITA SPRAY-ON coffrets

VITA SPRAY-ON

VITA SPAY-ON Sortiment / Assortment
B101V3

Quantité	Contenu	Matériau
13		VITA SPRAY-ON Flacon en verre vide
1		VITA SPRAY-ON Flacon en verre vide, OP0
1		VITA SPRAY-ON Flacon en verre vide, OP1
1		VITA SPRAY-ON Flacon en verre vide, OP2
1		VITA SPRAY-ON Flacon en verre vide, OP3
1		VITA SPRAY-ON Flacon en verre vide, OP4
1		VITA SPRAY-ON Flacon en verre vide, OP5
1		VITA SPRAY-ON Flacon en verre vide, W0
1		Etiquette VITA classical A1-D4 (16 pièces)
1		VITA SPRAY-ON Couvrecles avec joints d'étanchéité, 6 pièces
1		VITA SPRAY-ON Pistolet vaporisateur avec capuchon
1		VITA SPRAY-ON Aiguille de recharge pour pistolet
1		VITA SPRAY-ON Porte-aiguilles en téflon, 2 pièces
1		Spatule en verre VITA pour colorants
1		VITA SPRAY-ON Double porte pistolet
1		VITA SPRAY-ON Tuyau d'air comprimé avec gaine tissu
1		VITA SPRAY-ON Tuyau de raccord en spirale
1	1000 ml	VITA SPRAY-ON Liquid
1	250 ml	VITA SPRAY-ON Indikator-Liquid
1	250 ml	VITA SPRAY-ON Flacon distributeur vide
1		VITA SPRAY-ON Marqueur (résistant à l'alcool)
1		VITA SPRAY-ON Mano détendeur complet avec support mural

VITA SPRAY-ON articles**VITA SPRAY-ON**

Désignation	N° art.
VITA SPRAY-ON Flacon en verre vide	B103
VITA SPRAY-ON Couvercles avec joints d'étanchéité, 6 pièces	B104
VITA SPRAY-ON Pistolet vaporisateur avec capuchon	B105N
VITA SPRAY-ON Aiguille de rechange pour pistolet	B106
VITA SPRAY-ON Mano détendeur complet avec support mural	B107N
VITA SPRAY-ON Double porte pistolet	B108
VITA SPRAY-ON Porte-aiguilles en téflon, 2 pièces	B109N
VITA SPRAY-ON Tuyau d'air comprimé avec gaine tissu	B110
VITA SPRAY-ON Tuyau de raccord en spirale	B111
VITA SPRAY-ON Liquid, 1000 ml	B112
VITA SPRAY-ON Indikator-Liquid, 250 ml	B113
VITA SPRAY-ON Flacon distributeur vide, 250 ml	B114
VITA SPRAY-ON Capuchon pour pistolet	B115N
VITA SPRAY-ON Marqueur (résistant à l'alcool)	B116
VITA SPRAY-ON Joints d'étanchéité pour câble adaptateur, 10 pièces	B210

Accessoires pour matériaux cosmétiques








Description du produit

Les accessoires pour la matériaux cosmétiques facilitent la mise en œuvre de ces matériaux.

Accessoires pour matériaux cosmétiques articles
Accessoires pour matériaux cosmétiques

Désignation		N° art.
Plateaux de cuisson G (boîte de 2 plateaux et de 20 tiges) 56 x 45 x 6 mm, avec 52 trous pour tiges à insérer		B009N
Supports de cuisson A avec une tige pour 1 couronne (ensemble de 6)		B011
Supports de cuisson B avec 2 tiges pour 2 couronnes (ensemble de 6)		B012
Supports de cuisson C pour dents à pivot (ensemble de 6)		B013
Ouate support de cuisson, 2 pièces		B017N
Supports de cuisson A+B+C pour molaires (ensemble de 6)		B018
Tiges à insérer pour plateaux de cuisson G (boîte de 50)		B023
Spatule en verre VITA pour colorants		B055
Ensemble de polissage VITA Karat contenant 5 g de pâte à polir diamantée, 20 disques de feutre diamanté, diam. 12 mm et 1 mandrin nickelé		B068
Pâte à polir diamantée VITA Karat, 5 g		B069
Disques de feutre diamanté VITA Karat, 20 pièces		B070
VITA MODISOL Crayon isolant avec deux embouts (pour isoler la céramique du plâtre)		B075N
Pinceau N° 1 de correction, en martre rouge		B085
Pinceau n° 3 pinceau de montage, en martre rouge		B087
Pinceau N° E 0 pinceau de maquillage		B093
Support de cuisson alvéolé W pour couronnes et bridges		B201N
Tiges de platine pour support de cuisson W, 6 pièces		B207N
Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE		B227

Désignation		N° art.
Coffret VITA de test au fil d'argent pour contrôler la température dans les fours à céramique, contient: 6 socles en céramique et 3 tiges d'argent d'une longueur de 70 mm et d'un diamètre de 1,5 mm		B230
Plaque de mélange VITA INTERNO en plastique (Ø 144 mm, avec creux) ohne Deckelbedruckung ohne Verpackung		B252
Plaque de mélange VITA AKZENT Plus en verre cristal (70 x 95 mm)		B255V1
Indicateur de couleur VITA TITANKERAMIK 3D-MASTER Opaque, Opaque Dentine, Dentine, Enamel, Translucent, Window		B264
Plaquette de couleurs VITA TITANKERAMIK INTENSIVE / GINGIVA IN1-IN10, G1-G2		B274IN
Plaquette de couleurs VITA TITANKERAMIK MARGIN / COLOR OPAQUE MARN, MAR1-MAR6, CO1-CO8		B274M
Plaquette de couleurs VITA TITANKERAMIK TRANSLUCENT / CERVICAL T1-T6, WIN, CE1-CE4		B274T
Indicateur de couleur VITA TITANKERAMIK classical Opaque, Opaque Dentine, Dentine, Enamel, Translucent, Window		B288
Pinceau plat pour PASTE OPAQUE		B297
Pinceau n° 3 a & e		B302
Embouts Stain Brush pour pinceau a & e n° 3/0, 5 pièces		B303
Pinceau n° 8 a & e		B304
Embouts pour pinceau a & e n° 8, 2 pièces		B305
Indicateur de couleurs VITA VM 7 3D-MASTER Base Dentine, Transpa Dentine, Enamel, Chroma Plus, Neutral, Window, Corrective		B310
Indicateur de couleurs VITA VM 9 3D-MASTER Base Dentine, Transpa Dentine, Enamel, Chroma Plus		B330
Indicateur de couleurs VITA VM 9 classical Base Dentine, Transpa Dentine, Enamel, Chroma Plus		B331
Indicateur de couleurs VITA VM 13 3D-MASTER Opaque, Sun Dentine, Base Dentine, Transpa Dentine, Enamel, Chroma Plus, Neutral, Window, Corrective, Color Opaque		B340
VITA Indicateur de couleurs VITA VM 13 classical Opaque, Base Dentine, Transpa Dentine, Enamel, Chroma Plus, Neutral, Window, Corrective, Color Opaque		B341
Indicateur de couleurs VITA VMK MASTER classical Opaque, Opaque Dentine, Dentine, Enamel, Wash Opaque, Translucent T4, WIN		B342
Indicateur de couleurs VITA VMK MASTER 3D-MASTER Opaque, Opaque Dentine, Dentine, Enamel, Wash Opaque, Translucent T4, WIN		B343

Désignation		N° art.
Indicateur de couleurs VITA VM 15 3D-MASTER Opaque, Base Dentine, Transpa Dentine, Enamel, Chroma Plus, Neutral, Window, Corrective		B350
Plaquette de couleurs VITA VM EFFECT CHROMA EC1-EC11		B414
Plaquette de couleurs VITA VM EFFECT ENAMEL / EFFECT PEARL EE1-EE11, EP1-EP3		B416
Plaquette de couleurs VITA VM PROFESSIONAL KIT SMALL EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, E02, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11		B419
Plaquette de couleurs VITA VM INDIVIDUAL Pour confectionner des pastilles de teinte personnalisées.		B423
Plaquette de couleurs VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T1-T8, OT1, PLT1		B431
Plaquette de couleurs VITA VMK MASTER MARGIN / GINGIVA MN, M1-M5, G1-G5, GOL, GOD		B432
Plaquette de couleurs VITA VMK MASTER DENTINE / MODIFIER / LUMINARY DM1-DM8, LM1-LM6		B433
Plaquette de couleurs VITA VMK MASTER STANDARD N1-N5, CE1-CE3, COR1, COR2		B434
Plaquette de couleurs VITA VM 9 ADD-ON ADD1 - ADD8		B435
VITA AKZENT Plus plaquette de couleurs échantillons		B436
Plaque de mélange VITA AKZENT Plus en plastique (Ø 144 mm avec creux)		B437
Plaquette de couleurs VITA VM GINGIVA / MARGIN G1-G5, GOL, GOD, M1-M9		B439
Plaquette de couleurs VITA VM EFFECT LINER / EFFECT OPAL / MAMELON EL1-EL6, E01-E05, MM1-MM3		B440
Plaquette de couleurs VITA VM 11 n° 1 MM1, MM3, SD1, SD2, SD3, EC1, EC5, EC11		B442
Plaquette de couleurs VITA VM 11 n° 2 E01, E02, E03, E05, EP1, EE1, EE3, EE5, EE7, EE8, EE9, EE11		B443
VITA INTERNO plaquette de couleurs échantillons		B444






Liquides pour matériaux cosmétiques










Description du produit

Liquides à sculpter pour une excellente tenue des masses au cours du montage.

Liquides pour matériaux cosmétiques articles
Liquides pour matériaux cosmétiques

Désignation		N° art.
VITA MODELLING LIQUID 30M, 250 ml Pour mélanger les masses dentine et émail avec une longue durée de sculpture - concerne les céramiques VITA se cuisant à plus de 900°C		B30M250
VITA MODELLING LIQUID 30M, 50 ml Pour mélanger les masses dentine et émail avec une longue durée de sculpture - concerne les céramiques VITA se cuisant à plus de 900°C		B30M50
VITA HIGH SILVER MODELLING LIQUID, 50 ml Liquide anti verdissement pour les alliages dont la teneur en argent dépasse 30%		BHSM50
VITA MODELLING FLUID, 250 ml Liquide à modeler standard pour mélanger les masses de céramique VITA VM 13, VMK Master et TITANKERAMIK		BMF250
VITA MODELLING FLUID, 50 ml Liquide à modeler standard pour mélanger les masses de céramique VITA VM 13, VMK Master et TITANKERAMIK		BMF50
VITA MODELLING FLUID RS, 250 ml Liquide à modeler spécial - prolonge le temps de sculpture Pour mélanger toutes les masses dentine, émail et les masses complémentaires. Sa consistance soyeuse autorise un long temps de mise en #uvre à l'état humide avec simultanément une bonne tenue. Il est donc idéal pour des restaurations assez volumineuses et des bridges à plusieurs éléments.		BMFRS250
VITA MODELLING FLUID RS, 50 ml Liquide à modeler spécial - prolonge le temps de sculpture Pour mélanger toutes les masses dentine, émail et les masses complémentaires. Sa consistance soyeuse autorise un long temps de mise en #uvre à l'état humide avec simultanément une bonne tenue. Il est donc idéal pour des restaurations assez volumineuses et des bridges à plusieurs éléments.		BMFRS50
VITA VM MODELLING LIQUID, 250 ml Liquide à modeler standard Pour mélanger les masses VITA VM 7, VM 9, VM 13 BASE DENTINE, TRANSPA DENTINE, ENAMEL et EFFECT		BML250N
VITA VM MODELLING LIQUID, 50 ml Liquide à modeler standard Pour mélanger les masses VITA VM 7, VM 9, VM 13 BASE DENTINE, TRANSPA DENTINE, ENAMEL et EFFECT		BML50N
VITA OPAQUE FLUID, 250 ml Pour mélanger les masses opaques et les masses bonder Pour mélanger les masses opaques des céramiques VITA VMK Master et TITANKERAMIK		BOF250

Désignation		N° art.
VITA OPAQUE FLUID, 50 ml Pour mélanger les masses opaques et les masses bonder Pour mélanger les masses opaques des céramiques VITA VMK Master et TITANKERAMIK		BOF50
VITA VM PASTE FLUID, 15 ml Pour modifier la consistance de OPAQUE PASTE et COLOR OPAQUE PASTE Pour mélanger les pâtes VITA VM 13 et VM 15 OPAQUE		BPF15V1
VITA PASTE OPAQUE LIQUID, 15 ml Pour modifier la consistance des masses opaques en pâte et les masses de bonder en pâte VITA		BPOL15
Isolant à dies VITA, 16 ml Isolant (céramique/plâtre) pour les céramiques VITA (sauf la céramique Titane)		BSI16
VITA VM 15 MODELLING LIQUID, 50 ml Liquide à modeler standard Pour mélanger les masses VITA VM 15 BASE DENTINE, TRANSPA DENTINE, ENAMEL et EFFECT		BV15ML50
VITA LOW FUSING MODELLING LIQUID, 50 ml liquide de mélange spécial pour la céramique basse fusion Liquide pour le mélange des VITA VM 11 TRANSPA DENTINE, SUN DENTINE, ENAMEL et les masses complémentaires		BVMLF50
VITA VM OPAQUE FLUID, 250 ml Pour mélanger opaque powder Pour mélanger les masses OPAQUE VITA VM 13 et VM 15		BVMOF250
VITA VM OPAQUE FLUID, 50 ml Pour mélanger opaque powder Pour mélanger les masses OPAQUE VITA VM 13 et VM 15		BVMOF50

Accessoires pour résine cosmétique



Description du produit

Les accessoires pour la résine cosmétique facilitent la mise en œuvre de ces matériaux.

Accessoires pour résine cosmétique articles

Accessoires pour résine cosmétique

Désignation	N° art.
Instrument à sculpter spécial VITA C+B n° 1, double extrémité	C003
Cuiller dose en plastique	C006

linge, en porcelaine avec couvercle

Désignation		Correspondance email	N° art. en porcelaine avec couvercle
noire		8	C014

Désignation	N° art.
Cuiller dose, 0,1 ml / Spatule de mélange 2 faces	C017
Bloc de mélange (bloc de 100 feuilles)	C100

VITA ZETA® HLC BOND

Système opaque-adhésif



Description du produit

VITA ZETA HLC BOND rose sert à recouvrir les rétentions ou les selles en métal, par ex. avec la technique des châssis métalliques.

Avantages

VITA ZETA HLC BOND rose fonctionne comme un adhésif et un opaque dans la liaison métal-résine.

Un "primer" supplémentaire est inutile.

Indications


Sert à recouvrir les rétentions ou les selles en métal, par ex. avec la technique des châssis métalliques.

VITA ZETA® HLC BOND masse supplémentaires
utilisable pour VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1-D4

VITA ZETA HLC BOND COLOR, 4 g

Désignation	N° art. 4 g
C012	C5BC0124

Désignation	N° art.
VITA ZETA HLC BOND LIQUID, 5 ml	C5BL5

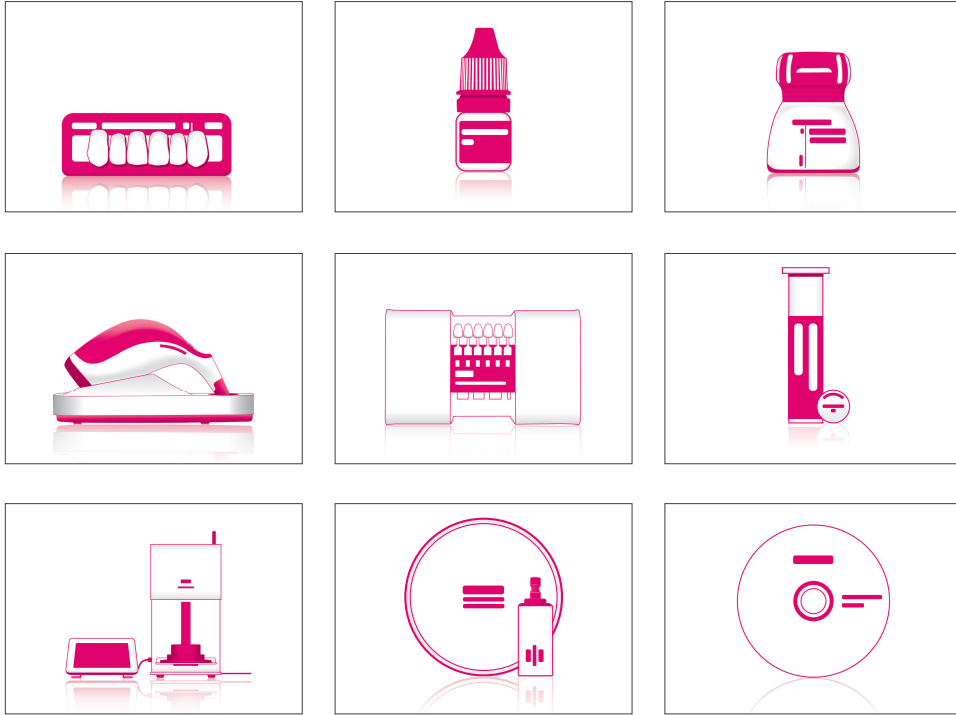

VITA shade, VITA made.

VITA

VITA SUPRINITY® PC

Céramique vitreuse. Une révolution.



Description du produit

Avec VITA SUPRINITY PC VITA propose depuis mai 2016 un produit faisant partie d'une nouvelle génération de céramique vitreuse. La céramique vitreuse innovante est dopée au dioxyde de zirconium (env. 10% en poids). Les cabinets dentaires et les laboratoires bénéficient ainsi d'une céramique de silicate de lithium très solide, dopée au dioxyde de zirconium (ZLS).

Avantages

Les bénéfices pour les cabinets dentaires et les laboratoires sont les suivants :

- sécurité élevée grâce à la matrice de céramique vitreuse dopée au dioxyde de zirconium
- solidité des bords optimisée par rapport au disilicate de lithium (unité Sirona MC XL)
- simplicité de la mise en oeuvre grâce à une bonne aptitude au polissage et une grande stabilité à la cuisson
- superbe esthétique du fait de la translucidité, de l'opalescence et de la fluorescence intégrées

Indications

De multiples possibilités (esthétiques) et donc un vaste champ d'applications :

- couronne postérieure
- couronne antérieure
- couronne implantaire
- facette

Couleurs

- VITA classical A1-D4®, très translucide
A1-HT, A2-HT, A3-HT, A3.5-HT, B2-HT, C2-HT, D2-HT
 - VITA classical A1-D4®, translucide
A1-T, A2-T, A3-T, A3.5-T, B2-T, C2-T, D2-T
 - VITA SYSTEM 3D-MASTER®, très translucide
0M1-HT, 1M1-HT, 1M2-HT, 2M2-HT, 3M2-HT, 4M2-HT
 - VITA SYSTEM 3D-MASTER®, translucide
0M1-T, 1M1-T, 1M2-T, 2M2-T, 3M2-T, 4M2-T
- Géométrie
LS-14

VITA SUPRINITY® PC coffrets**VITA SUPRINITY® PC VITA SYSTEM 3D-MASTER®****VITA SUPRINITY® PC Starter Set clinical VITA SYSTEM 3D-MASTER®
EC4S0STSETC3D**

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 0M1-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 1M1-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 1M2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 2M2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 3M2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 4M2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 0M1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 1M1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 1M2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 2M2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 3M2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 4M2-T, PC-14
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Support de cuisson alvéolé W pour couronnes et bridges
1		Tiges de platine pour support de cuisson W, 2 pièces
1		VITA SUPRINITY Polishing Set clinical

**VITA SUPRINITY® PC Starter Set technical VITA SYSTEM 3D-MASTER®
EC4S0STSETT3D**

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 0M1-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 1M1-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 1M2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 2M2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 3M2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 4M2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 0M1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 1M1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 1M2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 2M2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 3M2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 4M2-T, PC-14
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Support de cuisson alvéolé W pour couronnes et bridges
1		Tiges de platine pour support de cuisson W, 2 pièces
1		VITA SUPRINITY Polishing Set technical

VITA SUPRINITY® PC VITA classical A1-D4®**VITA SUPRINITY® PC Starter Set clinical VITA classical A1-D4®
EC4S0STSETC**

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3.5-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, B2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, C2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, D2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 0M1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A1-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3.5-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, B2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, C2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, D2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 0M1-HT, PC-14
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Support de cuisson alvéolé W pour couronnes et bridges
1		Tiges de platine pour support de cuisson W, 2 pièces
1		VITA SUPRINITY Polishing Set clinical



**VITA SUPRINITY® PC STARTER SET technical VITA classical A1-D4®
EC4S0STSETT**

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3.5-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, B2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, C2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, D2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 0M1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A1-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3.5-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, B2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, C2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, D2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 0M1-HT, PC-14
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Support de cuisson alvéolé W pour couronnes et bridges
1		Tiges de platine pour support de cuisson W, 2 pièces
1		VITA SUPRINITY Polishing Set technical

VITA SUPRINITY® PC articles**VITA SUPRINITY® PC VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, PC-14

Désignation	N° art. PC-14
4M2-HT, 5 pcs.	EC4S010123 12 x 14 x 18 mm
4M2-T, 5 pcs.	EC4S010023 12 x 14 x 18 mm
0M1-HT, 5 pcs.	EC4S010101 12 x 14 x 18 mm
0M1-T, 5 pcs.	EC4S010001 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, 5 pcs.	EC4S010104 12 x 14 x 18 mm
1M1-T, 5 pcs.	EC4S010004 12 x 14 x 18 mm
1M2-HT, 5 pcs.	EC4S010105 12 x 14 x 18 mm
1M2-T, 5 pcs.	EC4S010005 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, 5 pcs.	EC4S010109 12 x 14 x 18 mm
2M2-T, 5 pcs.	EC4S010009 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, 5 pcs.	EC4S010116 12 x 14 x 18 mm
3M2-T, 5 pcs.	EC4S010016 12 x 14 x 18 mm

VITA SUPRINITY® PC VITA classical A1-D4®

VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, PC-14

Désignation	N° art. PC-14
A3-HT, 5 pcs.	EC4S010132 12 x 14 x 18 mm
A1-HT, 5 pcs.	EC4S010130 12 x 14 x 18 mm
A1-T, 5 pcs.	EC4S010030 12 x 14 x 18 mm
A2-HT, 5 pcs.	EC4S010131 12 x 14 x 18 mm
A2-T, 5 pcs.	EC4S010031 12 x 14 x 18 mm
A3-T, 5 pcs.	EC4S010032 12 x 14 x 18 mm
A3.5-HT, 5 pcs.	EC4S010133 12 x 14 x 18 mm
A3.5-T, 5 pcs.	EC4S010033 12 x 14 x 18 mm
B2-HT, 5 pcs.	EC4S010136 12 x 14 x 18 mm
B2-T, 5 pcs.	EC4S010036 12 x 14 x 18 mm
C2-HT, 5 pcs.	EC4S010140 12 x 14 x 18 mm
C2-T, 5 pcs.	EC4S010040 12 x 14 x 18 mm
D2-HT, 5 pcs.	EC4S010143 12 x 14 x 18 mm
D2-T, 5 pcs.	EC4S010043 12 x 14 x 18 mm

VITA SUPRINITY® PC UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA SUPRINITY PC UNIVERSAL, PC-14

Désignation	N° art. PC-14
OM1-HT, 5 pcs.	EN1S04024445 12 x 14 x 18 mm
OM1-T, 5 pcs.	EN1S03024445 12 x 14 x 18 mm


VITA SUPRINITY® PC UNIVERSAL VITA classical A1-D4®

VITA SUPRINITY PC UNIVERSAL, PC-14

Désignation	N° art. PC-14
A1-HT, 5 pcs.	EN1S04364445 12 x 14 x 18 mm
A1-T, 5 pcs.	EN1S03364445 12 x 14 x 18 mm
A2-HT, 5 pcs.	EN1S04374445 12 x 14 x 18 mm
A2-T, 5 pcs.	EN1S03374445 12 x 14 x 18 mm
A3-HT, 5 pcs.	EN1S04384445 12 x 14 x 18 mm
A3-T, 5 pcs.	EN1S03384445 12 x 14 x 18 mm
A3.5-HT, 5 pcs.	EN1S04394445 12 x 14 x 18 mm
A3.5-T, 5 pcs.	EN1S03394445 12 x 14 x 18 mm
B2-HT, 5 pcs.	EN1S04424445 12 x 14 x 18 mm
B2-T, 5 pcs.	EN1S03424445 12 x 14 x 18 mm
C2-HT, 5 pcs.	EN1S04464445 12 x 14 x 18 mm
C2-T, 5 pcs.	EN1S03464445 12 x 14 x 18 mm
D2-HT, 5 pcs.	EN1S04494445 12 x 14 x 18 mm
D2-T, 5 pcs.	EN1S03494445 12 x 14 x 18 mm

VITA ENAMIC®

redéfinit la notion de résistance mécanique

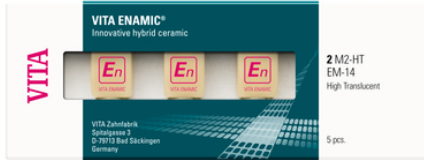

Description du produit

VITA ENAMIC est la première céramique dentaire hybride dotée d'une structure à double réseau. Le principal réseau de céramique au sein de ce matériau est renforcé par un réseau polymère et les deux réseaux s'imbriquent totalement. Cette céramique hybride innovante garantit pour la première fois non seulement une élasticité particulière mais aussi une énorme résistance mécanique après collage.

Avantages

Les bénéfices pour les cabinets dentaires et les laboratoires sont les suivants :

- une énorme résistance mécanique car les forces masticatoires sont absorbées
- prothèses non iatrogènes pour la substance dentaire car possibilité de réaliser des parois d'épaisseur réduite
- résultats très précis et particulièrement fi dèles aux détails
- fabrication en FAO rapide et rentable
- propriétés du matériau particulièrement proches de celles de la dent naturelle

Indications

Pour des reconstructions a minima ainsi que des couronnes postérieures :

- reconstruction en présence d'un espace limité
- traitement de petits défauts
- non-prep-veneer / facettes occlusales
- couronne postérieure
- couronne implantaire

Couleurs

- VITA SYSTEM 3D-MASTER®, très translucide
0M1-HT, 1M1-HT, 1M2-HT, 2M2-HT, 3M2-HT, 4M2-HT
- VITA SYSTEM 3D-MASTER®, translucide
0M1-T, 1M1-T, 1M2-T, 2M2-T, 3M2-T, 4M2-T

Produktvorteile (kurz)

- céramique hybride absorbant les forces masticatoires
- idéale pour des restaurations a minima
- permet d'obtenir des résultats très précis et de rentabiliser la fabrication en CFAO

VITA ENAMIC® coffrets

VITA ENAMIC® for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®



**VITA ENAMIC® STARTER SET clinical
EC4EMSTSETC**

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 0M1-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 0M1-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M1-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M1-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M2-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M2-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 2M2-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 2M2-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 3M2-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 3M2-HT, EM-14
1		VITA ENAMIC Polishing Set clinical

**VITA ENAMIC® Starter Set technical
EC4EMSTSETT**

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 0M1-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 0M1-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M1-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M1-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M2-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M2-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 2M2-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 2M2-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 3M2-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 3M2-HT, EM-14
1		VITA ENAMIC Polishing Set technical

VITA ENAMIC® articles**VITA ENAMIC® for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITA ENAMIC for CEREC/inLab, EM-10 / EM-14

Désignation	N° art. EM-10	N° art. EM-14
0M1-HT, 5 pcs.	EC40M1HTEM10 8 x 10 x 12 mm	EC40M1HTEM14 12 x 14 x 18 mm
0M1-T, 5 pcs.	-	EC40M1TEM14 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, 5 pcs.	EC41M1HTEM10 8 x 10 x 12 mm	EC41M1HTEM14 12 x 14 x 18 mm
1M1-T, 5 pcs.	-	EC41M1TEM14 12 x 14 x 18 mm
1M2-HT, 5 pcs.	EC41M2HTEM10 8 x 10 x 12 mm	EC41M2HTEM14 12 x 14 x 18 mm
1M2-T, 5 pcs.	-	EC41M2TEM14 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, 5 pcs.	EC42M2HTEM10 8 x 10 x 12 mm	EC42M2HTEM14 12 x 14 x 18 mm
2M2-T, 5 pcs.	-	EC42M2TEM14 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, 5 pcs.	EC43M2HTEM10 8 x 10 x 12 mm	EC43M2HTEM14 12 x 14 x 18 mm
3M2-T, 5 pcs.	-	EC43M2TEM14 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, 5 pcs.	EC4EM4282645 8 x 10 x 12 mm	EC4EM4282765 12 x 14 x 18 mm
4M2-T, 5 pcs.	-	EC4EM3282765 12 x 14 x 18 mm

VITA ENAMIC® IS for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC IS, IS-14L / IS-14S / IS-16L / IS-16S

Désignation	N° art. IS-14L	N° art. IS-14S	N° art. IS-16L	N° art. IS-16S
1M1-HT, 5 pcs.	-	-	EC4EM4069485 18 x 16 x 18 mm	EC4EM4069365 18 x 16 x 18 mm
1M1-T, 5 pcs.	EC4EM3069725 18 x 14 x 12 mm	EC4EM3069605 18 x 14 x 12 mm	-	-
1M2-HT, 5 pcs.	-	-	EC4EM4079485 18 x 16 x 18 mm	EC4EM4079365 18 x 16 x 18 mm
1M2-T, 5 pcs.	EC4EM3079725 18 x 14 x 12 mm	EC4EM3079605 18 x 14 x 12 mm	-	-
2M2-HT, 5 pcs.	-	-	EC4EM4129485 18 x 16 x 18 mm	EC4EM4129365 18 x 16 x 18 mm
2M2-T, 5 pcs.	EC4EM3129725 18 x 14 x 12 mm	EC4EM3129605 18 x 14 x 12 mm	-	-
3M2-HT, 5 pcs.	-	-	EC4EM4209485 18 x 16 x 18 mm	EC4EM4209365 18 x 16 x 18 mm
3M2-T, 5 pcs.	EC4EM3209725 18 x 14 x 12 mm	EC4EM3209605 18 x 14 x 12 mm	-	-
4M2-HT, 5 pcs.	-	-	EC4EM4289485 18 x 16 x 18 mm	EC4EM4289365 18 x 16 x 18 mm
4M2-T, 5 pcs.	EC4EM3289725 18 x 14 x 12 mm	EC4EM3289605 18 x 14 x 12 mm	-	-

VITA ENAMIC® UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC UNIVERSAL, EM-10 / EM-14

Désignation	N° art. EM-10	N° art. EM-14
0M1-HT, 5 pcs.	EN1EM4022645 8 x 10 x 12 mm	EN1EM4022765 12 x 14 x 18 mm
0M1-T, 5 pcs.	-	EN1EM3022765 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, 5 pcs.	EN1EM4062645 8 x 10 x 12 mm	EN1EM4062765 12 x 14 x 18 mm
1M1-T, 5 pcs.	-	EN1EM3062765 12 x 14 x 18 mm
1M2-HT, 5 pcs.	EN1EM4072645 8 x 10 x 12 mm	EN1EM4072765 12 x 14 x 18 mm
1M2-T, 5 pcs.	-	EN1EM3072765 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, 5 pcs.	EN1EM4122645 8 x 10 x 12 mm	EN1EM4122765 12 x 14 x 18 mm
2M2-T, 5 pcs.	-	EN1EM3122765 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, 5 pcs.	EN1EM4202645 8 x 10 x 12 mm	EN1EM4202765 12 x 14 x 18 mm
3M2-T, 5 pcs.	-	EN1EM3202765 12 x 14 x 18 mm

VITA ENAMIC® DISC

Désignation	N° art.
VITA ENAMIC DISC, 1M1-HT, Ø 98,4 x 18 mm, 1 pc.	ECDEM4981806
VITA ENAMIC DISC, 1M2-HT, Ø 98,4 x 18 mm, 1 pc.	ECDEM4981807
VITA ENAMIC DISC, 1M2-T, Ø 98,4 x 18 mm, 1 pc.	ECDEM3981807
VITA ENAMIC DISC, 2M2-HT, Ø 98,4 x 18 mm, 1 pc.	ECDEM4981812
VITA ENAMIC DISC, 2M2-T, Ø 98,4 x 18 mm, 1 pc.	ECDEM3981812
VITA ENAMIC DISC, 3M2-HT, Ø 98,4 x 18 mm, 1 pc.	ECDEM4981820
VITA ENAMIC DISC, 3M2-T, Ø 98,4 x 18 mm, 1 pc.	ECDEM3981820

VITABLOCS® Mark II

recul clinique sur des millions d'éléments



Description du produit

Les VITABLOCS Mark II sont des lingotins de céramique feldspathique monochromes qui sont parfaits pour la fabrication en CFAO d'inlays, d'onlays et de couronnes partielles. Ils s'intègrent chromatiquement très bien dans la substance dentaire résiduelle.

Avantages

Les bénéfices pour les cabinets dentaires et les laboratoires sont les suivants :

- des millions d'éléments posés
- plus de 25 ans de recul clinique
- très bonne intégration chromatique grâce à son mimétisme
- mise en oeuvre rapide car la restauration peut se poser directement après la fabrication en FAO et le polissage

Indications

Pour de petites reconstructions esthétiques :

- inlay
- onlay
- couronne partielle

Couleurs

- VITA SYSTEM 3D MASTER®
0M1C (pour I12, I14), 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 2M3C,
3M1C, 3M2C, 3M3C, 4M2C
- VITA classical
A1C*, A2C*, A3C*, A3.5C, A4C, B2C, B3C, C2C, C3C, D3C
*) Géométrie I8 disponible dans 3 couleurs seulement

VITABLOCS® Mark II articles**VITABLOCS® Mark II for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab, I8 / I10 / I12 / I14

Désignation	N° art. I8	N° art. I10	N° art. I12	N° art. I14
0M1C, 5 pcs.	-	-	EC40M1C125 10 x 12 x 15 mm	EC40M1C14 12 x 14 x 18 mm
1M1C, 5 pcs.	EC41M1C185 8 x 8 x 15 mm	EC41M1C105 8 x 10 x 15 mm	EC41M1C125 10 x 12 x 15 mm	EC41M1C14 12 x 14 x 18 mm
1M2C, 5 pcs.	EC41M2C185 8 x 8 x 15 mm	EC41M2C105 8 x 10 x 15 mm	EC41M2C125 10 x 12 x 15 mm	EC41M2C14 12 x 14 x 18 mm
2M1C, 5 pcs.	EC42M1C185 8 x 8 x 15 mm	EC42M1C105 8 x 10 x 15 mm	EC42M1C125 10 x 12 x 15 mm	EC42M1C14 12 x 14 x 18 mm
2M2C, 5 pcs.	EC42M2C185 8 x 8 x 15 mm	EC42M2C105 8 x 10 x 15 mm	EC42M2C125 10 x 12 x 15 mm	EC42M2C14 12 x 14 x 18 mm
2M3C, 5 pcs.	EC42M3C185 8 x 8 x 15 mm	EC42M3C105 8 x 10 x 15 mm	EC42M3C125 10 x 12 x 15 mm	EC42M3C14 12 x 14 x 18 mm
3M1C, 5 pcs.	EC43M1C185 8 x 8 x 15 mm	EC43M1C105 8 x 10 x 15 mm	EC43M1C125 10 x 12 x 15 mm	EC43M1C14 12 x 14 x 18 mm
3M2C, 5 pcs.	EC43M2C185 8 x 8 x 15 mm	EC43M2C105 8 x 10 x 15 mm	EC43M2C125 10 x 12 x 15 mm	EC43M2C14 12 x 14 x 18 mm
3M3C, 5 pcs.	EC43M3C185 8 x 8 x 15 mm	EC43M3C105 8 x 10 x 15 mm	EC43M3C125 10 x 12 x 15 mm	EC43M3C14 12 x 14 x 18 mm
4M2C, 5 pcs.	EC44M2C185 8 x 8 x 15 mm	EC44M2C105 8 x 10 x 15 mm	EC44M2C125 10 x 12 x 15 mm	EC44M2C14 12 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® Mark II for Rapid Layer Technology VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITABLOCS Mark II for RLT, I-40/19

Désignation	N° art. I-40/19
1M1C, 2 pcs.	EC41M1C140192 15,5 x 19 x 39 mm
1M2C, 2 pcs.	EC41M2C140192 15,5 x 19 x 39 mm
2M2C, 2 pcs.	EC42M2C140192 15,5 x 19 x 39 mm
3M2C, 2 pcs.	EC43M2C140192 15,5 x 19 x 39 mm

VITABLOCS® Mark II for CEREC®/inLab® VITA classical A1-D4®

VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab, I8 / I10 / I12 / I14

Désignation	N° art. I8	N° art. I10	N° art. I12	N° art. I14
A1C, 5 pcs.	EC4A1CI85 8 x 8 x 15 mm	EC4A1CI105 8 x 10 x 15 mm	EC4A1CI125 10 x 12 x 15 mm	EC4A1CI14 12 x 14 x 18 mm
A2C, 5 pcs.	EC4A2CI85 8 x 8 x 15 mm	EC4A2CI105 8 x 10 x 15 mm	EC4A2CI125 10 x 12 x 15 mm	EC4A2CI14 12 x 14 x 18 mm
A3.5C, 5 pcs.	-	EC4A35CI105 8 x 10 x 15 mm	EC4A35CI125 10 x 12 x 15 mm	EC4A35CI14 12 x 14 x 18 mm
A3C, 5 pcs.	EC4A3CI85 8 x 8 x 15 mm	EC4A3CI105 8 x 10 x 15 mm	EC4A3CI125 10 x 12 x 15 mm	EC4A3CI14 12 x 14 x 18 mm
A4C, 5 pcs.	-	EC4A4CI105 8 x 10 x 15 mm	EC4A4CI125 10 x 12 x 15 mm	EC4A4CI14 12 x 14 x 18 mm
B2C, 5 pcs.	-	EC4B2CI105 8 x 10 x 15 mm	EC4B2CI125 10 x 12 x 15 mm	EC4B2CI14 12 x 14 x 18 mm
B3C, 5 pcs.	-	EC4B3CI105 8 x 10 x 15 mm	EC4B3CI125 10 x 12 x 15 mm	EC4B3CI14 12 x 14 x 18 mm
C2C, 5 pcs.	-	EC4C2CI105 8 x 10 x 15 mm	EC4C2CI125 10 x 12 x 15 mm	EC4C2CI14 12 x 14 x 18 mm
C3C, 5 pcs.	-	EC4C3CI105 8 x 10 x 15 mm	EC4C3CI125 10 x 12 x 15 mm	EC4C3CI14 12 x 14 x 18 mm
D3C, 5 pcs.	-	EC4D3CI105 8 x 10 x 15 mm	EC4D3CI125 10 x 12 x 15 mm	EC4D3CI14 12 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® Mark II for KaVo VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITABLOCS Mark II for KaVo Everest, I12 / I14

Désignation	N° art. I12	N° art. I14
1M2C, 5 pcs.	ECK1M2CI12 10 x 12 x 15 mm	ECK1M2CI14 12 x 14 x 18 mm
2M2C, 5 pcs.	ECK2M2CI12 10 x 12 x 15 mm	ECK2M2CI14 12 x 14 x 18 mm
3M2C, 5 pcs.	ECK3M2CI12 10 x 12 x 15 mm	ECK3M2CI14 12 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® Mark II UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITABLOCS Mark II UNIVERSAL, I8 / I10 / I12 / I14

Désignation	N° art. I8	N° art. I10	N° art. I12	N° art. I14
0M1C, 5 pcs.	EN1M0202408 8 x 8 x 15 mm	EN1M0202360 8 x 10 x 15 mm	EN1M0202372 10 x 12 x 15 mm	EN1M0202384 12 x 14 x 18 mm
1M1C, 5 pcs.	EN1M0206408 8 x 8 x 15 mm	EN1M0206360 8 x 10 x 15 mm	EN1M0206372 10 x 12 x 15 mm	EN1M0206384 12 x 14 x 18 mm
1M2C, 5 pcs.	EN1M0207408 8 x 8 x 15 mm	EN1M0207360 8 x 10 x 15 mm	EN1M0207372 10 x 12 x 15 mm	EN1M0207384 12 x 14 x 18 mm
2M1C, 5 pcs.	EN1M0211408 8 x 8 x 15 mm	EN1M0211360 8 x 10 x 15 mm	EN1M0211372 10 x 12 x 15 mm	EN1M0211384 12 x 14 x 18 mm
2M2C, 5 pcs.	EN1M0212408 8 x 8 x 15 mm	EN1M0212360 8 x 10 x 15 mm	EN1M0212372 10 x 12 x 15 mm	EN1M0212384 12 x 14 x 18 mm
2M3C, 5 pcs.	EN1M0213408 8 x 8 x 15 mm	EN1M0213360 8 x 10 x 15 mm	EN1M0213372 10 x 12 x 15 mm	EN1M0213384 12 x 14 x 18 mm
3M1C, 5 pcs.	EN1M0219408 8 x 8 x 15 mm	EN1M0219360 8 x 10 x 15 mm	EN1M0219372 10 x 12 x 15 mm	EN1M0219384 12 x 14 x 18 mm
3M2C, 5 pcs.	EN1M0220408 8 x 8 x 15 mm	EN1M0220360 8 x 10 x 15 mm	EN1M0220372 10 x 12 x 15 mm	EN1M0220384 12 x 14 x 18 mm
3M3C, 5 pcs.	EN1M0221408 8 x 8 x 15 mm	EN1M0221360 8 x 10 x 15 mm	EN1M0221372 10 x 12 x 15 mm	EN1M0221384 12 x 14 x 18 mm
4M2C, 5 pcs.	EN1M0228408 8 x 8 x 15 mm	EN1M0228360 8 x 10 x 15 mm	EN1M0228372 10 x 12 x 15 mm	EN1M0228384 12 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® Mark II UNIVERSAL VITA classical A1-D4®

VITABLOCS Mark II UNIVERSAL, I8 / I10 / I12 / I14

Désignation	N° art. I8	N° art. I10	N° art. I12	N° art. I14
A1C, 5 pcs.	EN1M0236408 8 x 8 x 15 mm	EN1M0236360 8 x 10 x 15 mm	EN1M0236372 10 x 12 x 15 mm	EN1M0236384
A2C, 5 pcs.	EN1M0237408 8 x 8 x 15 mm	EN1M0237360 8 x 10 x 15 mm	EN1M0237372 10 x 12 x 15 mm	EN1M0237384 12 x 14 x 18 mm
A3C, 5 pcs.	EN1M0238408 8 x 8 x 15 mm	EN1M0238360 8 x 10 x 15 mm	EN1M0238372 10 x 12 x 15 mm	EN1M0238384 12 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® TriLuxe

pour un jeu de couleurs naturel



Description du produit

Il s'agit des lingotins VITABLOCS de la 2e génération. Ledégradé de couleur intégré permet une reproduction en mode numérique du jeu de couleurs naturel. Les VITABLOCS TriLuxe possèdent trois couches de saturation.

Avantages

Les bénéfices pour les cabinets dentaires et les laboratoires sont les suivants :

- Éprouvé des millions de fois avec la 2e génération
- jeu de couleurs naturel grâce au dégradé de couleur intégré
- mise en oeuvre rapide car la restauration peut se poser directement après la fabrication en FAO et le polissage
- reproduction simple en CFAO de l'esthétique individuelle

Indications

Pour des restaurations très esthétiques en secteur visible :

- couronne antérieure
- facette

Couleurs

- VITA SYSTEM 3D-MASTER®
1M2C, 2M2C et 3M2C
- VITA classical
A1C, A2C, A3C

VITABLOCS® TriLuxe articles

VITABLOCS® TriLuxe for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITABLOCS TriLuxe for CEREC/inLab, TRI-12 / TRI-14 / TRI-14/14

Désignation	N° art. TRI-12	N° art. TRI-14	N° art. TRI-14/14
1M2C, 5 pcs.	-	EC41M2CTRI14 12 x 14 x 18 mm	EC41M2CTR1414 14 x 14 x 18 mm
1M2C, 10 pcs.	EC41M2CTRI12 10 x 12 x 15 mm	-	-
2M2C, 5 pcs.	-	EC42M2CTRI14 12 x 14 x 18 mm	EC42M2CTR1414 14 x 14 x 18 mm
2M2C, 10 pcs.	EC42M2CTRI12 10 x 12 x 15 mm	-	-
3M2C, 5 pcs.	-	EC43M2CTRI14 12 x 14 x 18 mm	EC43M2CTR1414 14 x 14 x 18 mm
3M2C, 10 pcs.	EC43M2CTRI12 10 x 12 x 15 mm	-	-

VITABLOCS® TriLuxe for CEREC®/inLab® VITA classical A1-D4®

VITABLOCS TriLuxe for CEREC/inLab, TRI-12 / TRI-14

Désignation	N° art. TRI-12	N° art. TRI-14
A1C, 10 pcs.	EC4A1CTRI12 10 x 12 x 15 mm	-
A1C, 5 pcs.	-	EC4A1CTRI14 12 x 14 x 18 mm
A2C, 10 pcs.	EC4A2CTRI12 10 x 12 x 15 mm	-
A2C, 5 pcs.	-	EC4A2CTRI14 12 x 14 x 18 mm
A3C, 10 pcs.	EC4A3CTRI12 10 x 12 x 15 mm	-
A3C, 5 pcs.	-	EC4A3CTRI14 12 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® TriLuxe forte

pour un jeu de couleurs naturel



Description du produit

Il s'agit des lingotins VITABLOCS de la 2e génération. Ledégradé de couleur intégré permet une reproduction en mode numérique du jeu de couleurs naturel. Les VITABLOCS TriLuxe forte possèdent quatre couches de saturation.

Avantages

Les bénéfices pour les cabinets dentaires et les laboratoires sont les suivants :

- Éprouvé des millions de fois avec la 2e génération
- jeu de couleurs naturel grâce au dégradé de couleur intégré
- mise en oeuvre rapide car la restauration peut se poser directement après la fabrication en FAO et le polissage
- reproduction simple en CFAO de l'esthétique individuelle

Indications

Pour des restaurations très esthétiques en secteur visible :

- couronne antérieure
- facette

Couleurs

- VITA SYSTEM 3D-MASTER®
1M2C, 2M2C et 3M2C
- VITA classical
A1C, A2C, A3C, A3.5C

VITABLOCS® TriLuxe forte articles**VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC/inLab, TF-12 / TF-14 / TF-14/14

Désignation	N° art. TF-12	N° art. TF-14	N° art. TF-14/14
1M2C, 5 pcs.	EC41M2CTF125 10 x 12 x 15 mm	EC41M2CTF14 12 x 14 x 18 mm	EC41M2CTF1414 14 x 14 x 18 mm
2M2C, 5 pcs.	EC42M2CTF125 10 x 12 x 15 mm	EC42M2CTF14 12 x 14 x 18 mm	EC42M2CTF1414 14 x 14 x 18 mm
3M2C, 5 pcs.	EC43M2CTF125 10 x 12 x 15 mm	EC43M2CTF14 12 x 14 x 18 mm	EC43M2CTF1414 14 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® TriLuxe forte for Rapid Layer Technology VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITABLOCS TriLuxe forte for RLT, TF-40/19

Désignation	N° art. TF-40/19
1M2C, 2 pcs.	EC41M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm
2M2C, 2 pcs.	EC42M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm
3M2C, 2 pcs.	EC43M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm

VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC®/inLab® VITA classical A1-D4®

VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC/inLab, TF-12 / TF-14 / TF-14/14

Désignation	N° art. TF-12	N° art. TF-14	N° art. TF-14/14
A1C, 5 pcs.	EC4A1CTF125 10 x 12 x 15 mm	EC4A1CTF14 12 x 14 x 18 mm	EC4A1CTF1414 14 x 14 x 18 mm
A2C, 5 pcs.	EC4A2CTF125 10 x 12 x 15 mm	EC4A2CTF14 12 x 14 x 18 mm	EC4A2CTF1414 14 x 14 x 18 mm
A3.5C, 5 pcs.	EC4A35CTF125 10 x 12 x 15 mm	EC4A35CTF14 12 x 14 x 18 mm	EC4A35CTF1414 14 x 14 x 18 mm
A3C, 5 pcs.	EC4A3CTF125 10 x 12 x 15 mm	EC4A3CTF14 12 x 14 x 18 mm	EC4A3CTF1414 14 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® TriLuxe forte UNIVERSAL classical

VITABLOCS TriLuxe forte UNIVERSAL, TF-12 / TF-14 / TF-14/14

Désignation	N° art. TF-12	N° art. TF-14	N° art. TF-14/14
A1C, 5 pcs.	EN1MU2366845 10 x 12 x 15mm	EN1MU2366965 12 x 14 x 18mm	EN1MU2367085 14 x 14 x 18mm
A2C, 5 pcs.	EN1MU2376845 10 x 12 x 15mm	EN1MU2376965 12 x 14 x 18mm	EN1MU2377085 14 x 14 x 18mm
A3C, 5 pcs.	EN1MU2386845 10 x 12 x 15mm	EN1MU2386965 12 x 14 x 18mm	EN1MU2387085 14 x 14 x 18mm
A3.5C, 5 pcs.	EN1MU2396845 10 x 12 x 15mm	EN1MU2396965 12 x 14 x 18mm	EN1MU2397085 14 x 14 x 18mm

VITABLOCS® TriLuxe forte UNIVERSAL 3D-MASTER

VITABLOCS TriLuxe forte UNIVERSAL, TF-12 / TF-14 / TF-14/14

Désignation	N° art. TF-12	N° art. TF-14	N° art. TF-14/14
1M2C, 5 pcs.	EN1MU2076845 10 x 12 x 15mm	EN1MU2076965 12 x 14 x 18mm	EN1MU2077085 14 x 14 x 18mm
2M2C, 5 pcs.	EN1MU2126845 10 x 12 x 15mm	EN1MU2126965 12 x 14 x 18mm	EN1MU2127085 14 x 14 x 18mm
3M2C, 5 pcs.	EN1MU2206845 10 x 12 x 15mm	EN1MU2206965 12 x 14 x 18mm	EN1MU2207085 14 x 14 x 18mm

VITABLOCS RealLife®

pour un jeu de couleurs naturel



Description du produit

Il s'agit des lingotins VITABLOCS de la 2e génération. Ledégradé de couleur intégré permet une reproduction en mode numérique du jeu de couleurs naturel. Les VITABLOCS RealLife grâce à leur stratification en 3D reproduisent le dégradé de couleur curviligne entre la dentine et l'émail.

Avantages

Les bénéfices pour les cabinets dentaires et les laboratoires sont les suivants :

- Éprouvé des millions de fois avec la 2e génération
- jeu de couleurs naturel grâce au dégradé de couleur intégré
- mise en oeuvre rapide car la restauration peut se poser directement après la fabrication en FAO et le polissage
- reproduction simple en CFAO de l'esthétique individuelle

Indications

Pour des restaurations très esthétiques en secteur visible :

- couronne antérieure
- facette

Couleurs

- VITA SYSTEM 3D MASTER®
0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C et 3M2C

VITABLOCS RealLife® articles**VITABLOCS RealLife® for CEREC®/inLab®**

VITABLOCS RealLife for CEREC/inLab MC XL, RL-14/14

Désignation	N° art. RL-14/14
0M1C, 5 pcs.	EC40M1CRW1414 14 x 14 x 18 mm
1M1C, 5 pcs.	EC41M1CRW1414 14 x 14 x 18 mm
1M2C, 5 pcs.	EC41M2CRW1414 14 x 14 x 18 mm
2M1C, 5 pcs.	EC42M1CRW1414 14 x 14 x 18 mm
2M2C, 5 pcs.	EC42M2CRW1414 14 x 14 x 18 mm
3M2C, 5 pcs.	EC43M2CRW1414 14 x 14 x 18 mm

VITA YZ HT

Esthétique et précision anatomique VITA



Description du produit

VITA YZ HT est un dioxyde de zirconium hautement translucide qui compte tenu de sa grande résistance (env. 1.200 MPa) et de sa bonne conductibilité lumineuse est particulièrement indiqué pour les prothèses monolithiques. Il s'agit là d'une alternative économique aux alliages non précieux et à la céramo-métallique à incrustation partielle. Pour une reproduction exacte des couleurs il existe pour VITA YZ HT un système aux composants harmonisés.

Avantages

Les bénéfices pour les cabinets dentaires et les laboratoires sont les suivants :

- résultats précis grâce à une grande solidité des bords et des éléments frittés bien ajustés
- excellent potentiel esthétique grâce à une grande translucidité
- lingotins en couleurs dentaires pour une fabrication efficace de restaurations monolithiques
- prothèses non iatrogènes pour la substance dentaire car possibilité de réaliser des parois d'épaisseur réduite
- des composants bien étudiés les uns par rapport aux autres (par ex. liquides, colorants) pour une reproduction exacte des couleurs

Indications

Surtout pour des bridges monolithiques très résistants

- Bridges monolithiques en secteur antérieur et postérieur
- Prothèse en cas d'espace limité

Couleurs

- VITA YZ HT^{White} : version non teintée (blanc) pour coloration individuelle avec VITA YZ HT SHADE LIQUIDS
- VITA YZ HT^{Color} : version préteintée en 1M2, 2M2 et 3M2 (uniquement sous forme de DISC)
- VITA YZ HT^{Color} : version préteintée en A1, A2 et A3 (uniquement sous forme de DISC)

VITA YZ HT articles**VITA YZ HTWhite**

Désignation	N° art.
VITA YZ HTWhite for CEREC/inLab, YZ-20/19, 4 pcs. 20 x 19 x 15,5 mm	EC4Y14007804
VITA YZ HTWhite for CEREC/inLab, YZ-40/19, 2 pcs. 39 x 19 x 15,5 mm	EC4Y14008042
VITA YZ HTWhite for CEREC/inLab, YZ-65/25, 1 pc. 65 x 25 x 22 mm	EC4Y14008401
VITA YZ HTWhite for CEREC/inLab, YZ-55/19, 2 pcs. 55 x 19 x 19 mm	EC4Y14009842

VITA YZ HT DISC

Désignation	N° art.
VITA YZ HTWhite, Ø 98,4 mm, h 10 mm, 1 pc.	ECDY14981000
VITA YZ HTWhite, Ø 98,4 mm, h 12 mm, 1 pc.	ECDY14981200
VITA YZ HTWhite, Ø 98,4 mm, h 14 mm, 1 pc.	ECDY14981400
VITA YZ HTWhite, Ø 98,4 mm, h 16 mm, 1 pc.	ECDY14981600
VITA YZ HTWhite, Ø 98,4 mm, h 18 mm, 1 pc.	ECDY14981800
VITA YZ HTWhite, Ø 98,4 mm, h 20 mm, 1 pc.	ECDY14982000
VITA YZ HTWhite, Ø 98,4 mm, h 25 mm, 1 pc.	ECDY14982500
VITA YZ HTCColor 1M2, Ø 98,4 mm, h 10 mm, 1 pc.	ECDY24981007
VITA YZ HTCColor 2M2, Ø 98,4 mm, h 10 mm, 1 pc.	ECDY24981012
VITA YZ HTCColor 3M2, Ø 98,4 mm, h 10 mm, 1 pc.	ECDY24981020
VITA YZ HTCColor 1M2, Ø 98,4 mm, h 12 mm, 1 pc.	ECDY24981207
VITA YZ HTCColor 2M2, Ø 98,4 mm, h 12 mm, 1 pc.	ECDY24981212
VITA YZ HTCColor 3M2, Ø 98,4 mm, h 12 mm, 1 pc.	ECDY24981220
VITA YZ HTCColor 1M2, Ø 98,4 mm, h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981407
VITA YZ HTCColor 2M2, Ø 98,4 mm, h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981412
VITA YZ HTCColor 3M2, Ø 98,4 mm, h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981420
VITA YZ HTCColor 1M2, Ø 98,4 mm, h 16 mm, 1 pc.	ECDY24981607
VITA YZ HTCColor 2M2, Ø 98,4 mm, h 16 mm, 1 pc.	ECDY24981612
VITA YZ HTCColor 3M2, Ø 98,4 mm, h 16 mm, 1 pc.	ECDY24981620
VITA YZ HTCColor 1M2, Ø 98,4 mm, h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981807
VITA YZ HTCColor 2M2, Ø 98,4 mm, h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981812
VITA YZ HTCColor 3M2, Ø 98,4 mm, h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981820
VITA YZ HTCColor 1M2, Ø 98,4 mm, h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982007
VITA YZ HTCColor 2M2, Ø 98,4 mm, h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982012
VITA YZ HTCColor 3M2, Ø 98,4 mm, h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982020

Désignation	N° art.
VITA YZ HTColor 1M2, Ø 98,4 mm, h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982507
VITA YZ HTColor 2M2, Ø 98,4 mm, h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982512
VITA YZ HTColor 3M2, Ø 98,4 mm, h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982520
VITA YZ HTColor A1, Ø 98,4 mm, h 10 mm, 1 pc.	ECDY24981036
VITA YZ HTColor A2, Ø 98,4 mm, h 10 mm, 1 pc.	ECDY24981037
VITA YZ HTColor A3, Ø 98,4 mm, h 10 mm, 1 pc.	ECDY24981038
VITA YZ HTColor A1, Ø 98,4 mm, h 12 mm, 1 pc.	ECDY24981236
VITA YZ HTColor A2, Ø 98,4 mm, h 12 mm, 1 pc.	ECDY24981237
VITA YZ HTColor A3, Ø 98,4 mm, h 12 mm, 1 pc.	ECDY24981238
VITA YZ HTColor A1, Ø 98,4 mm, h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981436
VITA YZ HTColor A2, Ø 98,4 mm, h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981437
VITA YZ HTColor A3, Ø 98,4 mm, h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981438
VITA YZ HTColor A1, Ø 98,4 mm, h 16 mm, 1 pc.	ECDY24981636
VITA YZ HTColor A2, Ø 98,4 mm, h 16 mm, 1 pc.	ECDY24981637
VITA YZ HTColor A3, Ø 98,4 mm, h 16 mm, 1 pc.	ECDY24981638
VITA YZ HTColor A1, Ø 98,4 mm, h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981836
VITA YZ HTColor A2, Ø 98,4 mm, h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981837
VITA YZ HTColor A3, Ø 98,4 mm, h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981838
VITA YZ HTColor A1, Ø 98,4 mm, h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982036
VITA YZ HTColor A2, Ø 98,4 mm, h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982037
VITA YZ HTColor A3, Ø 98,4 mm, h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982038
VITA YZ HTColor A1, Ø 98,4 mm, h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982536
VITA YZ HTColor A2, Ø 98,4 mm, h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982537
VITA YZ HTColor A3, Ø 98,4 mm, h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982538

VITA YZ T

D'excellentes solutions pour infrastructures très résistantes



Description du produit

VITA YZ T autorise grâce à sa remarquable résistance (> 1.200 MPa) la fabrication d'infrastructures fines pour couronnes et bridges associée à une grande précision d'adaptation. Pour une reproduction exacte des couleurs il existe pour VITA YZ T un système aux composants harmonisés.

Avantages

Les bénéfices pour les cabinets dentaires et les laboratoires sont les suivants :

- résultats précis grâce à une grande solidité des bords et des éléments frittés bien ajustés
- sécurité élevée grâce à une extrême résistance et plus de 10 ans de recul clinique
- fabrication faisant gagner du temps grâce au frittage HighSpeed de 80 min
- composants bien étudiés les uns par rapport aux autres (par ex. céramique cosmétique) pour une reproduction exacte des couleurs

Indications

Pour des infrastructures ultra résistantes

- Chapes de couronnes antérieures et postérieures
- Infrastructures de bridges à plusieurs éléments en secteur antérieur et postérieur

Couleurs

- VITA YZ T^{White} : non teinté (blanc) à colorer avec les VITA YZ T COLORING LIQUIDS
- VITA YZ T^{Color*} : préteinté dans les couleurs/degrés de luminosité Color LL1 / light, LL2 / medium et LL3 / intense (uniquement dans les hauteurs 14 et 18 mm)

*) Les formes en blocs YZ T^{Color} ne sont disponibles qu'en LL1/light.

Avis

Une commande quantitative minimale est requise pour chacun des types de matériaux / géométries / couleurs.

VITA YZ T articles**VITA YZ TWhite**

Désignation	N° art.
VITA YZ TWhite for inLab, YZ-20/19, 4 pcs. 20 x 19 x 15,5 mm	EC4YW3007804
VITA YZ TWhite for inLab, YZ-40/19, 2 pcs. 39 x 19 x 15,5 mm	EC4YW3008042

VITA YZ TWhite for inLab, 2 pcs.

Désignation	N° art. 2 pcs.
YZ-55	EC4YW3008162 55 x 19 x 19 mm

Désignation	N° art.
VITA YZ TWhite for inLab, YZ-65/25, 1 pc. 65 x 25 x 22 mm	EC4YW3008401

VITA YZ TColor

Désignation	N° art.
VITA YZ TColor LL1/light for inLab, YZ-20/19, 4 pcs. 20 x 19 x 15,5 mm	EC4YW3617804
VITA YZ TColor LL1/light for inLab, YZ-40/19, 2 pcs. 39 x 19 x 15,5 mm	EC4YW3618042

VITA YZ TColor LL1/light for inLab, 2 pcs.

Désignation	N° art. 2 pcs.
YZ-55	EC4YW3618162 55 x 19 x 19 mm

Désignation	N° art.
VITA YZ TColor LL1/light for inLab, YZ-65/25, 1 pc. 65 x 25 x 22 mm	EC4YW3618401

VITA YZ T DISC

Désignation	N° art.
VITA YZ TWhite, Ø 98,4 mm, h 10 mm, 1 pc.	ECDYW3981000
VITA YZ TWhite, Ø 98,4 mm, h 12 mm, 1 pc.	ECDYW3981200
VITA YZ TWhite, Ø 98,4 mm, h 14 mm, 1 pc.	ECDYW3981400
VITA YZ TWhite, Ø 98,4 mm, h 16 mm, 1 pc.	ECDYW3981600
VITA YZ TWhite, Ø 98,4 mm, h 18 mm, 1 pc.	ECDYW3981800
VITA YZ TWhite, Ø 98,4 mm, h 20 mm, 1 pc.	ECDYW3982000
VITA YZ TWhite, Ø 98,4 mm, h 25 mm, 1 pc.	ECDYW3982500
VITA YZ TColor LL1/light, Ø 98,4 mm, h 14 mm, 1 pc.	ECDYC3981461
VITA YZ TColor LL2/medium, Ø 98,4 mm, h 14 mm, 1 pc.	ECDYC3981462
VITA YZ TColor LL3/intense, Ø 98,4 mm, h 14 mm, 1 pc.	ECDYC3981463
VITA YZ TColor LL1/light, Ø 98,4 mm, h 18 mm, 1 pc.	ECDYC3981861
VITA YZ TColor LL2/medium, Ø 98,4 mm, h 18 mm, 1 pc.	ECDYC3981862
VITA YZ TColor LL3/intense, Ø 98,4 mm, h 18 mm, 1 pc.	ECDYC3981863
VITA YZ TColor LL1/light, Ø 98,4 mm, h 20 mm, 1 pc.	ECDYC3982061
VITA YZ TColor LL2/medium, Ø 98,4 mm, h 20 mm, 1 pc.	ECDYC3982062
VITA YZ TColor LL3/intense, Ø 98,4 mm, h 20 mm, 1 pc.	ECDYC3982063

VITA Rapid Layer Technology

Des bridges en assemblage d'un clic de souris



Description du produit

Un processus de fabrication numérique permet de fabriquer un bridge 100% anatomique à partir d'une infrastructure en dioxyde de zirconium et d'une structure cosmétique en céramique feldspathique. Les structures sont techniquement adaptées l'une à l'autre afin que l'infrastructure anatomiquement réduite soutienne au mieux la partie cosmétique. L'assemblage des deux structures FAO s'effectue à l'aide d'un composite de scellement.

Avantages

- gain de temps et d'argent grâce à la fabrication numérique
- sécurité élevée et risque d'effritement minimisé grâce à la structure cosmétique monolithique
- procédé de fabrication simple en CFAO et assemblage sûr avec un composite

Indications

Pour des bridges d'assemblage 100% anatomiques avec jusqu'à 4 éléments en secteur postérieur

Couleurs

Lingotins VITA YZ HT

- YZ T^{White} : non teintée (blanc) à colorer avec les COLORING LIQUIDS
- YZ T^{Color} : préteintée dans la couleur/degré de luminosité Color LL 1 light

VITABLOCS-lingotins

- VITA SYSTEM 3D-MASTER® 1M1C (uniquement VITABLOCS Mark II), 1M2C, 2M2C et 3M2C

VITA Rapid Layer Technology articles**VITABLOCS® Mark II for Rapid Layer Technology VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITABLOCS Mark II for RLT, I-40/19

Désignation	N° art. I-40/19
1M1C, 2 pcs.	EC41M1CI40192 15,5 x 19 x 39 mm
1M2C, 2 pcs.	EC41M2CI40192 15,5 x 19 x 39 mm
2M2C, 2 pcs.	EC42M2CI40192 15,5 x 19 x 39 mm
3M2C, 2 pcs.	EC43M2CI40192 15,5 x 19 x 39 mm

VITABLOCS® TriLuxe forte for Rapid Layer Technology VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITABLOCS TriLuxe forte for RLT, TF-40/19

Désignation	N° art. TF-40/19
1M2C, 2 pcs.	EC41M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm
2M2C, 2 pcs.	EC42M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm
3M2C, 2 pcs.	EC43M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm

VITA CAD-Temp® monoColor
VITA CAD-Temp® monoColor DISC
VITA CAD-Temp® monoColor DISC for KaVo Everest®

D'excellentes solutions pour des prothèses transitoires



Description du produit

Le célèbre composite CFAO VITA CAD-Temp est un polymère d'acrylate réticulé et micro chargé. Le matériau est disponible dans les variantes monoColor et multiColor. Il sert à fabriquer en CFAO des prothèses transitoires.

Avantages

Les bénéfices pour les cabinets dentaires et les laboratoires sont les suivants :

- bonne pérennité (jusqu'à 3 ans en bouche) et résistance à l'abrasion
- rendu chromatique naturel grâce à de bonnes propriétés optiques
- fabrication rentable de provisoires en CFAO

Indications

pour des prothèses transitoires :

- transitopires pour le secteur postérieur

Couleurs

VITA SYSTEM 3D-MASTER® :

0M1T (pour CT-40), 1M2T, 2M2T, 3M2T

VITA CAD-Temp® monoColor,
VITA CAD-Temp® monoColor DISC,
VITA CAD-Temp® monoColor DISC for KaVo Everest® articles

VITA CAD-Temp® monoColor for CEREC®/inLab®

VITA CAD-Temp monoColor for CEREC/inLab, CT-40 / CT-55

Désignation	N° art. CT-40	N° art. CT-55
0M1T, 10 pcs.	EC40M1TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm	-
0M1T, 2 pcs.	EC40M1TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	-
1M2T, 10 pcs.	EC41M2TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm	-
1M2T, 2 pcs.	EC41M2TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	-
1M2T, 1 pc.	-	EC41M2TCT551 15,5 x 19 x 55 mm
2M2T, 10 pcs.	EC42M2TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm	-
2M2T, 2 pcs.	EC42M2TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	-
2M2T, 1 pc.	-	EC42M2TCT551 15,5 x 19 x 55 mm
3M2T, 10 pcs.	EC43M2TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm	-
3M2T, 2 pcs.	EC43M2TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	-
3M2T, 1 pc.	-	EC43M2TCT551 15,5 x 19 x 55 mm

VITA CAD-Temp® IS for CEREC/inLab

VITA CAD-Temp monoColor IS, IS-16L / IS-16S

Désignation	N° art. IS-16L	N° art. IS-16S
1M2T, 5 pcs.	EC4CB0079485 18 x 16 x 18 mm	EC4CB0079365 18 x 16 x 18 mm
2M2T, 5 pcs.	EC4CB0129485 18 x 16 x 18 mm	EC4CB0129365 18 x 16 x 18 mm
3M2T, 5 pcs.	EC4CB0209485 18 x 16 x 18 mm	EC4CB0209365 18 x 16 x 18 mm

VITA CAD-Temp® monoColor DISC


Désignation	N° art.
VITA CAD-Temp monoColor, 1M2T, Ø 98.4 mm, H 20 mm, 1 pc.	EC1M2TD98201
VITA CAD-Temp monoColor, 2M2T, Ø 98.4 mm, H 20 mm, 1 pc.	EC2M2TD98201
VITA CAD-Temp monoColor, 3M2T, Ø 98.4 mm, H 20 mm, 1 pc.	EC3M2TD98201

VITA CAD-Temp® monoColor DISC for KaVo Everest®

Désignation	N° art.
VITA CAD-Temp monoColor DISC for KaVo Everest, 1M2T, Ø 100 mm, H 20 mm, 1 pc.	ECK1M2T1001
VITA CAD-Temp monoColor DISC for KaVo Everest, 2M2T, Ø 100 mm, H 20 mm, 1 pc.	ECK2M2T1001
VITA CAD-Temp monoColor DISC for KaVo Everest, 3M2T, Ø 100 mm, H 20 mm, 1 pc.	ECK3M2T1001

VITA CAD-Temp® multiColor VITA CAD-Temp® multiColor DISC

D'excellentes solutions pour des prothèses transitoires

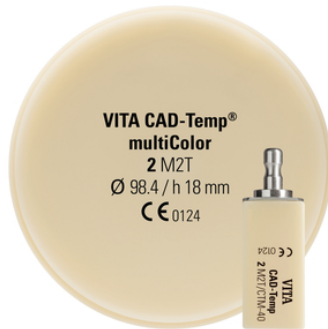

Description du produit

Le célèbre composite CFAO VITA CAD-Temp est un polymère d'acrylate réticulé et micro chargé. Le matériau est disponible dans les variantes monoColor et multiColor. Il sert à fabriquer en CFAO des prothèses transitoires.

Avantages

Les bénéfices pour les cabinets dentaires et les laboratoires sont les suivants :

- bonne pérennité (jusqu'à 3 ans en bouche) et résistance à l'abrasion
- rendu chromatique naturel grâce à de bonnes propriétés optiques
- fabrication rentable de provisoires en CFAO

Indications

pour des prothèses transitoires :

- transitoires pour le secteur antérieur

Couleurs

VITA SYSTEM 3D-MASTER® :
1M2T, 2M2T, 3M2T

**VITA CAD-Temp® multiColor,
VITA CAD-Temp® multiColor DISC articles**

VITA CAD-Temp® multiColor for CEREC®/inLab®

VITA CAD-Temp multiColor for CEREC/inLab, CTM-40 / CTM-85/40

Désignation	N° art. CTM-40	N° art. CTM-85/40
1M2T, 10 pcs.	EC41M2TM4010 15,5 x 19 x 39 mm	-
1M2T, 2 pcs.	EC41M2TM402 15,5 x 19 x 39 mm	-
1M2T, 1 pc.	-	EC41M2TM85401 18 x 40 x 85 mm
2M2T, 10 pcs.	EC42M2TM4010 15,5 x 19 x 39 mm	-
2M2T, 2 pcs.	EC42M2TM402 15,5 x 19 x 39 mm	-
2M2T, 1 pc.	-	EC42M2TM85401 18 x 40 x 85 mm
3M2T, 10 pcs.	EC43M2TM4010 15,5 x 19 x 39 mm	-
3M2T, 2 pcs.	EC43M2TM402 15,5 x 19 x 39 mm	-
3M2T, 1 pc.	-	EC43M2TM85401 18 x 40 x 85 mm

VITA CAD-Temp® multiColor DISC

Désignation	N° art.
VITA CAD-Temp multiColor, 1M2T, Ø 98.4 mm, H 18 mm, 1 pc.	EC1M2TMD98181
VITA CAD-Temp multiColor, 2M2T, Ø 98.4 mm, H 18 mm, 1 pc.	EC2M2TMD98181
VITA CAD-Temp multiColor, 3M2T, Ø 98.4 mm, H 18 mm, 1 pc.	EC3M2TMD98181

VITA CAD-Waxx



Description du produit

VITA CAD-Waxx est un polymère d'acrylate se consommant intégralement. Il sert à la fabrication assistée par ordinateur de maquettes pour la technique de pressée et de coulée ainsi qu'à la fabrication de gabarits de forage pour les prothèses implantaires.

Avantages

Les bénéfices pour les cabinets dentaires et les laboratoires sont les suivants :

- sculpture rapide et simple assistée par ordinateur
- reproduction anatomique exacte et adaptation remarquable
- coulée sans retassures et pressée dans pore

Indications

Pour la fabrication d'éléments pressés et de gabarits de forage

Couleurs

Les lingotins VITA CAD-Waxx sont transparents

VITA CAD-Waxx articles**VITA CAD-Waxx for inLab[®]**

Désignation	N° art.
VITA CAD-Waxx for inLab, CW-40/15, 10 pcs. 14 x 15 x 40 mm	EC4CW4010
VITA CAD-Waxx for inLab, CW-40/15, 2 pcs. 14 x 15 x 40 mm	EC4CW402

VITA CAD-Waxx DISC

Désignation	N° art.
VITA CAD-Waxx DISC, Ø 98.4 mm, H 20 mm, 1 pc.	ECCWD98201









Accessoires Machinable Materials



Description du produit

Les accessoires pour la Machinable Materials facilitent la mise en œuvre de ces matériaux.

Accessoires Machinable Materials articles**Accessoires Machinable Materials**

Désignation		N° art.
Plaquette de couleurs YZ COLORING LIQUID		B428V1
Boîte de 150 g de billes ZrO2 pour cuissons de frittage VITA In-Ceram YZ		E38002
Boîte unitaire réceptacle de frittage Ø 74 mm pour VITA ZYrcomat T		E38006
Boîte unitaire creuset de frittage Ø 80 mm pour VITA ZYrcomat T		E38010
Boîte complète réceptacle et creuset de frittage pour VITA ZYrcomat T		E38011
Boîte unitaire réceptacle de frittage grande Ø 92 mm pour VITA ZYrcomat T		E38012
Boîte unitaire creuset de frittage grande Ø 100 mm pour VITA ZYrcomat T		E38013
Boîte complète réceptacle et creuset de frittage grande pour VITA ZYrcomat T		E38014
Réceptacle de frittage MS pour VITA ZYRCOMAT 6000 MS		E38015
VITA YZ HT SHADE LIQUID Brush Set, Pinceau (Épaisseur 2 et 4), 2 pièces		EC0C13
VITA CEREC Diamond Discs, Ø 30 mm, 5 pcs.		ECDD5
VITA CEREC Propellant, 250 ml		ECPN
VITA CEREC Powder, 12 g		ECPO
VITA CEREC Embout de vaporisation pour Propellant		ECS
VITA Powder Scan Spray, 75 ml		ECSCAN75V1

Accessoires universellement



Description du produit



VITA Firing Paste

Pâte réfractaire prête à l'emploi destinée à la confection simple et rapide de supports de cuisson individuels. D'une consistance souple, crémeuse, sa mise en oeuvre est remarquable.

Les inlays, onlays, facettes et couronnes peuvent être fixés sans souci sur des tiges de platine ou directement sur le support de cuisson ou sur la ouate réfractaire.

Après la cuisson, le matériau s'élimine facilement de l'objet.

Accessoires universellement articles**Accessoires universellement**

Désignation		N° art.
Dose L noir, (1 godet 325 ml avec tamis et Pince en plastique)		E007
Dose S noir, (3 godets 90 ml avec tamis et Pince en plastique)		E008
VITA Firing Paste, grande boîte, 3 x 12 ml		EFP123V2
VITA Firing Paste, boîte stand, 12 ml		EFP12V2

VITA SIMULATE Preparation Material

Matériau photopolymérisable pour moignons



Description du produit

Le matériau de préparation VITA SIMULATE est un composite photopolymérisable pour la réalisation de moignons artificiels permettant de simuler la teinte de la dent préparée.

Le matériau s'utilise en tant qu'auxiliaire, notamment lors de la fabrication de restaurations translucides en céramo-céramique lorsque le rendu de la teinte subit une grosse influence chromatique du moignon. Le produit facilite la reproduction de la teinte dentaire, le prothésiste pouvant réajuster la teinte et éventuellement la corriger.

Avantages

Simplicité de mise en œuvre:

Simple à mettre en œuvre grâce à un excellent comportement à la sculpture

Reproduction sûre des teintes:

Permet de reproduire les teintes d'une manière sûre et simple en reproduisant la teinte de la dent préparée.

Indications

Matériau auxiliaire pour simuler la teinte du moignon afin d'obtenir des restaurations en céramo-céramique chromatiquement parfaites.

Couleurs



Disponible dans les 6 teintes: 0M1S, 1M1S, 2M3S, 3M2S, 4M3S, 5M3S en seringues de 4 g

VITA SIMULATE Preparation Material coffrets**VITA SIMULATE Preparation Material****VITA SIMULATE Preparation Material KIT
ESPKIT**

Quantité	Contenu	Matériau
6	4 g	VITA SIMULATE Preparation Material 0M1S, 1M1S, 2M3S, 3M2S, 4M3S, 5M3S
1	16 ml	VITA SIMULATE Insulation Liquid
1		Bâtonnet d application 15 x 10 pièces
1		Plaquette de couleurs VITA SIMULATE Preparation Material


VITA SIMULATE Preparation Material articles


VITA SIMULATE Preparation Material

Désignation		N° art.
Plaquette de couleurs VITA SIMULATE Preparation Material 0M1S-5M3S		B430
Bâtonnet d application 15 x 10 pièces		E017

VITA SIMULATE Preparation Material, 4 g



Désignation		N° art. 4 g
0M1S		E440314
1M1S		E440344
2M3S		E440404
3M2S		E440464
4M3S		E440544
5M3S		E440594

Désignation		N° art.
VITA SIMULATE Insulation Liquid, 16 ml Liquide d isolation		ESIL16

VITA ENAMIC® STAINS

Reproduction rapide et simple des nuances naturelles



Description du produit

Le VITA ENAMIC STAINS KIT comporte 6 colorants plus des accessoires pour la reproduction des nuances de teinte naturelles sur des restaurations en céramique hybride. La cohésion entre les colorants et la restauration s'effectue par voie de polymérisation. La glaçure chimique VITA ENAMIC GLAZE assure le scellement de la surface ce qui contribue à la pérennité et à la brillance des teintes dans le milieu buccal. La mise en oeuvre repose sur un principe simple en 5 étapes : conditionnement de la surface, mélange des teintes et application, polymérisation intermédiaire, application de la glaçure chimique et polymérisation finale.

Avantages

Mise en oeuvre rapide:

appliquer simplement les colorants VITA sur la restauration, polymériser et terminé ! Les caractérisations chromatiques des restaurations VITA ENAMIC sont donc rapides.

Grande individualité:

avec les 6 colorants VITA ENAMIC, les nuances chromatiques et les anomalies des dents naturelles se reproduisent avec finesse.

Simplicité de mise en oeuvre:

la saturation des colorants VITA ENAMIC se module en jouant sur le ratio poudre/liquide. Il est ainsi possible d'appliquer les colorants aussi bien de manière ponctuelle que sur toute la surface.

Indications

Les colorants VITA ENAMIC sont destinés aux caractérisations (occlusales/cervicales) des restaurations en céramique hybride VITA ENAMIC.

Couleurs

Sont proposés en six nuances white, corn, brown, khaki, blue et black.






Compatibilité du système

Pour la polymérisation intermédiaire et la polymérisation finale, les appareils de polymérisation suivants pour cabinet dentaire et laboratoire sont recommandés: Bluephase C8 (Ivoclar Vivadent), Astralis 10 (Ivoclar Vivadent), Valo LED (Ultradent), Speed Labolight (Hager & Werken), Heraflash (Heraeus Kulzer) et PolyLux PT (Dreve).

VITA ENAMIC® STAINS coffrets**VITA ENAMIC® STAINS****VITA ENAMIC® STAINS KIT
EENSTKIT**

Quantité	Contenu	Matériau
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 1 white
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 2 corn
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 3 brown
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 4 khaki
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 5 blue
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 6 black
1	20 ml	VITA ENAMIC STAINS LIQUID
1	20 ml	VITA ENAMIC GLAZE
1	50 ml	VITA VM LC CLEANER
2		Pinceau N° 1 de correction, en martre rouge
1	en porcelaine avec couvercle	linge noire
1		Spatule de mélange, double extrémité

VITA ENAMIC® STAINS articles**VITA ENAMIC® STAINS**

Désignation		N° art.
Spatule de mélange, double extrémité		C013
VITA ENAMIC STAIN 1, white, 2 g		EENST012
VITA ENAMIC STAIN 2, corn, 2 g		EENST022
VITA ENAMIC STAIN 3, brown, 2 g		EENST032
VITA ENAMIC STAIN 4, khaki, 2 g		EENST042
VITA ENAMIC STAIN 5, blue, 2 g		EENST052
VITA ENAMIC STAIN 6, black, 2 g		EENST062
VITA ENAMIC GLAZE, 20 ml incl. 1 Paquet avec 20 Microbrush applicateurs jetables		EENSTG20
VITA ENAMIC STAINS LIQUID, 20 ml		EENSTL20
Microbrush applicateurs jetables, 20 pièces		EENSTMB20

VITA ENAMIC® Polishing Set

Pour le pré-polissage et le lustrage de la céramique hybride VITA ENAMIC



Description du produit

Les coffrets de polissoirs VITA ENAMIC ont été mis au point pour un traitement de surface sûr, rentable et adapté à la céramique hybride, aussi bien au cabinet dentaire qu'au laboratoire. Les coffrets contiennent diverses pointes à polir pour le pré-polissage et le lustrage. Ces instruments assurent le polissage des surfaces occlusales, des cuspidés, des sillons et des points de contact des restaurations tout en préservant le matériau. Les instruments confèrent une remarquable brillance finale aux restaurations.

Avantages

Excellents résultats:

Ces instruments donnent une excellente qualité de surface, peu propice à l'accumulation de la plaque. Une concentricité précise, des granulométries et des tailles d'instruments bien harmonisées contribuent à la grande précision du polissage.

Manipulation simple et sûre:

Les instruments garantissent un fort retrait. La bonne manipulation et l'utilisation sans pâte à polir accélèrent et simplifient le travail. Les instruments clinical peuvent être stérilisés pour plus de sécurité.

Traitement non agressif:

Avec ces instruments spécialement conçus pour VITA ENAMIC, les retouches n'endommagent pas le matériau. Les risques de micro-fissures par exemple sont évités.

Contenu



VITA ENAMIC Polishing Set clinical:

Il comporte un total de 6 instruments pour contre-angle 3 instruments pour le pré-polissage et 3 pour le polissage haute brillance.

VITA ENAMIC Polishing Set technical:

Il comporte un total de 8 instruments pour pièce à main 4 instruments pour le pré-polissage et 4 pour le polissage haute brillance.

VITA ENAMIC® Polishing Set articles**VITA ENAMIC® Polishing Set**

Désignation		N° art.
VITA ENAMIC Polishing Set clinical		EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technical		EENPSETT
Instrument à polir, lentille, VI-EL16f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHEL16F6
Instrument à polir, lentille, VI-EL16m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHEL16M6
Instrument à polir, roue, VI-ER15f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHER15F6
Instrument à polir, roue, VI-ER15m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHER15M6
Instrument à polir, pointe, VI-ES5f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHES5F6
Instrument à polir, pointe, VI-ES5m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHES5M6
Instrument à polir, torpille, VI-ET6f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHET6F6
Instrument à polir, torpille, VI-ET6m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHET6M6
Instrument à polir, Brush, VI-EB14f Polissage haute brillance (gris), 3 pièce		ERWEB14F3
Instrument à polir, Brush, VI-EB14m Prépolissage (rose), 3 pièce		ERWEB14M3
Instrument à polir, cupule, VI-EC6f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERWEC6F6
Instrument à polir, cupule, VI-EC7m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERWEC7M6
Instrument à polir, lentille, VI-EL10f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERWEL10F6
Instrument à polir, lentille, VI-EL10m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERWEL10M6

VITA SUPRINITY® Polishing Set

Pour le pré-polissage et le lustrage de la VITA SUPRINITY PC



Description du produit

Les coffrets de polissage VITA SUPRINITY ont été conçus pour un traitement de surface des restaurations en céramique de silicate de lithium dopée au dioxyde de zirconium (ZLS), sûr, rentable et adapté au matériau, effectué au cabinet dentaire et au laboratoire. Les coffrets contiennent diverses pointes à polir pour le pré-polissage et le lustrage.

Ces instruments assurent le polissage des surfaces occlusales, des cuspides, des sillons et des zones de contact des restaurations tout en préservant le matériau. Les instruments confèrent une remarquable brillance finale aux restaurations.

Avantages

Excellents résultats:

Ces instruments donnent une excellente qualité de surface, peu propice à l'accumulation de la plaque. Une concentricité précise, des granulométries et des tailles d'instruments bien harmonisées garantissent la grande précision des résultats.

Manipulation simple et sûre:

les instruments assurent un retrait de matériau bien contrôlable avec simultanément une faible usure intrinsèque. La bonne manipulation et l'utilisation sans pâte à polir accélèrent et simplifient le travail. Les instruments clinical peuvent être stérilisés pour plus de sécurité.

Traitement non agressif:

Avec ces instruments spécialement conçus pour VITA SUPRINITY PC, les retouches n'endommagent pas le matériau. Les éventuels risques de micro fissures par exemple sont réduits.

Contenu



VITA SUPRINITY Polishing Set clinical:

Il comporte un total de 6 instruments pour contre-angle 3 instruments pour le pré-polissage et 3 pour le polissage haute brillance.

VITA SUPRINITY Polishing Set technical:

Il comporte un total de 8 instruments pour pièce à main 4 instruments pour le pré-polissage et 4 pour le polissage haute brillance.

VITA SUPRINITY® Polishing Set articles**VITA SUPRINITY® Polishing Set**

Désignation		N° art.
VITA SUPRINITY Polishing Set clinical		ELSPSETC
VITA SUPRINITY Polishing Set technical		ELSPSETT
Instrument à polir, lentille, L16f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHL16F6
Instrument à polir, lentille, L16m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHL16M6
Instrument à polir, longpin, LPf Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHLPF6
Instrument à polir, longpin, LPm Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHLPM6
Instrument à polir, roue, R15f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHR15F6
Instrument à polir, roue, R15m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHR15M6
Instrument à polir, pointe, S5f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHS5F6
Instrument à polir, pointe, S5m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHS5M6
Instrument à polir, cupule, C6f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERWC6F6
Instrument à polir, cupule, C6m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERWC6M6
Instrument à polir, lentille, L10f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERWL10F6
Instrument à polir, lentille, L10m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERWL10M6
Instrument à polir, pointe, S4f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERWS4F6
Instrument à polir, pointe, S4m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERWS4M6

VITABLOCS® Guide 3D-MASTER®

Plaquette de teintes-échantillons de grande qualité pour définir la teinte des restaurations en VITABLOCS



Description du produit

A l'aide du VITABLOCS Guide3D MASTER avec dents-échantillons en céramique originale VITABLOCS Mark II, vous choisissez vite et bien le VITABLOC adéquat.

VITABLOCS® Guide 3D-MASTER® articles**VITABLOCS® Guide 3D-MASTER®**

Désignation	N° art.
VITABLOCS Guide 3D-M	B362

VITA YZ T COLORING LIQUIDS



Description du produit

Liquide pour la coloration complète ou partielle des infrastructures usinées en VITA YZ T avant le processus de frittage. VITA YZ T COLORING LIQUID est disponible dans 4 couleurs et conçu de manière à permettre la reproduction de toutes les couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1-D4 avec la céramique cosmétique VITA VM 9.

VITA YZ T COLORING LIQUIDS coffrets**VITA YZ T COLORING LIQUIDS****VITA YZ T COLORING LIQUID SET (Complete Set)
EZ0CZ500**

Quantité	Contenu	Matériau
1	100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID light/pale
1	100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID medium
1	100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID intense
1	100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID neutral
1		Arbeitsbehältnis 90 ml; light/pale
1		Arbeitsbehältnis 90 ml; medium
1		Arbeitsbehältnis 90 ml; intense
1		Arbeitsbehältnis 90 ml; neutral
1		Pince en plastique pour COLORING LIQUID
1		Plaquette de couleurs YZ COLORING LIQUID

**VITA YZ T COLORING LIQUID light/pale, 250 ml (One Color Set)
avec godet 90 ml
EZ0CZ67250**

Quantité	Contenu	Matériau
1	250 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID light/pale
1		Arbeitsbehältnis 90 ml; light/pale
1		Pince en plastique pour COLORING LIQUID

**VITA YZ T COLORING LIQUID medium, 250 ml (One Color Set)
avec godet 90 ml
EZ0CZ68250**

Quantité	Contenu	Matériau
1	250 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID medium
1		Arbeitsbehältnis 90 ml; medium
1		Pince en plastique pour COLORING LIQUID

VITA YZ T COLORING LIQUID intense, 100 ml (One Color Set)
avec godet 90 ml
EZ0CZ69100

Quantité	Contenu	Matériau
1	100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID intense
1		Arbeitsbehältnis 90 ml; intense
1		Pince en plastique pour COLORING LIQUID

VITA YZ T COLORING LIQUID neutral, 100 ml (One Color Set)
avec godet 90 ml
EZ0CZ84100

Quantité	Contenu	Matériau
1	100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID neutral
1		Arbeitsbehältnis 90 ml; neutral
1		Pince en plastique pour COLORING LIQUID

VITA YZ HT SHADE LIQUIDS



Description du produit

Liquides pour la coloration individuelle des restaurations monolithiques VITA YZ HT avant le frittage. VITA YZ HT SHADE LIQUIDS seront proposés en 7 couleurs VITA classical A1 – D4 et en 7 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER ainsi qu'en couleurs complémentaires pour la gencive, le collet et la zone émail.

VITA YZ HT SHADE LIQUIDS coffrets**VITA YZ HT SHADE LIQUID Starter Set classical
EZ0CC**


Quantité	Inhalt	Matériau
7	50 ml	A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
4	20 ml	Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
3	20 ml	Pink, Grey, Blue
1	10 ml	Indicator
1	50 ml	Stabilizer
2	Pinceau (Épaisseur 2 et 4)	Brush Set

**VITA YZ HT SHADE LIQUID Starter Set 3D-MASTER
EZ0C3D**

Quantité	Inhalt	Matériau
7	50 ml	1M1, 1M2, 2L1.5, 2M2, 3M2, 3M3, 4M2
4	20 ml	Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
3	20 ml	Pink, Grey, Blue
1	10 ml	Indicator
1	50 ml	Stabilizer
2	Pinceau (Épaisseur 2 et 4)	Brush Set

VITA YZ HT SHADE LIQUIDS articles**VITA YZ HT SHADE LIQUIDS**

Désignation		N° art.
VITA YZ HT SHADE LIQUID Starter Set 3D-MASTER, 1pc.		EZ0C3D
VITA YZ HT SHADE LIQUID Starter Set classical, 1 pc.		EZ0CC
VITA YZ HT SHADE LIQUID 1M1, 50 ml, 1 pc.		EZ0CY0650
VITA YZ HT SHADE LIQUID 1M2, 50 ml, 1 pc.		EZ0CY0750
VITA YZ HT SHADE LIQUID 2L1.5, 50 ml, 1 pc.		EZ0CY0850
VITA YZ HT SHADE LIQUID 2M2, 50 ml, 1 pc.		EZ0CY1250
VITA YZ HT SHADE LIQUID 3M2, 50 ml, 1 pc.		EZ0CY2050
VITA YZ HT SHADE LIQUID 3M3, 50 ml, 1 pc.		EZ0CY2150
VITA YZ HT SHADE LIQUID 4M2, 50 ml, 1 pc.		EZ0CY2850
VITA YZ HT SHADE LIQUID A1, 50 ml, 1 pc.		EZ0CY3650
VITA YZ HT SHADE LIQUID A2, 50 ml, 1 pc.		EZ0CY3750
VITA YZ HT SHADE LIQUID A3, 50 ml, 1 pc.		EZ0CY3850
VITA YZ HT SHADE LIQUID A3,5, 50 ml, 1 pc.		EZ0CY3950
VITA YZ HT SHADE LIQUID B2, 50 ml, 1 pc.		EZ0CY4250
VITA YZ HT SHADE LIQUID C2, 50 ml, 1 pc.		EZ0CY4650
VITA YZ HT SHADE LIQUID D2, 50 ml, 1 pc.		EZ0CY4950
VITA YZ HT SHADE LIQUID Pink, 20 ml, 1 pc.		EZ0CY7420
VITA YZ HT SHADE LIQUID Grey, 20 ml, 1 pc.		EZ0CY7520
VITA YZ HT SHADE LIQUID Blue, 20 ml, 1 pc.		EZ0CY7620
VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma A, 20 ml, 1 pc.		EZ0CY7720
VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma B, 20 ml, 1 pc.		EZ0CY7820
VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma C, 20 ml, 1 pc.		EZ0CY7920
VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma D, 20 ml, 1 pc.		EZ0CY8020
VITA YZ HT SHADE LIQUID Indicator, 10 ml, 1 pc.		EZ0CY8110
VITA YZ HT SHADE LIQUID Stabilizer, 50 ml, 1 pc.		EZ0CY8350

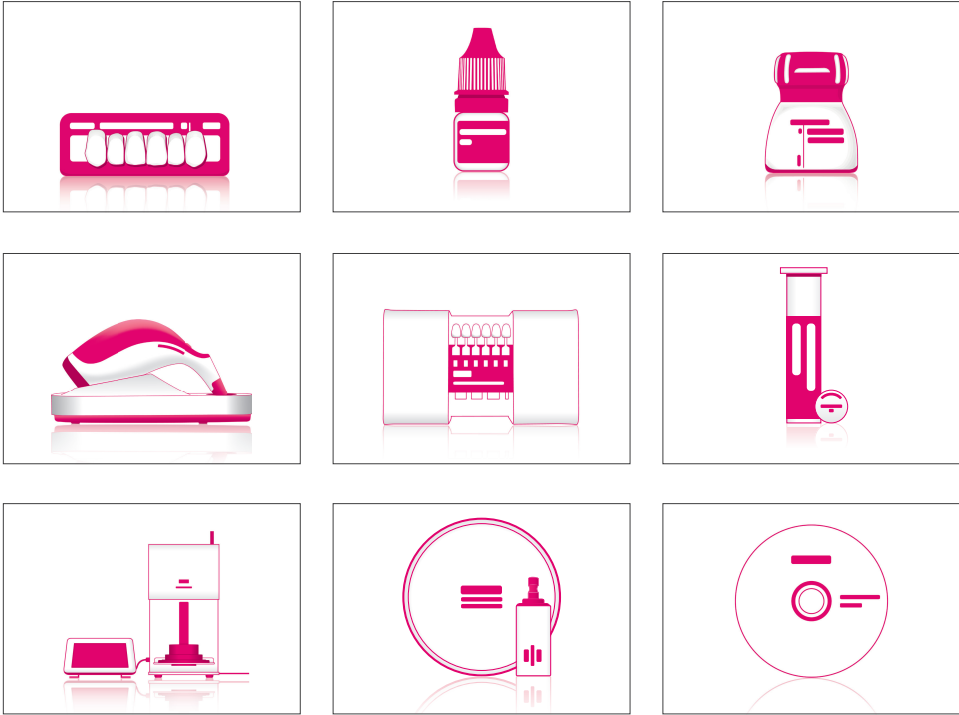

VITA shade, VITA made. **VITA**

VITAPM®9

Céramique pressée "All-in-One"- pour une mise en oeuvre plus sûre !



Description du produit

VITA PM 9 (Pressable Material) est une céramique pressée "All in One" qui a été conçue à partir de la célèbre céramique à structure fine VITA VM 9. VITA PM 9 couvre d'une manière rentable un vaste champ d'indications. Elle s'utilise aussi bien pour la technique de pressée sans infrastructures (inlays, onlays, facettes et couronnes) que pour la surpressée des infrastructures en dioxyde de zirconium.

Avantages

Fabrication rationnelle:

Le vaste champ d'applications de VITA PM 9 (Technique de pressée sans infrastructure et technique de surpressée) assure une fabrication rentable et sûre de diverses prothèses à partir d'un programme de pressée identique tout en permettant une gestion des stocks rationnelle.

Fiabilité clinique:

La céramique VITA PM 9 a été conçue sur la base de la céramique cosmétique à structure fine VITA VPM 9, mainte fois éprouvée, et garantit une très haute fiabilité clinique.

Jeu de couleurs naturel:

Les Pellets HT VITA PM 9 hautement translucides séduisent par leur comportement mimétique et garantissent donc un rendu de teinte très naturel.

Propriétés de la dent naturelle:

Elles se retrouvent dans la céramique VITA PM 9 par exemple au niveau de son homogénéité de surface, de sa grande résistance à la plaque et de son comportement proche de celui de l'émail.

Indications

Technique de pressée sans infrastructure:

Réalisation d'inlays, onlays, facettes et couronnes.

Technique de surpressée:

Surpressée des infrastructures en dioxyde de zirconium partiellement stabilisées à l'yttrium, teintées et non teintées.

Couleurs

Opaque-/Translucent-Pellets:

0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P et 3M3P

High Translucent-Pellets:

Teintes Dentine: 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P
Teintes Email: EN0P, EN1P, EN2P, ENDP, ENLP

VITAPM®9 coffrets

VITAPM®9



VITAPM®9 ACCESSORY KIT
EPM9ACCKIT

Quantité	Contenu	Matériau
1		Matériau de mise en revêtement VITA PM, 56 x 100 g
1		doseur 60 ml
1	900 ml	tement VITA PM
1	200 g	tement VITA PM, 3 parties
1		Pistons de pression à usage unique VITA PM, 50 pièces



VITAPM®9 HIGH TRANSLUCENT PELLET KIT
EPM9HTKIT

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 0M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 1M1P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 1M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 2M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 3M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, EN0P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, EN1P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, EN2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, ENDP-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, ENLP-HT
1		Plaquette de couleurs VITA PM 9 hautement translucide



**VITAPM®9 TRANSLUCENT PELLET KIT
EPM9TKIT**

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 0M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 0M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 1M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 1M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 2M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 2M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 2M3P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 3M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 3M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 3M3P-T
1		Plaquette de couleurs VITA PM 9 translucide

VITAPM®9 articles

VITAPM®9

Désignation	N° art.
VITA PM 9 Opak, 0M1P-O, 5 pcs.	EPM90M1PO
VITA PM 9 Translucent, 0M1P-T, 5 pcs.	EPM90M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 0M2P-HT, 5 pcs.	EPM90M2PHT
VITA PM 9 Opak, 0M2P-O, 5 pcs.	EPM90M2PO
VITA PM 9 Translucent, 0M2P-T, 5 pcs.	EPM90M2PT
VITA PM 9 High Translucent, 1M1P-HT, 5 pcs.	EPM91M1PHT
VITA PM 9 Opak, 1M1P-O, 5 pcs.	EPM91M1PO
VITA PM 9 Translucent, 1M1P-T, 5 pcs.	EPM91M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 1M2P-HT, 5 pcs.	EPM91M2PHT
VITA PM 9 Opak, 1M2P-O, 5 pcs.	EPM91M2PO
VITA PM 9 Translucent, 1M2P-T, 5 pcs.	EPM91M2PT
VITA PM 9 Opak, 2M1P-O, 5 pcs.	EPM92M1PO
VITA PM 9 Translucent, 2M1P-T, 5 pcs.	EPM92M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 2M2P-HT, 5 pcs.	EPM92M2PHT
VITA PM 9 Opak, 2M2P-O, 5 pcs.	EPM92M2PO
VITA PM 9 Translucent, 2M2P-T, 5 pcs.	EPM92M2PT
VITA PM 9 Opak, 2M3P-O, 5 pcs.	EPM92M3PO
VITA PM 9 Translucent, 2M3P-T, 5 pcs.	EPM92M3PT
VITA PM 9 Opak, 3M1P-O, 5 pcs.	EPM93M1PO
VITA PM 9 Translucent, 3M1P-T, 5 pcs.	EPM93M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 3M2P-HT, 5 pcs.	EPM93M2PHT
VITA PM 9 Opak, 3M2P-O, 5 pcs.	EPM93M2PO
VITA PM 9 Translucent, 3M2P-T, 5 pcs.	EPM93M2PT
VITA PM 9 Opak, 3M3P-O, 5 pcs.	EPM93M3PO
VITA PM 9 Translucent, 3M3P-T, 5 pcs.	EPM93M3PT
VITA PM 9 High Translucent, EN0P-HT, 5 pcs.	EPM9EN0PHT
VITA PM 9 High Translucent, EN1P-HT, 5 pcs.	EPM9EN1PHT
VITA PM 9 High Translucent, EN2P-HT, 5 pcs.	EPM9EN2PHT
VITA PM 9 High Translucent, ENDP-HT, 5 pcs.	EPM9ENDPHT
VITA PM 9 High Translucent, ENLP-HT, 5 pcs.	EPM9ENLPHT

Accessories for Press Ceramic



Description du produit

Piston à usage unique VITA PM

Boîte de 50 pistons à usage unique, diamètre de 12 mm pour les lingotins de 2 g ce qui convient à toutes les céramiques pressées. Il évite le fastidieux sablage des pistons en alox et prévient de par sa composition unique les micro fêlures au sein de l'objet pressé.

Système de mise en revêtement, 200 g

Coffret avec manchon de cylindre, socle et gabarit. Le manchon en silicone avec des marquages sectoriels visibles sur l'intrados permet de repérer vite et bien l'objet pressé et fait gagner du temps et du matériau lors du sablage.

Liquide de mélange pour matériaux de revêtement VITA PM






Liquide de mélange spécial pour matériau de revêtement VITA PM.

Matériau de revêtement VITA PM

Matériau à liant phosphate et sans graphite pour enfournement rapide (Speed), spécialement pour la céramique pressée VITA PM 9.

Accessories for Press Ceramic articles

Accessories for Press Ceramic

Désignation		N° art.
Pistons de pression à usage unique VITA PM, 50 pièces		E001
Système de mise en revêtement VITA PM, 3 parties, 100 g		E003
Système de mise en revêtement VITA PM, 3 parties, 200 g		E004
Plaquette de couleurs VITA PM 9 opaque 0M1P-3M3P		E005
Plaquette de couleurs VITA PM 9 hautement translucide 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P, EN0P, EN1P, EN2P, ENDP, ENLP		E009
Plaquette de couleurs VITA PM 9 translucide 0M1P-3M3P		E010
Liquide de mélange pour matériau de revêtement VITA PM, 900 ml		EEF900
Matériau de mise en revêtement VITA PM, 56 x 100 g		EEM100

Accessories for Press Ceramic



Description du produit

Piston à usage unique VITA PM

Boîte de 50 pistons à usage unique, diamètre de 12 mm pour les lingotins de 2 g ce qui convient à toutes les céramiques pressées. Il évite le fastidieux sablage des pistons en alox et prévient de par sa composition unique les micro fêlures au sein de l'objet pressé.

Système de mise en revêtement, 200 g

Coffret avec manchon de cylindre, socle et gabarit. Le manchon en silicone avec des marquages sectoriels visibles sur l'intrados permet de repérer vite et bien l'objet pressé et fait gagner du temps et du matériau lors du sablage.

Liquide de mélange pour matériaux de revêtement VITA PM






Liquide de mélange spécial pour matériau de revêtement VITA PM.


Matériau de revêtement VITA PM

Matériau à liant phosphate et sans graphite pour enfournement rapide (Speed), spécialement pour la céramique pressée VITA PM 9.

Accessories for Press Ceramic articles

Accessories for Press Ceramic

Désignation		N° art.
Pistons de pression à usage unique VITA PM, 50 pièces		E001
Système de mise en revêtement VITA PM, 3 parties, 100 g		E003
Système de mise en revêtement VITA PM, 3 parties, 200 g		E004
Plaquette de couleurs VITA PM 9 opaque 0M1P-3M3P		E005
Plaquette de couleurs VITA PM 9 hautement translucide 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P, EN0P, EN1P, EN2P, ENDP, ENLP		E009
Plaquette de couleurs VITA PM 9 translucide 0M1P-3M3P		E010
Liquide de mélange pour matériau de revêtement VITA PM, 900 ml		EEF900
Matériau de mise en revêtement VITA PM, 56 x 100 g		EEM100

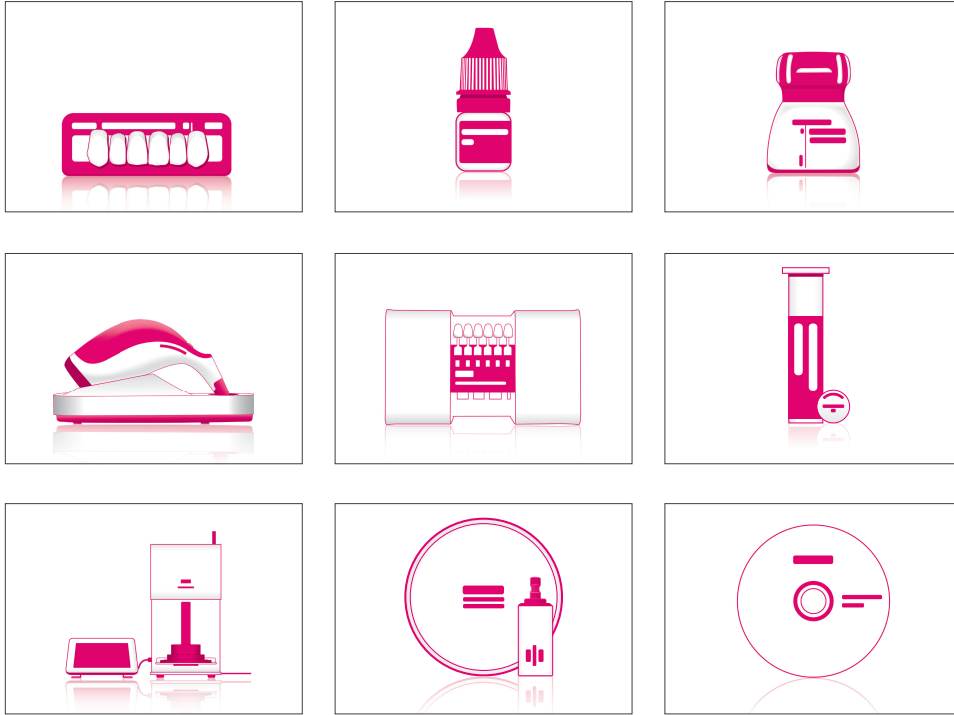

VITA shade, VITA made.

VITA

VITA VACUMAT® 6000 M

Four à céramique de prestige aux particularité surprenantes et à la fiabilité impressionnante



Description du produit

Avec le VITA VACUMAT 6000 M vous disposez d'un four entièrement automatique, piloté par micro processeur. Il est parfait pour toutes les cuissons de céramique dentaire. Il séduit par sa très grande qualité et son esthétique. Il offre une qualité de cuisson, une sécurité d'utilisation et un confort maximum. Avec sa construction optimisée sur le plan ergonomique, ce four est très peu encombrant. Deux plaques de refroidissement intégrées sécurisent la dépose des pièces cuites. Le design séduisant avec au choix une carrosserie en acier fin ou laquée anthracite donne de l'allure au poste de travail.

Avantages

- d'un très longue durée de vie du moufle de cuisson (made in Germany) et d'une électronique fiable pour des cuissons de qualité constante,
- de la fonction automatique évitant la condensation dans l'enceinte de cuisson (**VITA AntiCon**),
- de l'ajustage automatique à +/-1°C à chaque départ de programme (**VITA AutoAdjust**),
- fonction de nettoyage automatique (VITA SpecialClean),
- Avec une seule unité de commande **VITA vPad** vous pilotez jusqu'à **quatre fours**.
- Avec la **VITA MultiPump** alimentez jusqu'à **quatre fours** avec une seule pompe à vide - une totale innovation
- Grâce à **VITA Energy Efficiency** économisez jusqu'à 70% sur votre facture énergétique.
- **mode d'emploi intégré**
- **La surveillance automatique du cycle d'entretien**
- **La navigation intelligente dans les menus**

Avis

Pour utiliser les fours vous avez besoin d'une ou de plusieurs unités de commande VITA vPad.

VITA VACUMAT® 6000 M**Fonctions techniques**








- Programmes utilitaires et programmes de surveillance comme par ex. étalonnage automatique de la température à chaque départ de programme, surveillance de la température et du vide, compteur d'heures de fonctionnement pour le moufle de cuisson
- Protection contre les coupures de courant
- Réglage du taux de vide, réglage du vide préliminaire et principal
- Surveillance du lift, réglage de la vitesse du lift
- Possibilité de régler au choix la position du lift pour le pré-séchage et le refroidissement lent
- Refroidissement rapide à la température d'attente

Données techniques	
Largeur	230 mm
Profondeur	330 mm
Hauteur	444 mm
Poids	13 kg (laqué), 15 kg (acier fin)
Carrosserie	2 versions : acier fin et acier laqué couleur anthracite
Diamètre de l'enceinte de chauffe	90 mm
Hauteur de l'enceinte de chauffe	55 mm
Température de l'enceinte de chauffe	max. 1200 °C
Alimentation électrique	230 Volt AC, 50 Hz ou 100/110 Volt AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée	max. 1,5 kW
Classification	Classe de protection 1

Accessories (can be purchased separately):


- Programme FDS (Firing Data System) - logiciel PC pour la gestion et l'archivage des données de cuisson.
- pour piloter plusieurs fours (à partir de 2 fours), 1 Switchbox est nécessaire (N° art. D47009). Cette boîte d'alimentation est prévue pour raccordement de 4 fours au maximum.
- La pompe à vide (230 V) dans un caisson d'insonorisation.
- Des caches latéraux en 6 teintes permettent de personnaliser le four VITA VACUMAT 6000 M.
- VITA MultiPump alimentez jusqu'à quatre fours avec une seule pompe à vide.
- Ensemble de numéros (N° 1-4)

VITA VACUMAT® 6000 M articles
VITA VACUMAT® 6000 M

Désignation		N° art.
VITA VACUMAT 6000 M laqué (230 V) * Accessoires 1 Socle de cuisson 1 câble de branchement au réseau électrique 1 câble de branchement à l'unité de commande VITA vPad 1 boîte de supports de cuisson A+B+C 1 boîte de plateaux de cuisson G 1 Pince à four (25 cm) 1 LED colonne de signalisation à monter 1 tuyau de vide 1 Mode d'emploi		DV6000M220
VITA VACUMAT 6000 M acier fin (230 V) * Accessoires 1 Socle de cuisson 1 câble de branchement au réseau électrique 1 câble de branchement à l'unité de commande VITA vPad 1 boîte de supports de cuisson A+B+C 1 boîte de plateaux de cuisson G 1 Pince à four (25 cm) 1 LED colonne de signalisation à monter 1 tuyau de vide 1 Mode d'emploi		DV6000ME220
VITA VACUMAT 6000 M, laqué bleu, 230 V * Accessoires 1 Socle de cuisson 1 câble de branchement au réseau électrique 1 câble de branchement à l'unité de commande VITA vPad 1 boîte de supports de cuisson A+B+C 1 boîte de plateaux de cuisson G 1 Pince à four (25 cm) 1 LED colonne de signalisation à monter 1 tuyau de vide 1 Mode d'emploi		DV6000MHB220
VITA VACUMAT 6000 M, laqué rouge, 230 V * Accessoires 1 Socle de cuisson 1 câble de branchement au réseau électrique 1 câble de branchement à l'unité de commande VITA vPad 1 boîte de supports de cuisson A+B+C 1 boîte de plateaux de cuisson G 1 Pince à four (25 cm) 1 LED colonne de signalisation à monter 1 tuyau de vide 1 Mode d'emploi		DV6000MKR220
VITA VACUMAT 6000 M, laqué blanc, 230 V * Accessoires 1 Socle de cuisson 1 câble de branchement au réseau électrique 1 câble de branchement à l'unité de commande VITA vPad 1 boîte de supports de cuisson A+B+C 1 boîte de plateaux de cuisson G 1 Pince à four (25 cm) 1 LED colonne de signalisation à monter 1 tuyau de vide 1 Mode d'emploi		DV6000MRW220
VITA Vacumat 6000 M, laqué turquoise, 230 V * Accessoires 1 Socle de cuisson 1 câble de branchement au réseau électrique 1 câble de branchement à l'unité de commande VITA vPad 1 boîte de supports de cuisson A+B+C 1 boîte de plateaux de cuisson G 1 Pince à four (25 cm) 1 LED colonne de signalisation à monter 1 tuyau de vide 1 Mode d'emploi		DV6000MTB220
VITA Vacumat 6000 M, laqué noir, 230 V * Accessoires 1 Socle de cuisson 1 câble de branchement au réseau électrique 1 câble de branchement à l'unité de commande VITA vPad 1 boîte de supports de cuisson A+B+C 1 boîte de plateaux de cuisson G 1 Pince à four (25 cm) 1 LED colonne de signalisation à monter 1 tuyau de vide 1 Mode d'emploi		DV6000MTS220

VITA V60 i-Line®

Aucun compromis. Performant.

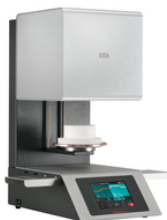

Description du produit

Aucun compromis. Performant

VITA est synonyme de très haute qualité et de maîtrise technique. Avec le VITA V60 i-Line VITA respecte fidèlement ces valeurs. Le VITA V60 i-Line se positionne sur deux aspects majeurs : l'excellence des cuissons à long terme et la convivialité d'utilisation. Pour la mise au point de ce four, deux facteurs ont joué un grand rôle : un ensemble de fonctions ramené à l'essentiel et un rapport qualité/prix imbattable.

Le VITA V60 i-Line séduira les utilisateurs par son écran tactile, son interface utilisateur intuitive et son célèbre et solide moufle en quartz VITA pour des cuissons parfaites. La carrosserie métallique ainsi que les tablettes de dépose intégrées sont extrêmement résistantes. Le VITA V60 i-Line a été conçu pour répondre à la demande des clients dans le monde entier et repose sur des dizaines d'années d'expérience du département recherche et développement VITA. Voilà donc un four répondant à toutes les attentes.

Avantages

- **Convivialité unique en son genre** grâce à l'écran tactile et le menu explicite, associés à une design minimaliste.
- **Installation & mise en marche** : pas de montage fastidieux - vous branchez, vous mettez en marche et vous commencez à travailler immédiatement !
- **Made in Germany** : ingénierie de pointe et qualité optimale.
- **La qualité VITA** : emploi de matériaux et composants de très haute qualité avec un seul objectif : la fiabilité sans aucun compromis !
- **Maintenance facile** : la conception modulaire, l'accès simple aux pièces d'usure et l'agencement sans concurrence facilitent la maintenance et diminuent les coûts.
- **Technique très performante** : une vraie bête de travail. Extrêmement robuste, protection intégrée contre les fluctuations de courant et moufle en quartz VITA particulièrement résistant.
- **Ramené à l'essentiel** : un concept de four classique et éprouvé - aucune fonction supplémentaire coûteuse. Cet appareil se concentre sur ses fonctions de base, fiabilité absolue.

VITA V60 i-Line®**Fonctions techniques**

- Maximum temperature accuracy (plus / minus 2 °C) for optimum firing results
- Convenient operation that saves you time, modest space requirements
- 2 firing object storage trays at the side
- Firing chamber fitted with high quality insulation material
- Quartz firing muffle
- Temperature sensor (platinum / rhodium-platinum)
- Automatic temperature calibration


Données techniques	
Largeur	260 mm
Profondeur	420 mm
Hauteur	570 mm
Poids	18 kg
Carrosserie	Tôle acier, thermolaquée
Diamètre de l'enceinte de chauffe	90 mm
Hauteur de l'enceinte de chauffe	55 mm
Température de cuisson maximale	Max. 1200°C
Alimentation électrique	230 Volt, 50 Hz ou 100/110 Volt, 50/60Hz
Puissance maximale absorbée	Max. 1,5 kW
Classification	Classe de sécurité 1

Accessories (can be purchased separately):

- Vacuum pump: 230 / 240 V, 50 / 60 Hz, 115 V, 50 / 60 Hz or 100 V, 50 / 60 Hz.
- FDS (firing data system) firing data administration program for PC use

VITA V60 i-Line® articles

VITA V60 i-Line®

Désignation		N° art.
<p>VITA V60 i-Line, 230 V * Accessories: 1 firing socket 1 power supply cable 1 operating manual 1 connection cable for the vacuum pump 1 vacuum tube 2 firing object storage trays at the side</p>		<p>DV60I220</p>

VITA MultiPump / Accessoires en option



Description du produit

VITA MultiPump (uniquement pour VITA New Generation)

pour l'alimentation jusqu'à quatre fours avec une seule pompe à vide.










À partir du second four en tant qu'accessoire pour la pompe à vide VITA à commander en plus. Utilisable uniquement en combinaison avec VITA vPad excellence. Compris dans l'ensemble de base : 2 câbles USB, tuyau de vide 10 m pour deux fours

Dimensions : 244,5 x 172,0 x 73,0 mm

Accessoires en option New Generation

Panneaux latéraux et VITA Switchbox

VITA MultiPump / Accessoires en option articles**Accessoires en option New Generation**

Désignation		N° art.
Jeu de caches latéraux (Teinte bleu) 2 caches (fixation magnétique) pour VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47002
Jeu de caches latéraux (Teinte vert menthe) 2 caches (fixation magnétique) pour VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47003
Jeu de caches latéraux (Teinte rose) 2 caches (fixation magnétique) pour VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47004
Jeu de caches latéraux (Teinte abricot) 2 caches (fixation magnétique) pour VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47005
Jeu de caches latéraux (Teinte blanc) 2 caches (fixation magnétique) Possibilité d écrire sur ces caches et de les utiliser comme bloc notes pour VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47006
Jeu de caches latéraux (Teinte gris foncé) 2 caches Set (fixation magnétique) pour VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47007
Ensemble de chiffres (fixation magnétique N° 1 - 4) Pour identifier les fours lors d un fonctionnement en réseau		D47008
Switchbox Nécessaire à partir du 2e four, pour piloter plusieurs fours. Possibilité de raccorder jusqu à 4 fours.		D47009
VITA MultiPump		D61000

Pompe à vide



Description du produit

Pompe à vide VITA dans un caisson insonorisé pour une alimentation en air comprimé stable et constante

Pompe à vide articles**Pompe à vide**

Désignation		N° art.
La pompe à vide (220 V)		DVPU220

VITA VACUMAT® 6000 MP

Cuissons et pressées fiables pour tous les matériaux du marché



Description du produit

Le VITA VACUMAT 6000 MP est conçu pour vous garantir des pressées fiables. Cette unité de pressée combi réunit tous les avantages d'un four de cuisson et de pressée moderne et fixe un nouveau standard en matière de compacité. Le VITA VACUMAT 6000 MP possède tous les programmes et fonctions du VITA VACUMAT 6000 M.

De plus, il peut presser toutes les céramiques à presser disponibles sur le marché et s'adapte aux cylindres les plus divers. La détection automatique de la quantité de lingotins enfournés prévient tout échec de la pressée et tout endommagement du moufle lié à un remplissage insuffisant (VITA PressControl).

Avantages

- d'une très longue durée de vie du moufle de cuisson (made in Germany) et d'une électronique fiable pour des cuissons de qualité constante,
- de la fonction automatique évitant la condensation dans l'enceinte de cuisson (**VITA AntiCon**),
- de l'ajustage automatique à $\pm 1^\circ\text{C}$ à chaque départ de programme (**VITA AutoAdjust**),
- fonction de nettoyage automatique (**VITA SpecialClean**),
- de la technique **VITA CPress** de pressée de la céramique,
- de la surveillance automatique du trajet de pressée et de la détection de la quantité de lingotins introduits par **VITA PressControl**,
- du refroidissement rapide contrôlé et du mode nuit pour économiser l'énergie (**VITA Energy Efficiency**).
- Avec une seule unité de commande **VITA vPad** vous pilotez jusqu'à **quatre fours**.
- Avec la **VITA MultiPump** alimentez jusqu'à **quatre fours** avec une seule pompe à vide - une totale innovation et un système breveté par VITA.
- Grâce à **VITA Energy Efficiency** économisez jusqu'à 70% sur votre facture énergétique.

Avis

Pour utiliser les fours vous avez besoin d'une ou de plusieurs unités de commande VITA vPad.

VITA VACUMAT® 6000 MP**Fonctions techniques**



- Programmes utilitaires et programmes de surveillance comme par ex. étalonnage automatique de la température à chaque départ de programme, surveillance de la température et du vide, compteur d'heures de fonctionnement pour le moufle de cuisson
- Protection contre les coupures de courant
- Réglage du taux de vide, réglage du vide préliminaire et principal
- Surveillance du lift, réglage de la vitesse du lift
- Possibilité de régler au choix la position du lift pour le pré-séchage et le refroidissement lent
- Refroidissement rapide à la température d'attente

Données techniques	
Largeur	230 mm
Profondeur	325 mm
Hauteur	630 mm
Poids	18,7 kg (laqué), 20,1 kg (acier fin)
Carrosserie	2 versions : acier fin et acier laqué couleur anthracite
Diamètre de l'enceinte de chauffe	90 mm
Hauteur de l'enceinte de chauffe	55 mm
Température de l'enceinte de chauffe	max. 1200 °C
Alimentation électrique	230 Volt AC, 50 Hz ou 100/110 Volt AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée	max. 1,5 kW
Classification	Classe de protection 1

Accessories (can be purchased separately):

- Programme FDS (Firing Data System) - logiciel PC pour la gestion et l'archivage des données de cuisson.
- pour piloter plusieurs fours (à partir de 2 fours), 1 Switchbox est nécessaire (N° art. D47009). Cette boîte d'alimentation est prévue pour raccordement de 4 fours au maximum.
- La pompe à vide (230 V) dans un caisson d'insonorisation
- Des caches latéraux en 6 teintes permettent de personnaliser le four VITA VACUMAT 6000 MP.
- VITA MultiPump alimentez jusqu'à quatre fours avec une seule pompe à vide.
- Ensemble de numéros (N° 1-4)

VITA VACUMAT® 6000 MP articles**VITA VACUMAT® 6000 MP**

Désignation		N° art.
<p>VITA VACUMAT 6000 MP laqué (230 V) * Accessoires 3 socles de cuisson et 2 jeux de pressée disque 1 câble de branchement au réseau électrique 1 câble de branchement à l'unité de commande VITA vPad 1 boîte de supports de cuisson A+B+C 1 boîte de plateaux de cuisson G 1 Pince à four (25 cm) 1 LED colonne de signalisation à monter 1 régulateur de pression pour le montage sur la pompe à vide 1 tuyau à air comprimé, tuyau de vide 1 Mode d'emploi 1 VITA PM 9 SAMPLE KIT</p>		<p>DV6000MP220</p>
<p>VITA VACUMAT 6000 MP acier fin (230 V) * Accessoires 3 socles de cuisson et 2 jeux de pressée disque 1 câble de branchement au réseau électrique 1 câble de branchement à l'unité de commande VITA vPad 1 boîte de supports de cuisson A+B+C 1 boîte de plateaux de cuisson G 1 Pince à four (25 cm) 1 LED colonne de signalisation à monter 1 régulateur de pression pour le montage sur la pompe à vide 1 tuyau à air comprimé, tuyau de vide 1 Mode d'emploi 1 VITA PM 9 SAMPLE KIT</p>		<p>DV6000MPE220</p>

VITA ZYRCOMAT® 6000 MS

Four de frittage High Speed Premium



Description du produit

Le VITA ZYRCOMAT 6000 MS est conçu pour toutes les cuissons de frittage à haute température de tous les matériaux d'infrastructure en céramique tels que ZrO₂ et Al₂O₃ et présente lui aussi le nouveau design primé de la VITA "New Generation". Avec la toute dernière technologie de cuisson, le four de frittage HighSpeed garantit des résultats de très grande qualité et un frittage non agressif pour les matériaux, avec une température de refroidissement à 400°C selon trois modes au choix. En mode HighSpeed, il est possible de fritter des bridges de 1 à 9 éléments en 80 mn. Le four peut être commandé avec les unités de commande VITA vPad confort, VITA vPad excellence ou VITA vPad clinical. Avec des atouts tels que sa compacité, son ergonomie moderne et son fonctionnement silencieux, le VITA ZYRCOMAT 6000 MS est le produit parfait pour tous les utilisateurs et garantit un travail "Smile in One Day". **Champ d'applications** Le ZYRCOMAT 6000 MS est conçu pour toutes les cuissons de frittage en atmosphère, à haute température, sur une courte et longue durée, du dioxyde de zirconium et de l'oxyde d'aluminium.

Avantages

- **répartition homogène de la chaleur** dans l'enceinte de cuisson,
- **étalonnage 100% automatique** avec une garantie de précision pour la température (**VITA Autoadjust**),
- longue durée de vie et fonctionnement non vorace en énergie (**VITA Energy Efficiency**),
- frittage en douceur de tous les matériaux courants tel que le dioxyde de zirconium hautement translucide, préteinté industriellement et manuellement, dans tous les modes pour des frittages de qualité constante,
- frittage HighSpeed en 80 min (**VITA HighSpeed**),
- frittage HighSpeed d'armatures de bridges jusqu'à 14 éléments,
- frittage de tous les matériaux d'infrastructure en céramique à base de ZrO₂ et Al₂O₃,
- frittage en douceur, sans stress dans tous les modes grâce au refroidissement contrôlé à 400°C,
- préséchage à basse température intégré (**VITA PreDry**) avec transition en douceur vers le frittage,
- l'option d'extension modulaire du système pour une plus grande **souplesse et rentabilité**

Avis

Pour utiliser les fours vous avez besoin d'une ou de plusieurs unités de commande VITA vPad.

VITA ZYRCOMAT® 6000 MS**Fonctions techniques**



- Programmes utilitaires et de surveillance comme par ex. Etalonnage de la température automatique avant chaque départ de programme, surveillance de la température
- Protection contre les coupures de courant, Surveillance du lift
- 4 éléments chauffants très performants en disilicure de molybdène pour une distribution constante de la chaleur - chaque élément se remplace indépendamment des autres
- Etalonnage de la température automatique à chaque départ de programme
- Précision de la température +/-2°C
- Composants électroniques de grande qualité pour un déroulement sûr des programmes.
- Enceinte de chauffe équipée d'un matériau isolant de grande qualité

Données techniques	
Largeur	315 mm
Profondeur	500 mm
Hauteur	470 mm
Poids	27 kg (acier laqué), 30 kg (acier fin)
Carrosserie	2 versions : acier fin et acier laqué couleur anthracite
Diamètre de l'enceinte de chauffe	Diamètre utile 90 mm
Hauteur de l'enceinte de chauffe	Hauteur utile 70 mm
Température de l'enceinte de chauffe	max. 1600 °C
Alimentation électrique	230 Volt AC, 50/60 Hz ou 100/110 Volt AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée	max. 1,3 kW
Classification	Classe de protection 1

Accessories (can be purchased separately):

- Programme FDS (Firing Data System) - logiciel PC pour la gestion et l'archivage des données de cuisson
- Pour piloter plusieurs fours avec une unité de commande VITA vPad (à partir du 2e four), il faut posséder 1 switchbox (Art. D47009). La switchbox peut raccorder jusqu'à 4 fours.
- panneaux latéraux dans 3 couleurs pour la personnalisation du VITA ZYRCOMAT 6000 MS
- Ensemble de numéros (N°. 1-4 / Art D47008)

VITA ZYRCOMAT® 6000 MS articles**VITA ZYRCOMAT® 6000 MS**

Désignation		N° art.
VITA Zyrcomat 6000 MS Laqué (230 V) * Accessoires 1 Socle de cuisson 1 câble de branchement au réseau électrique 1 câble de branchement à l'unité de commande VITA vPad 1 Pince à four (25 cm) 2 Réceptacles de frittage MS 1 Boîte de 150 g de billes ZrO2 1 LED colonne de signalisation à monter 1 Mode d'emploi		DZY6000MS220
VITA Zyrcomat 6000 MS acier fin (230 V) * Accessoires 1 Socle de cuisson 1 câble de branchement au réseau électrique 1 câble de branchement à l'unité de commande VITA vPad 1 Pince à four (25 cm) 2 Réceptacles de frittage MS 1 Boîte de 150 g de billes ZrO2 1 LED colonne de signalisation à monter 1 Mode d'emploi		DZY6000MSE220

Accessoires en option VITA ZYRCOMAT® 6000 MS



Accessoires en option VITA ZYRCOMAT® 6000 MS articles**Accessoires en option VITA ZYRCOMAT® 6000 MS**

Désignation	N° art.
Jeu de caches latéraux (Teinte bleu) 2 caches (fixation magnétique) pour VITA ZYRCOMAT 6000 MS	D53000
Jeu de caches latéraux (Teinte vert menthe) 2 caches (fixation magnétique) pour VITA ZYRCOMAT 6000 MS	D53001
Jeu de caches latéraux (Teinte blanc) 2 caches (fixation magnétique) Possibilité d écrire sur ces caches et de les utiliser comme bloc notes pour VITA ZYRCOMAT 6000 MS	D53002

VITA vPad confort

La souplesse requiert des options - avec des fonctions répondant à toutes les exigences (d'un écran tactile couleurs 7" de la toute dernière génération)



Description du produit

Les fonctions des VITA vPad procurent une très grande rentabilité et efficacité. Avec une seule unité de commande vous pilotez jusqu'à quatre fours VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT 6000 MP et VITA ZYRCOMAT 6000 MS. Cela signifie également que si vous achetez des fours supplémentaires vous n'aurez pas besoin d'une autre unité de commande ce qui vous évitera une nouvelle dépense.

Les deux unités de commande VITA vPad confort et VITA vPad excellence sont dotées d'un panneau de commande intuitif convivial et de menus intelligents pour une correction automatique des entrées non autorisées. Toute nouvelle caractéristique ajoutée par VITA : le système VITA MultiPump qui alimente jusqu'à quatre fours avec une seule pompe à vide VITA.

Avantages

- **d'un écran tactile couleurs 7" de la toute dernière génération,**
- **du pilotage de 2 fours,**
- **de 500** programmes de cuisson, pressée et frittage à disposition,
- de la création jusqu'à **quatre** comptes utilisateurs avec protection en écriture pour sécuriser les programmes et réglages personnels,
- modification de programme possible en cours de programme,
- d'une interface USB avec la possibilité de brancher une souris et un clavier PC,
- du branchement possible d'une carte mémoire,
- mises à jour rapides du logiciel de l'unité de commande et du four par clé USB,
- d'un **photoviewer** avec diverses fonctions pour l'affichage et l'enregistrement des clichés cliniques,
- mémoire de **1 Go**,
- assurance qualité grâce à l'enregistrement de toutes les données de cuisson,
- d'un mode nuit pour une économie d'énergie (VITA Energy Efficiency),
- affichage des heures de fonctionnement de l'appareil et du moufle,
- d'une fonction Clinical intégrée pour des matériaux destinés à une utilisation en cabinet dentaire

Avis

Programmé pour l'avenir signifie pour vous être informé automatiquement via le VITA Update-Messenger des mises à jour pour les programmes et le logiciel des fours et des vPads VITA. Avec ce système vous faites le choix de la plus grande sécurité et rentabilité.

VITA vPad confort**Fonctions techniques**

- Nombreux programmes utilitaires et de surveillance comme par ex. étalonnage automatique de la température à chaque départ de programme, surveillance de la sonde de température et du vide, refroidissement rapide, mode nuit, protection contre les coupures de courant, affichage des heures de fonctionnement pour le four et le moufle, nettoyage automatique
- Surveillance des fonctions avec établissement d'un protocole de fonctionnement du lift, de la mise sous vide préliminaire et principale, des cycles de température et de temps
- Mémorisation, sécurisation et protection anti-écriture des comptes utilisateurs et des programmes
- Mise à jour du logiciel et transfert des données sur d'autres unités de commande vPad et PC par clé USB
- Surveillance et affichage des erreurs de fonctionnement
- Possibilité de régler au choix la position du lift pour le pré-séchage, le refroidissement et le refroidissement rapide à la température d'attente
- Choix de la langue


Données techniques	
Largeur	235 mm
Profondeur	156 mm
Hauteur	150 mm
Poids	0,7 kg
Carrosserie	plastique
Classification	Classe de protection 1

Accessories (can be purchased separately):

- Programme FDS (Firing Data System) - logiciel PC pour la gestion et l'archivage des données de cuisson.
- Pour piloter deux VITA VACUMAT 6000 M, VITA ZYRCOMAT 6000 MS ou VITA VACUMAT 6000 MP avec une unité de commande VITA vPad confort, une Switchbox (N° art. D47009) est nécessaire.

VITA vPad confort articles

VITA vPad confort

Désignation		N° art.
VITA vPad confort * Accessoires 1 câble de raccordement 1 Mode d emploi		DVPADC

VITA vPad excellence

La souplesse requiert des options - avec des fonctions répondant à toutes les exigences (d'un écran tactile couleurs à LED 8,5" de la toute dernière génération)



Description du produit

Les fonctions des VITA vPad procurent une très grande rentabilité et efficacité. Avec une seule unité de commande vous pilotez jusqu'à quatre fours VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT 6000 MP et VITA ZYRCOMAT 6000 MS. Cela signifie également que si vous achetez des fours supplémentaires vous n'aurez pas besoin d'une autre unité de commande ce qui vous évitera une nouvelle dépense.

Les deux unités de commande VITA vPad confort et VITA vPad excellence sont dotées d'un panneau de commande intuitif convivial et de menus intelligents pour une correction automatique des entrées non autorisées. Toute nouvelle caractéristique ajoutée par VITA : le système VITA MultiPump qui alimente jusqu'à quatre fours avec une seule pompe à vide VITA.

Avantages

- **de toutes les fonctions du VITA vPad confort,**
- de modes d'emploi intégrés pour tous les matériaux VITA,
- **du pilotage possible de 4 fours,**
- **du système VITA MultiPump pour alimenter jusqu'à quatre fours avec une seule pompe à vide,**
- **d'un écran tactile couleurs à LED 8,5" de la toute dernière génération,**
- **jusqu'à 1000** programmes de cuisson, pressée et frittage à disposition,
- **jusqu'à 12 profils utilisateurs,**
- **de deux interfaces USB,**
- d'une capacité d'enregistrement de **2 Go.**

Avis

Programmé pour l'avenir signifie pour vous être informé automatiquement via le VITA Update-Messenger des mises à jour pour les programmes et le logiciel des fours et des vPads VITA. Avec ce système vous faites le choix de la plus grande sécurité et rentabilité.

VITA vPad excellence

Fonctions techniques

- Nombreux programmes utilitaires et de surveillance comme par ex. étalonnage automatique de la température à chaque départ de programme, surveillance de la sonde de température et du vide, refroidissement rapide, mode nuit, protection contre les coupures de courant, affichage des heures de fonctionnement pour le four et le moufle, nettoyage automatique
- Surveillance des fonctions avec établissement d'un protocole de fonctionnement du lift, de la mise sous vide préliminaire et principale, des cycles de température et de temps
- Mémorisation, sécurisation et protection anti-écriture des comptes utilisateurs et des programmes
- Mise à jour du logiciel et transfert des données sur d'autres unités de commande vPad et PC par clé USB
- Surveillance et affichage des erreurs de fonctionnement
- Possibilité de régler au choix la position du lift pour le pré-séchage, le refroidissement et le refroidissement rapide à la température d'attente
- Choix de la langue


Données techniques	
Largeur	235 mm
Profondeur	156 mm
Hauteur	150 mm
Poids	0,7 kg
Carrosserie	plastique
Classification	Classe de protection 1

Accessories (can be purchased separately):

- Programme FDS (Firing Data System) - logiciel PC pour la gestion et l'archivage des données de cuisson.
- Pour piloter plusieurs VITA VACUMAT 6000 M, VITA ZYRCOMAT 6000 MS ou VITA VACUMAT 6000 MP avec une unité de commande VITA vPad excellence, une Switchbox (N° art. D47009) est nécessaire.

VITA vPad excellence articles

VITA vPad excellence

Désignation		N° art.
VITA vPad excellence * Accessoires 1 câble de raccordement 1 Mode d emploi		DVPADEX

Accessoires pour appareils



Description du produit

Choisissez dans la riche gamme d'accessoires un jeu de panneaux latéraux afin de personnaliser votre four, des tablettes de dépose, une pompe à vide, un socle et d'autres accessoires pour un parfait équipement.

Accessoires pour appareils articles**Accessoires pour appareils**

Désignation	N° art.
VITA FDS (Firing Data System) Logiciel PC pour de la saisie de données de cuisson - New Generation	D34230NG01
Memory Stick pour VITA VACUMAT 40 T, 4000 PREMIUM T, INCERAMAT 3 T, Zyrcomat T, VACUMAT 6000 M/MP	D42300
Touch-Stick pour VITA VACUMAT 40 T, 4000 PREMIUM T, INCERAMAT 3 T, Zyrcomat T	D42301
Pince à four pour VITA ZYRCOMAT	D53003
Potence pour réceptacle de frottage VITA , 4 pièces	D53295
VITA MultiPump auxiliaire accessoires	D61004

Pièce de rechange pour appareils



Pièce de rechange pour appareils articles**Pièce de rechange pour fours dentaires**

Désignation	N° art.
Socle de cuisson - pressée N° 1: 38 x 15 mm pour VITA VACUMAT 6000MP	D47294-P1
Socle de cuisson - pressée N° 2: 54 x 15 mm pour VITA VACUMAT 6000MP	D47294-P2
Socle de cuisson - pressée N° 3: 67 x 15 mm pour VITA VACUMAT 6000MP	D47294-P3
Socle de cuisson - pressée disque N° 1: 36 x 5 mm pour VITA VACUMAT 6000MP	D47294-PS1
Socle de cuisson - pressée disque N° 2: 52 x 5 mm pour VITA VACUMAT 6000MP	D47294-PS2
Socle de cuisson - pressée disque N° 3: 65 x 5 mm pour VITA VACUMAT 6000MP	D47294-PS3
Moufles de cuisson (230 V) pour VITA VACUMAT 30, 50, 100, 200, 250, 300, 500, 2500	D22261
Socle de cuisson pour VITA VACUMAT 100	D22294
Socle de cuisson pour VITA VACUMAT 30, 40, 40 T, 50, 200, 250, 300, 4000P, 4000 PT, ATMOMAT, VITA V60 i-Line, VITA VACUMAT 6000 M	D23294
Socle de cuisson pour VITA VACUMAT 500, 2500, 2500 PL	D31295

Pièce de rechange pour fours dentaires

Désignation	N° art.
Moufle de cuisson (230 V) pour VITA INCERAMAT, INCERAMAT 2	D26261
Socle de cuisson pour VITA INCERAMAT, INCERAMAT 2	D26294
Socle de cuisson pour VITA INCERAMAT 3, INCERAMAT 3 T	D37231
Moufle de cuisson (230 V) pour VITA INCERAMAT 3, INCERAMAT 3 T	D37261
Moufle de cuisson (230 V) pour VITA ATMOMAT, VACUMAT 40, 40 T, 4000 P, 4000 PT, 6000M, 6000MP	D32261
Élément chauffant Kanthal Super pour VITA ZYrcomat, ZYrcomat T	D38041
Socle de cuisson haute température pour VITA ZYrcomat, ZYrcomat T	D38065
Dispositif table de cuisson pour VITA ZYrcomat, ZYrcomat T	D38066
Élément de chauffant pour VITA ZYRCOMAT 6000 MS	D53041
Socle de cuisson pour VITA ZYRCOMAT 6000 MS	D53294A



VITA shade, VITA made.

VITA

VITA CEREC LIQUID



Description du produit

VITA CEREC Liquid pour le collage provisoire de la CEREC POWDER. Se retire entièrement à l'eau.

VITA CEREC LIQUID articles

miscellaneous liquids

Désignation	N° art.
VITA CEREC Liquid, 6 ml	ECL

Porte-empreintes à usage unique

Porte-empreintes maxillaires et mandibulaires pour des empreintes précises



Description du produit

Avec 3 tailles de chaque pour maxillaire et mandibule dentée, la précision des empreintes est assurée. Pour une individualisation, les porte-empreintes à usage unique VITA peuvent être meulés et après une légère chauffe au dessus d'une flamme, découpés avec une paire de ciseaux à couronnes.

Avantages

- Les porte-empreintes à usage unique VITA sont en polystyrol résistant et sont beaucoup plus légers que les porte-empreintes en métal. Les perforations contribuent à une meilleure adhérence des matériaux d'empreinte.
- Les porte-empreintes à usage unique VITA s'adaptent à toute configuration de mâchoire. Ils sont hygiéniques car non réutilisés; plus de nettoyage, stérilisation et séchage. Ils sont faciles à expédier car la poignée métallique demeure chez le dentiste.

Porte-empreintes à usage unique articles

Porte-empreintes à usage unique

usage unique, 25 pièces

Désignation	N° art. 25 pièces
B01	FBO1
B02	FBO2
B03	FBO3
BU1	FBU1
BU2	FBU2
BU3	FBU3

Désignation	N° art.
Manche à monter pour Porte-empreinte à usage unique, 10 pièces	FE

VITA DUO CEMENT

Composite de scellement hybride fin à double polymérisation



Description du produit

Composite de scellement hybride fin - deux composants, polymérisation dual, radio opaque. Scellement durable des restaurations en céramique mordançable ainsi des restaurations en composite au contact de la substance dentaire. Disponible dans une teinte universelle.

Avantages

VITA DUO CEMENT KIT est facile à appliquer car sa consistance est visqueuse. Bonne intégrité marginale et très bonne aptitude au polissage.


VITA DUO CEMENT coffrets

**VITA DUO CEMENT KIT
FCDCK**

Quantité	Contenu	Matériau
2	2,5 g	Seringue pâte base
2	2,5 g	Seringue pâte catalyseur
1	pièce	Bloc de mélange
		Mode d'emploi

VITA DUO CEMENT articles

VITA DUO CEMENT

Désignation		N° art.
VITA DUO CEMENT KIT		FCDCK

VITA A.R.T. Bond

Adhésif amélo-dentinaire à deux étapes, photopolymérisable



Description du produit

VITA A.R.T. BOND est destiné au collage des restaurations en céramique et composite avec des composites de scellement (par ex. VITA DUO CEMENT) sur la dentine et l'émail avec optimisation du joint cervical.

Avantages

Après application, le A.R.T. BOND PRIMER modifie la Smear Layer (boue dentinaire), pénètre dans les tubuli dentinaires et les obture. Simultanément, il déminéralise en douceur la dentine. On obtient ainsi une structure à très fines rétentions, imprégnée de A.R.T. BOND/ BONDING AGENT, qui sert de base pour le composite de scellement. La cohésion est durable entre la restauration et la surface dentine/émail et on évite la sensibilité post opératoire. Le système de collage A.R.T. participe également à la protection pulpaire, le A.R.T. PRIMER libérant constamment des ions fluorés au niveau de la dentine.

VITA A.R.T. Bond coffrets

**VITA A.R.T. BOND SET
FCABS**

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 ml	PRIMER A
1	5 ml	PRIMER B
1	5 ml	BOND
2	pièces	Porte pinceau
100	pièces	Embouts de pinceau à usage unique
40	pièces	Godets
		Mode d'emploi

**VITA A.R.T. BOND, PRIMER A+B Réassort
FCABP**




Quantité	Contenu	Matériau
1	5 ml	PRIMER A
1	5 ml	PRIMER B
40	pièces	Godets
		Mode d'emploi

**VITA A.R.T. BOND, BOND Réassort
FCABB**

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 ml	BOND
40	pièces	Godets
		Mode d'emploi

VITA A.R.T. Bond articles

VITA A.R.T. Bond

Désignation		N° art.
VITA A.R.T. BOND, BOND Refill Package		FCABB
VITA A.R.T. BOND, PRIMER A+B Refill Package		FCABP
VITA A.R.T. BOND SET		FCABS

VITA ETCHANT GEL

Gel d'acide phosphorique à 35% pour le mordantage de la substance dentaire



Description du produit

VITA ETCHANT GEL est un gel d'acide ortho phosphorique à 35% pour le mordantage de la substance dentaire dans le cadre d'un scellement par collage des restaurations en céramique et composite sur la substance dentaire. Egalement utilisable avec la technique du mordantage total.

Avantages

- de teinte bleu foncé, il offre un bon contraste avec la substance dentaire.
- S'applique avec précision à l'aide des canules et offre une bonne tenue.
- Rinçage rapide et facile.
- VITA ETCHANT GEL conserve une parfaite consistance même après un usage répété et pendant plusieurs mois.

VITA ETCHANT GEL coffrets

**VITA ETCHANT GEL KIT
FCEGK**


Quantité	Contenu	Matériau
2	2,5 ml	Seringue
20	pièces	Canules à usage unique
		Mode d'emploi

**VITA ETCHANT GEL, accessoires
FCEAN**

Quantité	Contenu	Matériau
20	pièces	Canules à usage unique
		Mode d'emploi

VITA ETCHANT GEL articles

VITA ETCHANT GEL

Désignation		N° art.
VITA ETCHANT GEL KIT		FCEGK

VITA CERAMICS ETCH

Gel d'acide fluorhydrique à 5% pour le mordantage des restaurations en céramique



Description du produit

VITA CERAMICS ETCH est un gel d'acide fluorhydrique pour le mordantage des restaurations en céramique feldspathique, hybrid et vitreuse. La structure mordancée est très rétentive et assure un ancrage micro mécanique entre la céramique et le composite de scellement. Uniquement pour un usage extra oral!

Avantages

- 2 présentations:
Flacon gouttes de 6 ml et seringue de 3 ml.
- De teinte rouge, il offre un bon contraste avec la céramique.
- S'applique avec précision à l'aide des canules et offre une bonne tenue.
- Rinçage rapide et facile.

VITA CERAMICS ETCH coffrets

**VITA CERAMICS ETCH
FCE3**



Quantité	Contenu	Matériau
1	3ml	Seringue
20	pièces	Canules à usage unique
		Mode d'emploi

**VITA CERAMICS ETCH
FCE6**

Quantity	Content	Material
1	6ml	Bottle
		User information

VITA CERAMICS ETCH articles

VITA CERAMICS ETCH

Désignation		N° art.
VITA CERAMICS ETCH, 3 ml		FCE3
VITA CERAMICS ETCH, 6 ml		FCE6

VITASIL®

Adhésif silane mono composant pour la technique de collage



Description du produit

VITASIL est un adhésif silane mono composant, créant une liaison chimique entre la restauration en céramique et le composite de scellement dans le cadre de la technique de collage.


VITASIL® coffrets

**VITASIL
FVS3**

Quantité	Contenu	Matériau
1	3ml	Seringue
30	pièces	Canules à usage unique
		Mode d'emploi

VITASIL® articles

VITASIL®

Désignation		N° art.
VITASIL, 3 ml		FVS3

VITA OXY-PREVENT

Gel de glycérine destiné à prévenir la couche d'inhibition provoquée par l'oxygène



Description du produit

VITA OXY-PREVENT est un gel de glycérine incolore pour prévenir la couche d'inhibition de l'oxygène lors du collage des restaurations en céramique et en composite avec des composites. Peut aussi s'utiliser comme pâte d'essai.

Avantages

- Application simple à l'aide des canules et bonne tenue.
- Peut aussi s'utiliser comme pâte d'essai pour juger du résultat final.


VITA OXY-PREVENT coffrets

**VITA OXY-PREVENT
FOP3**

Quantité	Contenu	Matériau
1	3ml	Seringue
10	pièces	Canules à usage unique
		Mode d'emploi

VITA OXY-PREVENT articles

VITA OXY-PREVENT

Désignation		N° art.
VITA OXY-PREVENT, 3 ml		FOP3

VITA LUTING SET

Coffret pour scellement par collage des restaurations en céramique mordançable



Description du produit

VITA LUTING SET

Le VITA LUTING SET contient tous les matériaux nécessaires au scellement par collage des restaurations en céramique feldspathique et vitreuse ainsi qu'en composite: gel de mordançage amélaire, adhésif amélo-dentinaire, gel de mordançage de la céramique, adhésif silane, composite de scellement, gel de glycérine et accessoires.

Avantages

- Coffret complet, "Tout sous la main"
- Présentation séduisante, peu encombrante, claire et logique.
- Le coffret permet de procéder pas à pas et évite ainsi toute erreur de manipulation.
- Il contient des composants ayant fait leurs preuves depuis des années sur le plan clinique. Ces composants sont pour la plupart conditionnés sous forme de seringue, une présentation économique et qui plaît aux dentistes.

VITA LUTING SET coffrets

Accessoires

Désignation	Taille	Contenu	N° art.
Spatule à ciment à usage unique pour DUO CEMENT	-	20 pièces	FZS
Porte pinceau blanc	-	1 pièce	FCPHW
Embouts de pinceau à usage unique	-	50 pièces	FCPS

VITA LUTING SET



**VITA CEMENTATION KIT
FLCSET**

Quantité	Contenu	Matériau
1	3 ml	CERAMICS ETCH (Gel de mordantage de la céramique)
1	3 ml	VITASIL (Adhésif silane)
1	2,5 ml	DUO CEMENT, pâte base
1	2,5 ml	DUO CEMENT, pâte catalyseur
1	3 ml	OXY-PREVENT (Gel de glycérine)
1		Bloc de mélange
1	20 pièces	Spatule à usage unique pour DUO CEMENT
1	20 pièces	Canules rouges à usage unique CERAMICS ETCH
1	30 pièces	Canules lavande à usage unique VITASIL
1	10 pièces	Canules vertes à usage unique OXY-PREVENT
1	5 pièces	Capuchons de rechange transparents pour seringue
		Mode d'emploi CERAMICS ETCH
		Mode d'emploi VITASIL
		Mode d'emploi OXY-PREVENT
		Mode d'emploi DUO CEMENT
		Instructions pas à pas

VITA ETCH & BOND KIT

FLEBSET*


Quantité	Contenu	Matériau
1 seringue	2,5 ml	ETCHANT GEL (Gel de mordantage Email)
1 Flacon	5 ml	A.R.T. BOND, PRIMER A (Adhésif Email-Dentine)
1 Flacon	5 ml	A.R.T. BOND, PRIMER B (Adhésif Email-Dentine)
1 Flacon	5 ml	A.R.T. BOND, BOND (Adhésif Email-Dentine)
2	50 pièces	Pointes de pinceau à usage unique
1		Porte pinceau blanc
2		Porte pinceau noir*
1	40 pièces	Godets à usage unique
1	20 pièces	Canules à usage unique pour ETCHANT GEL
		Mode d'emploi ETCHANT GEL
		Mode d'emploi A.R.T. BOND
		Instructions pas à pas

* * uniquement fourni en coffret, non vendu séparément

VITA LUTING SET

FLSET

Quantité	Contenu	Matériau
1	pièce	ETCH & BOND KIT
1	pièce	CEMENTATION KIT

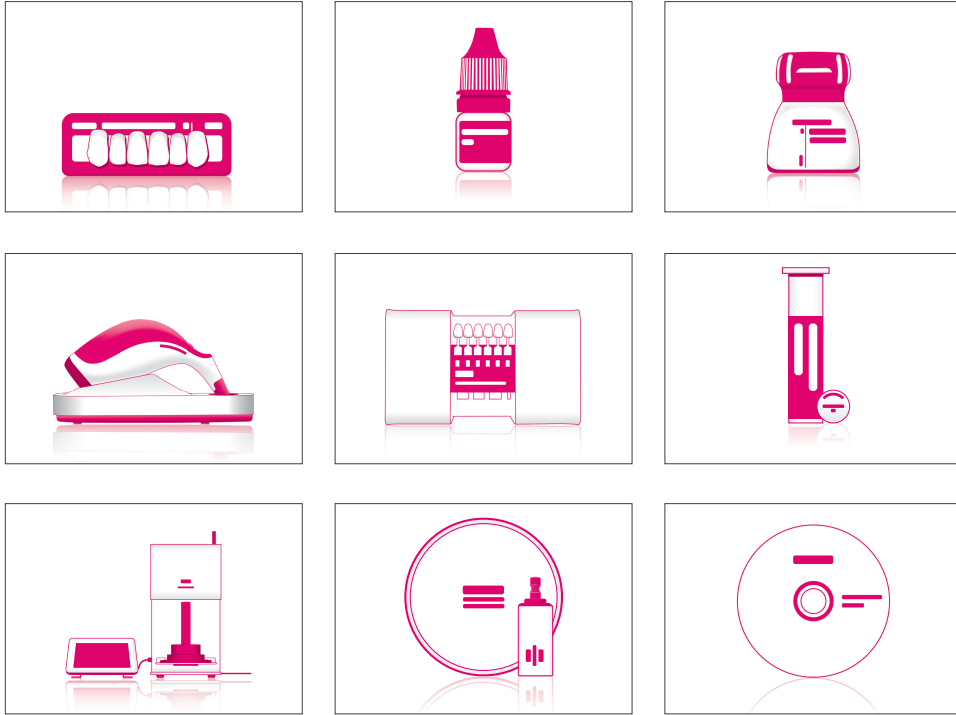

VITA shade, VITA made.

VITA

VITA Easyshade®

Un appareil - d'innombrables applications. Toujours prêt à vous servir.



Description du produit

Avec le nouveau VITA Easyshade **V** la définition et la communication des couleurs dentaires sont toujours en mode numérique grâce à la haute précision de VITA vEye. Le concept d'utilisation pragmatique est encore optimisé par un écran tactile en couleurs OLED - confort et intuition réunis. La technique d'accumulateur avec protection anti décharge intégrée est fiable et pérenne. Elle sécurise un fonctionnement particulièrement stable en mode continu. Le logiciel innovant associé au réseau neuronal VITA vBrain garantit une définition précise de la couleur dentaire avec les systèmes de couleurs mondialement reconnus VITA classical A1-D4, VITA SYSTEM 3D-MASTER, VITABLOCS et les couleurs blanchies selon l'American Dental Association (ADA).

Le remarquable design du VITA Easyshade **V** est entièrement nouveau. Le carter monobloc, la structure en couche des composants internes ainsi que la sonde de mesure raccourcie sont extrêmement ergonomiques et l'appareil s'adapte tout naturellement à la main.

Avantages

Equipé du tout dernier micro contrôleur 32 bit avec noyau ARM Cortex M3 le nouveau VITA Easyshade de la 5e génération travaille non seulement plus vite mais offre aussi de nouvelles applications au quotidien.

- Définissez la couleur dentaire de vos patients pour choisir des matériaux CFAO, pour réaliser des couronnes en stratification, sélectionner des dents artificielles, sélectionner un matériau pour une obturation directe ou bien planifier des retouches esthétiques à l'aide de facettes.
- Soutenez le processus de planification pour un blanchiment dentaire professionnel.
- Profitez des multiples options pour optimiser durablement votre système d'assurance qualité.
- Facilitez-vous le travail de stratification des restaurations en recourant à l'application qui affiche le dégradé de couleur des dents depuis la zone incisale jusqu'à la zone cervicale.
- Contrôlez vos restaurations dès la première cuisson.

Liberté d'association

Grâce à l'application VITA mobileAssist pour Smartphone la communication entre le laboratoire et le cabinet dentaire devient un plaisir : les informations sur la couleur dentaire fournies par VITA Easyshade **V** sont transmises à l'application, intégrées à une photo du patient prise avec le Smartphone puis envoyées au destinataire en quelques secondes. Pour une communication encore plus précise, faites appel au logiciel VITA Assist pour Microsoft Windows qui vous permet d'envoyer des photos numériques en haute définition ainsi que toutes les informations fournies par VITA Easyshade **V**.

VITA Easyshade® coffrets

Données techniques

- Spectrophotomètre, plage de mesure 400 – 700 nm
- Concept de charge par induction avec accumulateurs durables AA
- Des filtres spectraux analysent le spectre de réflexion
- Indication de toutes les couleurs de dent dans les systèmes de couleurs reconnus VITA SYSTEM 3D-MASTER®, VITA classical A1–D4® et indication des couleurs VITABLOCS® et des couleurs blanchies selon le standard de l'ADA (american dental association)
- Interface Bluetooth® pour communication avec le logiciel PC VITA Assist et l'app smartphone VITA mobileAssist

VITA Easyshade® articles

VITA Easyshade®

Désignation	N° art.
VITA Easyshade V, 100-230V * Contenu: 1 Chargeur VITA Easyshade V 1 Pièce à main Easyshade V 1 Cable de branchement 2 Accu NIMH, rechargeable 1 Etui de protection (2 x 18 pièces) 1 CD VITA Assist (ShadeAssist + ToothConfigurator Demo) 1 module Bluetooth USB 1 Manuel utilisateur et un mode d'emploi abrégé	DEASY5

Accessoires VITA Easyshade®



Accessoires VITA Easyshade® articles

Accessoires VITA Easyshade®

Désignation	N° art.
Etui de protection pour Easyshade V (9 x 18 pièces)	D58000S

Teintier VITA classical A1-D4®



Description du produit

Le teintier VITA classical A1 – D4 est destiné à la définition sûre des teintes dentaires.

Les teintes de la gamme VITA classical sont classées comme suit:


- A1 - A4 (rougeâtre-brunâtre)
- B1 - B4 (rougeâtre-jaunâtre)
- C1 - C4 (grisâtre)
- D2 - D4 (gris-rougeâtre)

Conseils pour la prise de teinte

- Définir les teintes autant que possible sous une lumière du jour diffuse ou sous une lampe lumière du jour normalisée mais pas sous un éclairage ambiant classique.
- Tout l'environnement doit être aussi neutre que possible. Demander aux patientes de retirer leur rouge à lèvres et masquer les vêtements de couleur vive avec un tissu de couleur grise.
- Choisir rapidement la teinte et toujours se fier à la première décision car les yeux fatiguent au bout de 5 à 7 sec.

Teintier VITA classical A1-D4® articles

Teintier VITA classical A1-D4®

Désignation		N° art.
Teintier VITA classical A1-D4		B0271

Teintier VITA classical A1-D4 avec VITA Bleached Shades



Description du produit

Les Bleached Shades de VITA sont bien pratiques pour le dentiste lorsqu'il doit définir les teintes blanchies, en partant du teintier VITA classical. Avec ces VITA Bleached Shades, les teintes des dents blanchies existent désormais dans le teintier original.

Les VITA Bleached Shades sont les teintes blanchies 0M1, 0M2 et 0M3, extraites du VITA SYSTEM 3D-MASTER. Elles sont également disponibles en complément du VITA classical A1 - D4 et du VITAPAN classical.

Les teintes VITA Bleached Shades sont également disponibles comme complément pour le teintier VITA classical A1-D4 ainsi que pour le teintier VITAPAN classical.


La planification et le contrôle des procédures de blanchiment dentaire seront effectués avec une grande précision grâce au VITA Bleachedguide 3D-MASTER conçu à cet effet.

Conseils pour la prise de teinte

- Définir les teintes autant que possible sous une lumière du jour diffuse ou sous une lampe lumière du jour normalisée mais pas sous un éclairage ambiant classique.
- Tout l'environnement doit être aussi neutre que possible. Demander aux patientes de retirer leur rouge à lèvres et masquer les vêtements de couleur vive avec un tissu de couleur grise.
- Choisir rapidement la teinte et toujours se fier à la première décision car les yeux fatiguent au bout de 5 à 7 sec.

Teintier VITA classical A1-D4 avec VITA Bleached Shades articles

Teintier VITA classical A1-D4 avec VITA Bleached Shades

Désignation		N° art.
Teintier VITA classical A1-D4 avec VITA Bleached Shades		B027IV1

VITA Linearguide 3D-MASTER®



Description du produit

Avec le VITA Linearguide 3D-MASTER, vous définissez rapidement et précisément la teinte de dent correcte. Grâce au design moderne et à la conception systématisée du VITA Linearguide, vous pouvez rapidement identifier la bonne teinte 3D-MASTER.

Le VITA Linearguide 3D-MASTER facilite le passage d'un système de prise de teinte classique au VITA SYSTEM 3D-MASTER, un système précis pour la définition et la communication de la teinte.


Le VITA Linearguide 3D-MASTER contient les 29 teintes échantillons identiques à celles du VITA Toothguide 3D-MASTER.

Avantages

- Manipulation classique
- Utilisation facile
- Définition de la teinte sûre, rapide et précise pour satisfaire vos clients
- Design moderne reflétant l'esthétique et la clarté

VITA Linearguide 3D-MASTER® articles

VITA Linearguide 3D-MASTER®

Désignation		N° art.
VITA Linearguide 3D-MASTER		B363

VITA Toothguide 3D-MASTER®



Description du produit

VITA Toothguide 3D-MASTER®

Avec le VITA Toothguide 3D-MASTER, il est possible de définir toutes les teintes de dent naturelles d'une manière sûre et systématique.

BLEACHED SHADE GUIDE



Avec le VITA BLEACHED SHADE GUIDE, il est possible de définir les teintes des dents blanchies d'une manière sûre et systématique, selon le principe du VITA Toothguide.

Avantages


- Relevé de la teinte de dent en 3 étapes
- Définition précise de la teinte de dent
- Comparaison possible: oui/non, mieux/moins bien – décision
- Définition mathématique précise des teintes de dents (possibilité de les mélanger)
- Méthode facilement assimilable

VITA Toothguide 3D-MASTER® articles

VITA Toothguide 3D-MASTER®

Désignation		N° art.
VITA BLEACHED SHADE GUIDE, Shade Group 0		B2600MS
VITA Toothguide 3D-MASTER avec BLEACHED SHADE GUIDE		B360

VITA Bleachedguide 3D-MASTER®

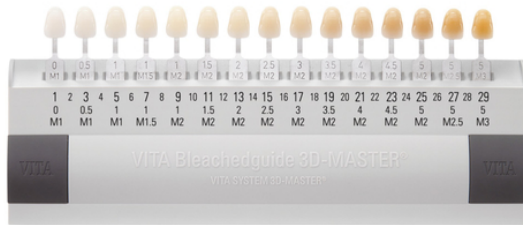

Description du produit

Le VITA Bleachedguide 3D-MASTER sert à planifier et contrôler les procédures d'éclaircissement des dents. La structure suit d'une part la structure logique du VITA SYSTEM 3D-MASTER en reposant sur les 3 paramètres luminosité, saturation et teinte.



De plus en rapport avec l'American Dental Association (ADA) les 29 degrés de luminosité chromatique définis figurent dans le VITA Bleachedguide 3D-MASTER. Avec cette nouvelle classification le VITA Bleachedguide 3D-MASTER s'inscrit dans cette norme mondialement reconnue. C'est donc le produit conseillé à tous les praticiens.

Avantages

- La conception claire et compréhensible - maintenant avec en plus une désignation numérique - favorise une bonne communication entre le dentiste et le patient. La classification par numéros du VITA Bleachedguide 3D-MASTER est basée sur la définition des degrés de luminosité de l'American Dental Association et apporte une précision supplémentaire quant au changement apporté par le processus de blanchiment.
- Le degré d'éclaircissement souhaité se définit précisément avec le patient avant le traitement à l'aide des barrettes de teinte puis contrôlé à la fin.
- La couleur appropriée pour une restauration sera sélectionnée avec le VITA Toothguide 3D-MASTER puis reproduite avec les matériaux correspondants.

VITA Bleachedguide 3D-MASTER® articles

VITA Bleachedguide 3D-MASTER®

Désignation		N° art.
VITA Bleached Shades (complément) avec 2 Adapter et 3 échantillons de teinte		B027BS
VITA Bleachedguide 3D-MASTER		B361

Software

VITA Shade Assist / VITA ToothConfigurator



Description du produit

VITA Assist, un logiciel aux multiples possibilités

Le logiciel VITA Assist regroupe actuellement les modules **VITA ShadeAssist et VITA ToothConfigurator.**

Le module VITA ShadeAssist constitue une interface idéale entre le cabinet dentaire et le laboratoire. Il garantit une communication sans erreur des couleurs et minimise ainsi les coûts liés à des relevés de couleur ultérieurs et des reprises de couleur. Le nouveau VITA ToothConfigurator est tout aussi intéressant.

Ce module d'aide interactif vous permet d'impliquer les patients dans la planification et la conception de leurs prothèses. La version complète VITA Assist permet non seulement un accès à toutes les fonctions mais aussi une actualisation du logiciel via des mises à jour automatiques.

VITA Dental Equipment DVD (N° art. 10228M)

(incl. VITA ShadeAssist + Demo VITA ToothConfigurator)

Software articles**Logiciel VITA Assist**

Désignation	N° art.
VITA Assist Set (versione completa, alleman)	DASSISTSETD05
VITA Assist Set (versione completa, anglais)	DASSISTSETE05
VITA Assist Set (version complète, français)	DASSISTSETF05
VITA Assist Set (version complète, italian)	DASSISTSETI05
VITA Assist Set (version complète, espagnol)	DASSISTSETSP05

Services

Meubles en plastique






Description du produit

La VITA MODULBOX, module au format A3, est destinée à conserver de manière durable et organisée les produits VITA au laboratoire et au cabinet dentaire.

Voir aussi meuble à dents vario.

Services articles
VITA Modulbox

Désignation		N° art.
VITA Modulbox tiroir 20 mm extractible avec 2 champs d'étiquetage		ZMB20
VITA Modulbox tiroir 55 mm extractible avec 2 champs d'étiquetage		ZMB55
VITA Modulbox tiroir 80 mm extractible avec 2 champs d'étiquetage		ZMB80
VITA Modulbox socle/couvercle non extractible, avec accessoires		ZMBBD
Boîte de stockage VITABLOCS for CEREC avec 1 tiroir 80 mm avec insert No. 7		ZMBCER1
VITA Modulbox Boîte complète No. 1 avec 1 tiroir 55 mm		ZMBK1
VITA Modulbox Boîte complète No. 2 avec 2 tiroirs 55 mm		ZMBK2
VITA Modulbox Boîte complète No. 3 avec 1 tiroir 80 mm		ZMBK3
VITA Modulbox Boîte complète No. 4 avec 2 tiroirs 80 mm		ZMBK4
VITA Modulbox Boîte complète No. 5 avec 2 tiroirs, je 1 x 55 mm et 80 mm		ZMBK5
Meuble S10 avec 10 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 350 mm		ZMBS10
Meuble S12 avec 12 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 420 mm		ZMBS12
Meuble S2 avec 2 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 70 mm		ZMBS2
Meuble S4 avec 4 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 140 mm		ZMBS4
Meuble S6 avec 6 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 210 mm		ZMBS6
Meuble S8 avec 8 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 280 mm		ZMBS8
VITA Modulbox plaque intermédiaire non extractible, avec 3 taquets de montage		ZMBZ

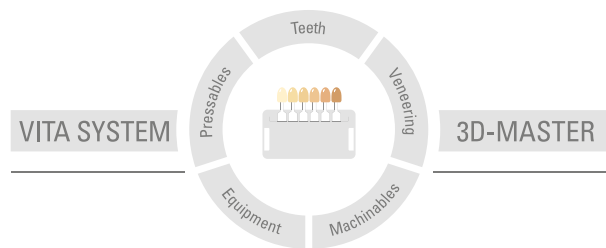

Nos produits ont été conçus pour un usage dans le domaine dentaire et doivent être mis en oeuvre conformément aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une garantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Mise à jour: 08/2016

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik