
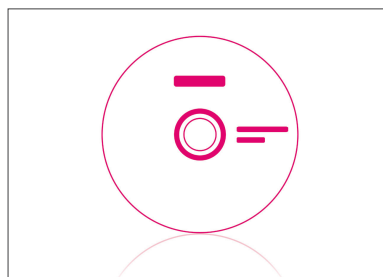
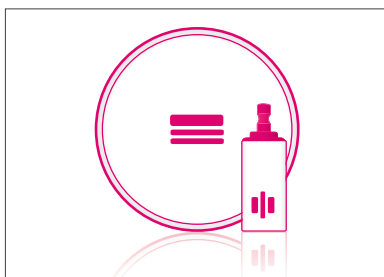
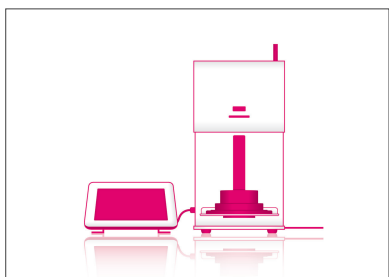
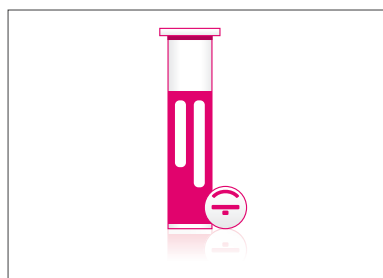
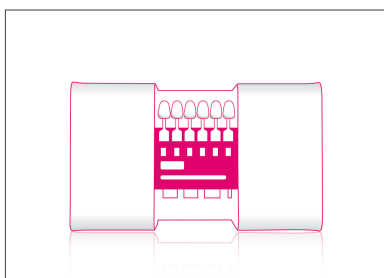


Compendio VITA Luglio 2024

Fissaggio

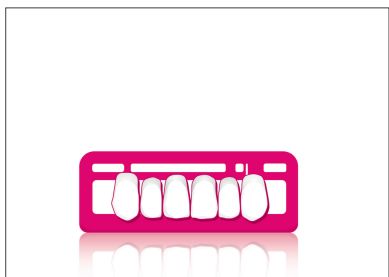

VITA – perfect match.

VITA



VITA – perfect match.

VITA

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE

Il sistema di fissaggio adesivo con componenti perfettamente coordinati per il condizionamento della sostanza dentaria e del materiale di restauro



Descrizione

Il sistema di fissaggio adesivo con componenti perfettamente coordinati per il condizionamento della sostanza dentaria e del materiale di restauro.

Per il fissaggio di tutti i restauri indiretti in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida, biossido di zirconio, composito e metallo.

Vantaggi

- Fissaggio adesivo affidabile di molteplici materiali restaurativi con adesivi specifici per i singoli materiali.
- Procedimento sicuro grazie alla chiara presentazione del set di fissaggio con componenti disposti sistematicamente e codificati cromaticamente.
- Set a doppio tray, in formato normalizzato per avere tutti i componenti a portata di mano.

Contenuto

VITA ADIVA® TOOTH-ETCH

Acido fosforico in gel al 37% per la mordenzatura dello smalto dentario per il fissaggio adesivo di restauri in ceramica e composito alla sostanza dentaria. Indicato per le tecniche di mordenzatura totale (Total-Etch) e di mordenzatura selettiva (Selective-Etch).

VITA ADIVA® T-BOND I+II

Sistema Bonding a indurimento duale. VITA ADIVA T-BOND consente un buon legame tra composito di fissaggio e smalto nonché dentina mordenzati.

VITA ADIVA® CERA-ETCH

Acido fluoridrico in gel al 5% per la mordenzatura di restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica e ceramica ibrida per realizzare un ancoraggio micromeccanico tra restauro e composito di fissaggio. Solo per uso extraorale!

VITA ADIVA® C-PRIME

Agente adesivo che genera un legame chimico tra restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® ZR-PRIME

Agente adesivo che genera un legame chimico tra restauri sinterizzati in biossido di zirconio e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® M-PRIME

Agente adesivo che genera un legame chimico tra restauri sabbiati in titanio, leghe non nobili, leghe nobili e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® F-CEM

Composito di fissaggio adesivo, a indurimento duale, per il fissaggio definitivo di restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida, biossido di zirconio, composito e metallo.

VITA ADIVA® OXY-PREVENT

Gel alla glicerina, colore neutro, per impedire la formazione dello strato di dispersione. Utilizzabile anche come pasta try-in.

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE Assortimenti

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING SET

**VITA ADIVA FULL-ADHESIVE SET
FAFASV1**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA ADIVA F-CEM A2 Universal
1	trasparen te	VITA ADIVA OXY-PREVENT 3 ml inkl. 1 Confezione Cannule di applicazione monouso
1	3 ml	VITA ADIVA TOOTH-ETCH
2	20 pz.	Cannule di applicazione monouso blu per TOOTH-ETCH, rosse per CERA ETCH
1	3 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA T-BOND I
1	5 ml	VITA ADIVA T-BOND II
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA M-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 1:1

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING VERSION

VITA ADIVA F-CEM, 5 ml

Denominazione	Cod. 5 ml
A2 Universal	FAFCEMA25
A3	FAFCEMA35
Translucent	FAFCEMT5
White opaque	FAFCEMWO5

VITA ADIVA® COMPONENTS

Denominazione	Cod.
VITA ADIVA CERA-ETCH, 3 ml acido fluoridrico in gel al 5%	FACE3
VITA ADIVA CERA-ETCH, 6 ml acido fluoridrico in gel al 5%	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME, 5 ml Ceramic primer	FACP5
VITA ADIVA M-PRIME, 5 ml Primer per metalli	FAMP5

VITA ADIVA OXY-PREVENT, 10 pz.

Denominazione	Cod. 10 pz.
3 ml inkl. 1 Confezione Cannule di applicazione monouso, trasparente	FAOP3V1

Denominazione	Cod.
VITA ADIVA T-BOND SET (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) Sistema Adesivo a indurimento duale	FATBS
VITA ADIVA TOOTH-ETCH, 3 ml (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) acido fosforico in gel al 37%	FATE3
VITA ADIVA ZR-PRIME, 5 ml Primer per biossido di zirconio	FAZRP5

VITA ADIVA® ACCESSORIES

Denominazione	Cod.
VITA ADIVA Mixing-Trays, 25 pcs.	FAAT25
VITA ADIVA Microbrush, 25 pcs.	FAMB25
VITA ADIVA T-Mixer 1:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE)	FATM11
VITA ADIVA T-Mixer 4:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA SELF-ADHESIVE)	FATM41

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE

Il sistema di fissaggio autoadesivo con componenti perfettamente coordinati per il condizionamento del materiale di restauro



Descrizione

Il sistema di fissaggio autoadesivo con componenti perfettamente coordinati per il condizionamento del materiale di restauro.

Per il fissaggio di tutti i restauri indiretti in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida, biossido di zirconio, composito e metallo.

Vantaggi

- Fissaggio adesivo affidabile di molteplici materiali restaurativi con adesivi specifici per i singoli materiali.
- Procedimento sicuro grazie alla chiara presentazione del set di fissaggio con componenti disposti sistematicamente e codificati cromaticamente.
- Set a doppio tray, in formato normalizzato per avere tutti i componenti a portata di mano.

Contenuto

VITA ADIVA® CERA-ETCH

Acido fluoridrico in gel al 5 % per la mordenzatura di restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica e ceramica ibrida per realizzare un ancoraggio micromeccanico tra restauro e composito di fissaggio. Solo per uso extraorale!

VITA ADIVA® C-PRIME

Agente adesivo che genera un legame chimico tra restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® ZR-PRIME

Agente adesivo che genera un legame chimico tra restauri sinterizzati in biossido di zirconio e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® M-PRIME

Agente adesivo che genera un legame chimico tra restauri sabbiati in titanio, leghe non nobili, leghe nobili e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® S-CEM

Composito di fissaggio autoadesivo, a indurimento duale, per il fissaggio definitivo di restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida, biossido di zirconio, composito e metallo.

VITA ADIVA® OXY-PREVENT

Gel alla glicerina, colore neutro, per impedire la formazione dello strato di dispersione. Utilizzabile anche come pasta try-in.

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE Assortimenti**VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING SET****VITA ADIVA SELF-ADHESIVE SET
FASASV1**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA ADIVA S-CEM A2 Universal
1	trasparen te	VITA ADIVA OXY-PREVENT 3 ml inkl. 1 Confezione Cannule di applicazione monouso
1	3 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	20 pz.	Cannule di applicazione monouso rosse per CERA ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA M-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 4:1

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING VERSION

VITA ADIVA S-CEM, 5 ml

Denominazione	Cod. 5 ml
A2 Universal	FASCEMA25
Translucent	FASCEMT5

VITA ADIVA® COMPONENTS

Denominazione	Cod.
VITA ADIVA CERA-ETCH, 3 ml acido fluoridrico in gel al 5%	FACE3
VITA ADIVA CERA-ETCH, 6 ml acido fluoridrico in gel al 5%	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME, 5 ml Ceramic primer	FACP5
VITA ADIVA M-PRIME, 5 ml Primer per metalli	FAMP5

VITA ADIVA OXY-PREVENT, 10 pz.

Denominazione	Cod. 10 pz.
3 ml inkl. 1 Confezione Cannule di applicazione monouso, trasparente	FAOP3V1

Denominazione	Cod.
VITA ADIVA T-BOND SET (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) Sistema Adesivo a indurimento duale	FATBS
VITA ADIVA TOOTH-ETCH, 3 ml (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) acido fosforico in gel al 37%	FATE3
VITA ADIVA ZR-PRIME, 5 ml Primer per biossido di zirconio	FAZRP5

VITA ADIVA® ACCESSORIES

Denominazione	Cod.
VITA ADIVA Mixing-Trays, 25 pcs.	FAAT25
VITA ADIVA Microbrush, 25 pcs.	FAMB25
VITA ADIVA T-Mixer 1:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE)	FATM11
VITA ADIVA T-Mixer 4:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA SELF-ADHESIVE)	FATM41

VITA ADIVA® TE-CEM



Descrizione

VITA ADIVA TE-CEM è un cemento-resina a indurimento duale per il fissaggio provvisorio.

E' disponibile nel colore Translucent.

VITA ADIVA® TE-CEM Articoli**VITA ADIVA® TE-CEM**

VITA ADIVA TE-CEM, 5 ml

Denominazione	Cod. 5 ml
Translucent	FATECEM5

VITA ADIVA® IA-CEM

Soluzione di fissaggio ultraopaco per riabilitazioni implantari



Descrizione

VITA ADIVA IA-CEM è un composito di fissaggio ultraopaco, a indurimento duale con elevata capacità di mascheramento per la protesi implantare.

Serve per il fissaggio adesivo definitivo di corone(-abutment) e mesostrutture su basi di adesione/titanio e abutments individuali in titanio e biossido di zirconio.

Col composito di fissaggio sono disponibili adesivi specifici per materiale per un'unione duratura tra restauro e abutment.


VITA ADIVA® IA-CEM Assortimenti**VITA ADIVA® IA-CEM****VITA ADIVA® IA-CEM SET****VITA ADIVA® IA-CEM SET****FAIACEMSET**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA ADIVA IA-CEM Ultra opaque
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 1:1
1	6 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays

VITA ADIVA® IA-CEM Articoli**VITA ADIVA® IA-CEM**

VITA ADIVA IA-CEM, 5 ml

Denominazione	Cod. 5 ml
Ultra opaque	FAIACEMU05

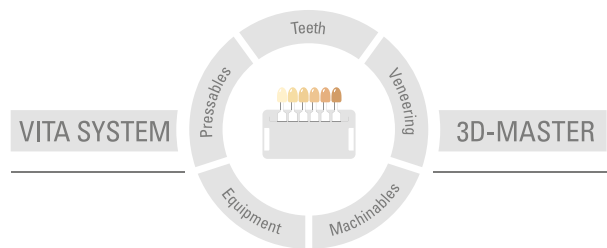

I nostri prodotti sono sviluppati per l'impiego nel settore dentale e devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni di impiego. Le rappresentazioni ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Stato informazione: 07/2024

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik